




INTERVENCIONISMO CARDÍACO

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

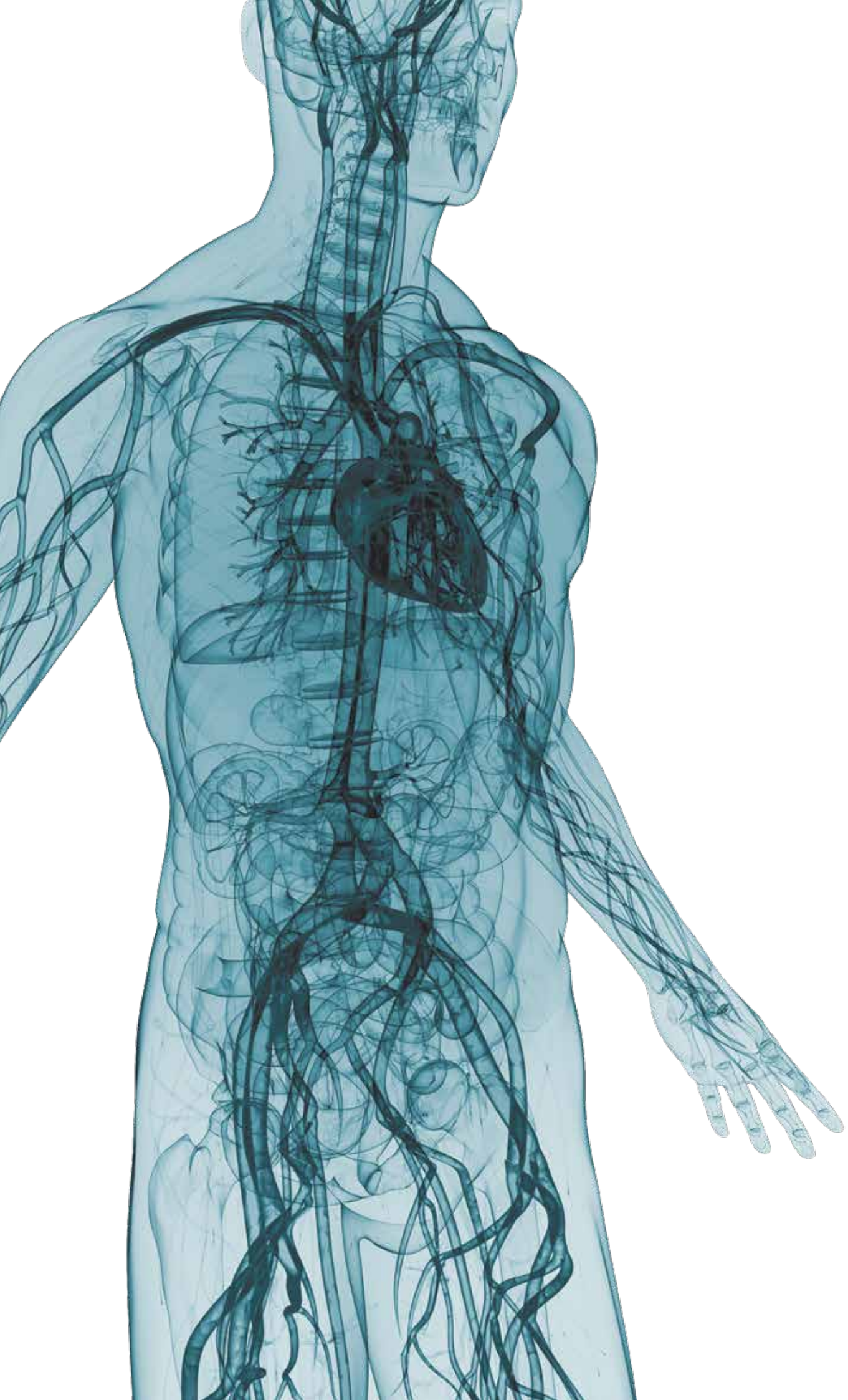

MENSAJE DE NUESTRO FUNDADOR Y DIRECTOR EJECUTIVO

Merit Medical fue fundado con un fuerte deseo de desarrollar asociaciones con los proveedores de atención sanitaria. Trabajando codo con codo con usted y escuchando sus retos, somos capaces de diseñar, fabricar y distribuir dispositivos médicos en los que pueda confiar para mejorar la salud y el bienestar de aquellos pacientes a los que ambos servimos.

Nuestro catálogo de Intervencionismo cardíaco ofrece numerosas opciones de productos con abundantes prestaciones, así como la información técnica que necesita para respaldar sus decisiones de compra. Estos productos han sido diseñados para asistir en cada paso de los procesos de intervención y diagnóstico, desde el acceso al cierre. Nos sentimos orgullosos de este completo y diverso catálogo de productos que hemos desarrollado para ayudar a los proveedores de atención sanitaria a ofrecer un cuidado eficiente, centrado en el paciente y rentable.

Todos los días, nos esforzamos por entender, innovar y estar a la altura de lo que nuestros socios sanitarios y los pacientes a los que servimos esperan de nosotros.



Fred Lampropoulos
Fundador, presidente y director ejecutivo
Merit Medical Systems, Inc.



Understand. Innovate. Deliver.™

ACCESO

ACCESORIOS PARA EL ABORDAJE RADIAL

Apoyabrazos de acceso radial Rad Board®	3
Accesorios Rad Board	3-4
Rad Board Xtra™	3
Rad Trac®	4
Rad Rest®	4

AGUJAS Y BISTURÍES

Agujas angiográficas Merit Advance®	5
Agujas angiográficas de seguridad Merit Advance®	7
Bisturíes de seguridad Futura®	8

INTRODUCTORES

Introduectores hidrofílicos PreludeEASE™	9
Introduectores de acceso radial Prelude®- miniaccess	10
Introduectores PreludePRO™	11
Introduectores Prelude con aguja Merit Advance®	12
Introduectores Prelude de 11 cm	13
Introduectores Prelude de 23 cm	14
Introduectores Prelude ACT™	15

OBTURADORES Y GUÍAS

Obturadores Prelude	16
Guías Prelude	16

ANGIOGRAFÍA

CATÉTERES PARA DIAGNÓSTICO CARDIOLÓGICO

Directorio de catéteres	17
Ilustraciones de formas de catéteres	19-20
Catéteres para diagnóstico cardiológico Performa®	21-36

GUÍAS DIAGNÓSTICAS

Guías diagnósticas InQwire®	37
-----------------------------	----

GUÍAS HIDROFÍLICAS

Guías hidrofílicas Merit Laureate®	37
------------------------------------	----

ACCESORIOS PARA GUÍAS

Dispositivos de torque Torq™ H2O	38
Dispositivo de torque SeaDragon™	38

MANEJO DE FLUIDOS Y TUBOS

Sistema de administración de contraste Miser®	39
Sistemas de administración de contraste	40-41
Sets de administración de fluidos	42-44
Tubos de alta presión	45
Tubos de monitorización de presión	46
Bolsas infusoras de presión-PIB	47

MANIFOLDS, LLAVES DE PASO Y ADAPTADORES

Manifolds Merit®	48-49
Manifolds Devos™	50
Sistemas de administración de contraste a presión	50
Manifolds TRAM® con transductor integrado	51
Manifolds TRAM-P™ con transductor integrado	52
Kits de respuesta rápida Right Heart	53
Llave Marquis®	54
Adaptadores rotatorios sin aire	55

JERINGAS

Jeringas de control coronario CCS™	56-57
Jeringas de lavado RXP®	58
Jeringa de vacío VacLok®	58

TRANSDUCTORES Y ACCESORIOS

Transductores de presión Meritrans®	59-62
Accesorios Meritrans	
Organizador Meritrans	62
Soporte Clipper	62
Cable reutilizable Meritrans	62

TABLA DE CONTENIDOS

TERAPÉUTICA

CATÉTERES DE ASPIRACIÓN

Catéter de aspiración ASAP®	65
Catéter de aspiración ASAPLP™	65

CATÉTERES GUÍA

Catéteres guía ConcierGE® de calidad superior	66-74
---	-------

VÁLVULAS Y ACCESORIOS HEMOSTÁTICOS

Válvulas y accesorios hemostáticos	75
Paquetes de angioplastia de Merit - MAP™	76

DISPOSITIVOS DE INFLADO

Dispositivos de inflado BasixCOMPAK™	77
Dispositivos de inflado BasixTOUCH™	78
Dispositivos de inflado Blue Diamond™	79

SISTEMA PARA POSICIONAMIENTO DE STENTS

Sistema de posicionamiento de stents Ostial PRO®	80
--	----

HEMOSTASIA

DISPOSITIVOS DE COMPRESIÓN

Dispositivo para compresión asistida SafeGuard®	83
Dispositivo de compresión SafeGuard Radial™	83
Dispositivo de compresión radial Finale®	84
Sistema de compresión de arteria radial RADstat®	84

ELECTROFISIOLOGÍA Y GESTIÓN DEL RITMO CARDÍACO

ELECTROFISIOLOGÍA

Introdutores transeptales de curva fija HeartSpan®	87
Agujas transeptales HeartSpan	88
Introdutores dirigibles 8,5 F HeartSpan	89

GESTIÓN DEL RITMO CARDÍACO

Introdutores pelables Prelude SNAP™	90
Introdutores hemostáticos pelables Classic Sheath™	91
Sistema Worley™ avanzado de administración LV	92-94
Catéteres para seno coronario (CSG) Worley	92
Introdutores de vena lateral Worley (LVI)	92
Selectores de venas Worley	93
Equipos avanzados de administración de medio de contraste Worley	93

SOLUCIONES PARA EL PROCEDIMIENTO COMPLETO

EQUIPOS, PAQUETES Y BANDEJAS DE PROCEDIMIENTO

Bandeja para angiografía 1	97
Bandeja para angiografía 2	98
Bandeja para angiografía 3	99
Equipos de angiografía personalizados	100
Kits de pericardiocentesis	101
Manta para paciente Paños radiales	102
Drape Armour® - Escudos de protección posicional	103

SEGURIDAD Y GESTIÓN DE DESECHOS

Sistemas de descarte BackStop® y MiniStop®	104
Sistemas de descarte BackStop+™ y MiniStop+™	104
Recipientes cerrados para desechos DugOut®	104
Descartador de elementos cortopunzantes ShortStop®	104
Descartador de elementos cortopunzantes ShortStop Advantage®	105
Descartador de elementos cortopunzantes ShortStop Grandstand®	105

BOLÍGRAFOS Y ETIQUETAS


PAL™ (bolígrafo y etiquetas)	106-107
Bolígrafo PAL	107
Etiquetas PAL personalizadas	108

ÍNDICES

Índice por número de referencia	109
Índice de nombres de producto	121

CÓMO ENCONTRAR Y SOLICITAR PRODUCTOS

- Si conoce el número de pieza del producto, utilice el Índice por número de referencia.
- Si conoce el nombre del producto, utilice el Índice por nombre de producto.
- Si no conoce el nombre del producto ni el número de pieza, consulte los diferentes capítulos para encontrar el producto que necesita.

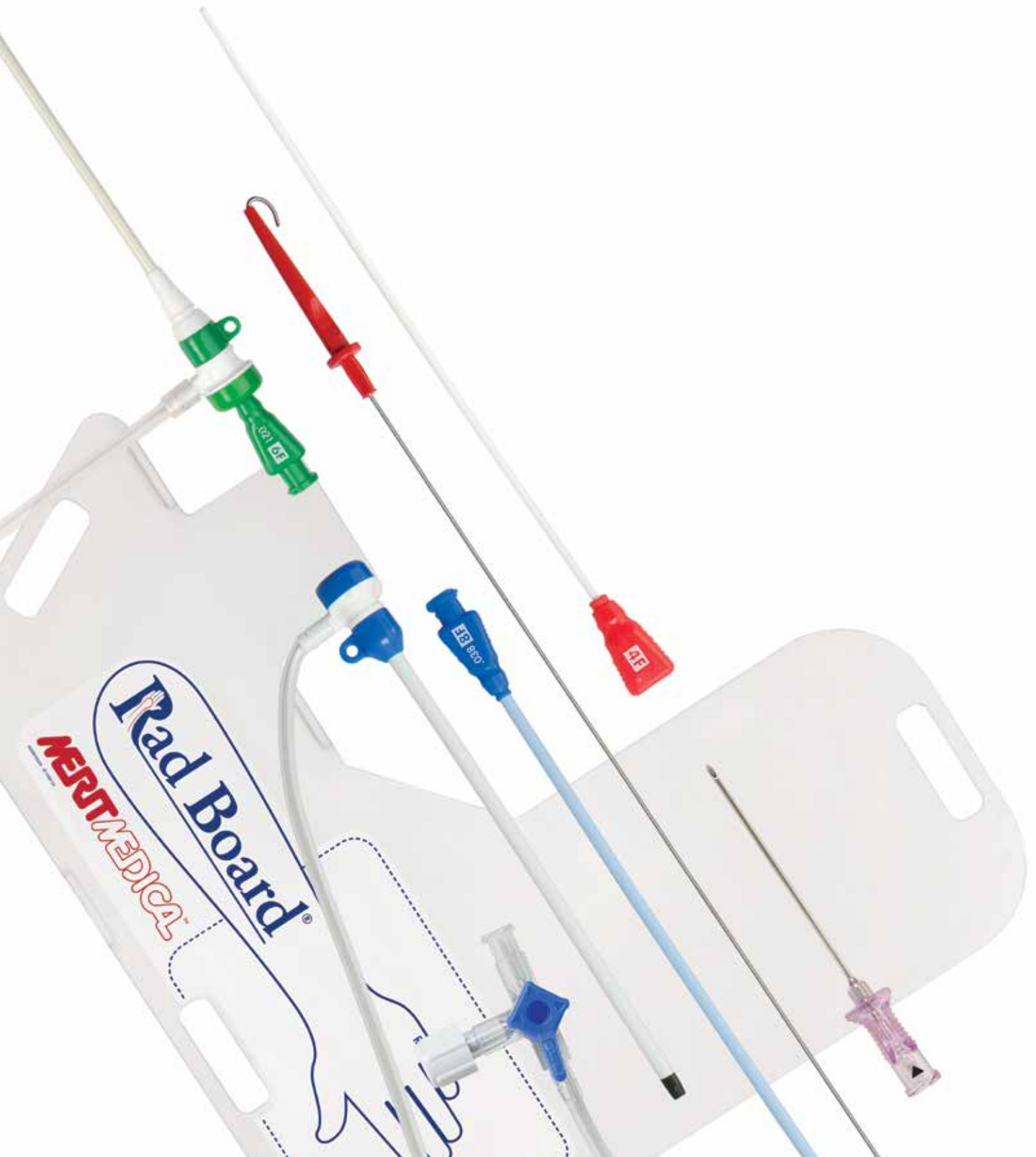

ACCESORIOS PARA EL ABORDAJE RADIAL

Apoyabrazos de acceso radial Rad Board®	3
Accesorios Rad Board	3-4
Rad Board Xtra™	3
Rad Trac®	4
Rad Rest®	4

AGUJAS Y BISTURÍES

Agujas angiográficas Merit Advance®	5
Agujas angiográficas de seguridad Merit Advance®	7
Bisturíes de seguridad Futura®	8

INTRODUCTORES

Introduectores hidrofílicos PreludeEASE™	9
Introduectores de acceso radial Prelude® - miniacceso	10
Introduectores Prelude PRO™	11
Introduectores Prelude con aguja Merit Advance®	12
Introduectores Prelude de 11 cm	13
Introduectores Prelude de 23 cm	14
Introduectores Prelude ACT™	15

OBTURADORES Y GUÍAS

Obturadores Prelude	16
Guías Prelude	16

RAD BOARD® Y ACCESORIOS

El Rad Board y los productos accesorios ofrecen apoyo para los procedimientos de acceso por vía radial y optimizan la eficacia de dichas intervenciones simplificando y normalizando su organización.

APOYABRAZOS DE ACCESO RADIAL RAD BOARD®

El Rad Board de Merit Medical es una placa de PVC rígido que se utiliza para proporcionar apoyo para el brazo de un paciente durante una intervención de acceso por vía radial o similar. El Rad Board contiene una fina capa de Xenolite®* TB (15" x 9"/38 cm x 23 cm) que ofrece protección adicional contra la dispersión de radiación. El Rad Board es el único soporte para sujeción del brazo que ofrece protección frente a la dispersión de radiación¹. Las líneas de puntos que figuran sobre la etiqueta del logotipo del producto indican la posición de la capa de Xenolite TB. El Rad Board es reversible, reutilizable y no estéril. Se vende por unidades.

Número de referencia RB100

¹Datos en el archivo.



RAD BOARD XTRA™

El Rad Board Xtra de Merit Medical es una placa de PVC rígido concebida para utilizarse conjuntamente con el Rad Board® de Merit Medical (se venden por separado). El Rad Board Xtra permite una extensión perpendicular de 90° del brazo del paciente durante el acceso y ofrece 11" (28 cm) adicionales de espacio de trabajo cuando se coloca junto al Rad Board. El Rad Board Xtra es reversible, reutilizable y no estéril. Se vende por unidades.

Número de referencia RBX



*Xenolite® es una marca comercial registrada de Lite Tech, Inc.

RAD TRAC®

El Rad Trac de Merit Medical, fabricado de PVC rígido, está concebido para utilizarse conjuntamente con el Rad Board® de Merit Medical (se venden por separado). El Rad Trac facilita la colocación del Rad Board cuando el paciente ya está en la mesa de intervención. El Rad Trac es reutilizable y no estéril. Se vende por unidades.

Número de referencia RT913

**RAD REST®**

El Rad Rest de Merit Medical es una almohadilla ajustable de estabilización y colocación que se utiliza para hiperextender la muñeca y apoyar el antebrazo/codo durante las intervenciones de acceso radial. Se ajusta de forma sencilla para adaptarse a cualquier longitud de las extremidades superiores. Está fabricado con espuma blanda para ofrecer la mayor comodidad posible al paciente. El Rad Rest es desechable y no estéril. Empaquetados de manera individual, cajas de 10 unidades.

Número de referencia RR811




AGUJAS ANGIOGRÁFICAS MERIT ADVANCE®


La aguja angiográfica Merit Advance cuenta con un diseño de conector exclusivo, con un agarre ergonómico y un punto de referencia para guiar el bisel. Su filo mejorado facilita la introducción en los tejidos y las paredes de los vasos sanguíneos, y su diseño facilita la inserción de la guía y la posterior extracción de la aguja por la guía.

Número de referencia	Calibre	Espesor de la pared	Acepta guía	Longitud (cm)	Longitud (pulgadas)	Acabado
AGUJA DE PARED ÚNICA						
						
AD18T51W	18	Fino	0,038" (0,97 mm)	5,0	2	Suave
AD18T71W	18	Fino	0,038" (0,97 mm)	7,0	2 3/4	Suave
AD18T71W-E	18	Fino	0,038" (0,97 mm)	7,0	2 3/4	Eco
AD18T71WT	18	Fino	0,038" (0,97 mm)	7,0	2 3/4	Suave
AD18N91W	18	Normal	0,038" (0,97 mm)	9,0	3 1/2	Suave
AD19U41W	19	Ultra	0,035" (0,89 mm)	4,0	1 1/2	Suave
AD19U51W	19	Ultra	0,035" (0,89 mm)	5,0	2	Suave
AD19U71W	19	Ultra	0,035" (0,89 mm)	7,0	2 3/4	Suave
AD20T41W	20	Fino	0,025" (0,64 mm)	4,0	1 1/2	Suave
AD20T71W	20	Fino	0,025" (0,64 mm)	7,0	2 3/4	Suave
AD21T21W	21	Fino	0,021" (0,53 mm)	2,5	1	Suave
AD21T41W	21	Fino	0,021" (0,53 mm)	4,0	1 1/2	Suave
AD21T41W-E	21	Fino	0,021" (0,53 mm)	4,0	1 1/2	Eco
AD21T71W	21	Fino	0,021" (0,53 mm)	7,0	2 3/4	Suave
AD21T71W-E	21	Fino	0,021" (0,53 mm)	7,0	2 3/4	Eco
AD21T91W	21	Fino	0,021" (0,53 mm)	9,0	3 1/2	Suave
AD21T91W-E	21	Fino	0,021" (0,53 mm)	9,0	3 1/2	Eco
AD21T91R*	21	Fino	0,021" (0,53 mm)	9,0	3 1/2	Suave
AD21T91RE*	21	Fino	0,021" (0,53 mm)	9,0	3 1/2	Eco

AGUJA DE PARED ÚNICA CON PROTECCIÓN SELDINGER

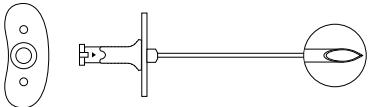						
AD18T51WS	18	Fino	0,038" (0,97 mm)	5,0	2	Suave
AD18T71WS	18	Fino	0,038" (0,97 mm)	7,0	2 3/4	Suave
AD19U71WS	19	Ultra	0,035" (0,89 mm)	7,0	2 3/4	Suave

AGUJA DE PARED ÚNICA CON PROTECCIÓN COURNAND

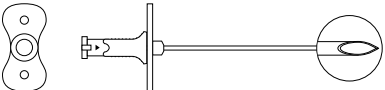						
AD18T71WC	18	Fino	0,038" (0,97 mm)	7,0	2 3/4	Suave
AD19U41WC	19	Ultra	0,035" (0,89 mm)	4,0	1 1/2	Suave
AD19U71WC	19	Ultra	0,035" (0,89 mm)	7,0	2 3/4	Suave
AD21T41WC	21	Fino	0,018" (0,46 mm) o 0,021" (0,53 mm)	4,0	1 1/2	Suave

*Disponibles en cajas de 10, 4 cajas por estuche; resto de agujas empaquetadas en cajas de 25, 4 cajas por estuche.



AD21T71W-E

Aguja angiográfica Merit Advance®
Aguja de pared única, calibre 21,
con acabado eco mejorado



AD18T51WS

Aguja angiográfica Merit Advance®
Aguja de pared única con protección
Seldinger, calibre 18,
con acabado suave



AD18T71WC

Aguja angiográfica Merit Advance®
Aguja de pared única con protección
Cournand, calibre 18, con acabado suave

AGUJAS ANGIOGRÁFICAS DE SEGURIDAD MERIT ADVANCE®

Gracias al exclusivo diseño de las agujas angiográficas de seguridad Merit Advance, los médicos pueden activar de forma sencilla un mecanismo de seguridad de perfil bajo que protege el bisel de la aguja después de su uso. El conector de esta aguja de introducción es transparente para lograr una mayor visibilidad y está diseñado con un agarre ergonómico para su fácil manipulación.

Número de referencia	Calibre	Aletas	Acepta guía	Longitud (cm)	Longitud (pulgadas)
SL18T71W	18	sin aletas	0,038" (0,97 mm)	7,0	2 3/4
SL18T71WS	18	con aletas	0,038" (0,97 mm)	7,0	2 3/4
SL21T71W	21	sin aletas	0,021" (0,53 mm)	7,0	2 3/4
SL21T71WS	21	con aletas	0,021" (0,53 mm)	7,0	2 3/4

SIN ALETAS




CON ALETAS



PROTEGIDA

BISTURÍES DE SEGURIDAD FUTURA®

Los bisturíes de seguridad retráctiles automáticos están diseñados para proteger a los médicos y pacientes de cortes accidentales al pasar los bisturíes o desecharlos. Empaquetados en cajas de 50 unidades, 2 cajas por estuche.

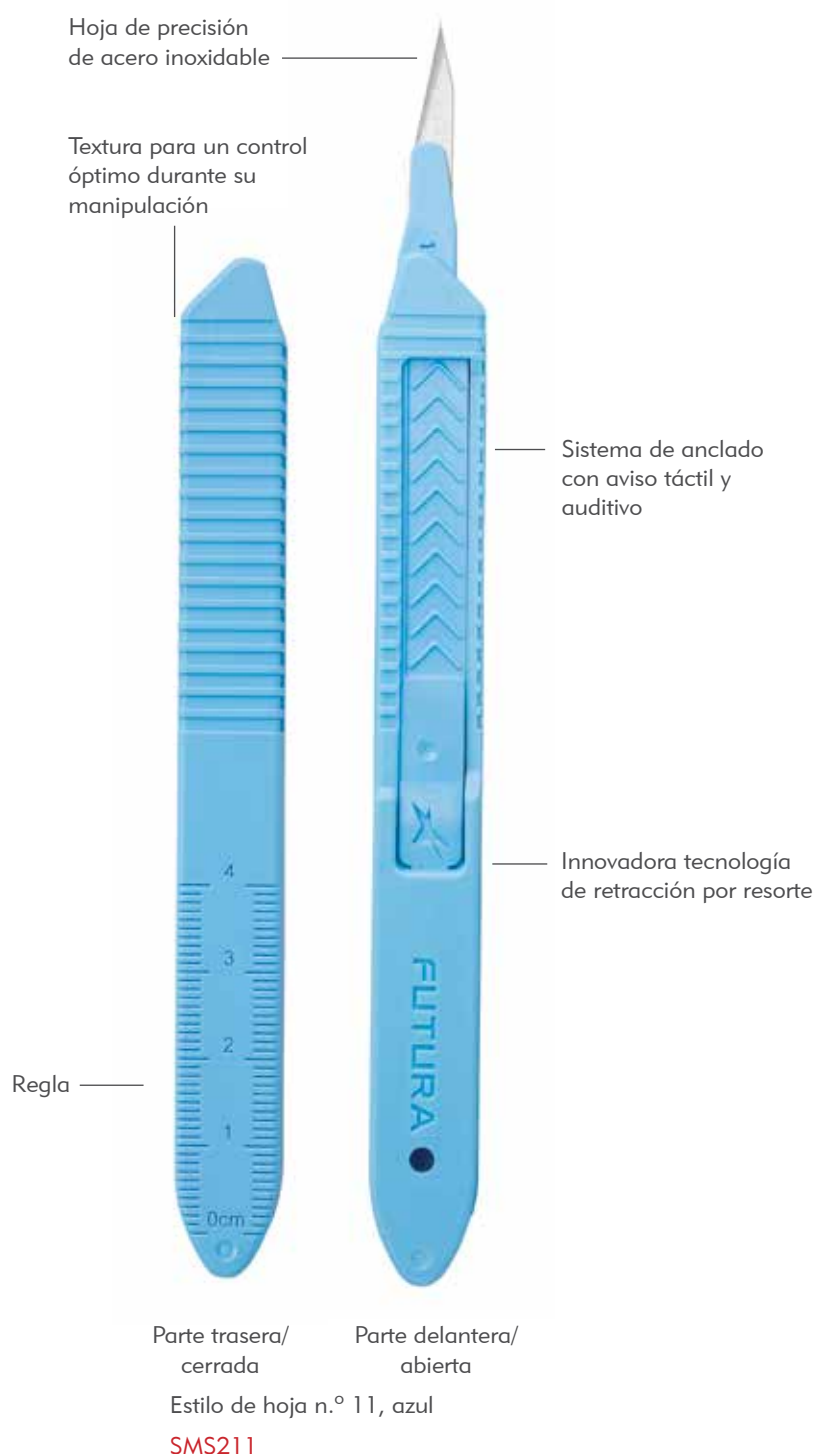

Estilo de hoja n.º 15, amarillo
SMS215



Estilo de hoja n.º 10, verde
SMS210

Número de referencia	Descripción	Color
SMS210	Estilo de hoja n.º 10	verde
SMS211	Estilo de hoja n.º 11	azul
SMS215	Estilo de hoja n.º 15	amarillo

INTRODUCTORES HIDROFÍLICOS PRELUDEEASE™

El introductor hidrofilico PreludeEASE le ayuda a lograr un acceso radial rápido y eficaz reduciendo al mínimo la posibilidad de espasmos gracias a su recubrimiento hidrofílico, que se extiende hasta la punta del tubo, y a sus transiciones excelentes para una inserción suave. Disponible en 4 F-7 F para pacientes con arterias de menor diámetro y en tamaños más grandes para procedimientos de diagnóstico e intervención. Este producto está disponible en kits con múltiples configuraciones, así como en kits personalizados para satisfacer sus necesidades específicas de intervención.

CADA KIT INCLUYE:

- Introductor y dilatador PreludeEASE
- Aguja o aguja de dos partes Merit Advance®
- Guía: disponibles con coil en espiral, mandril de acero inoxidable, de nitinol o con camisa de plástico
- Dispositivo para inserción de guías BowTie™ (solo se incluye en los kits que incorporan guía de 0,018")



Kits personalizados disponibles.

Número de referencia	Tamaño en French	Longitud	Aguja	Diámetro/Longitud de la guía	Tipo de guía	Componentes
PHR4F7018SC	4	7 cm	21 G x 4 cm Advance	0,018" x 45 cm	Muelle; Punta recta flexible	BowTie
PHR5F7018SC	5	7 cm	21 G x 4 cm Advance	0,018" x 45 cm	Muelle; Punta recta flexible	BowTie
PHR6F7018SC	6	7 cm	21 G x 4 cm Advance	0,018" x 45 cm	Muelle; Punta recta flexible	BowTie
PHR4F11018SC	4	11 cm	21 G x 4 cm Advance	0,018" x 45 cm	Muelle; Punta recta flexible	BowTie
PHR5F11018SC	5	11 cm	21 G x 4 cm Advance	0,018" x 45 cm	Muelle; Punta recta flexible	BowTie
PHR6F11018SC	6	11 cm	21 G x 4 cm Advance	0,018" x 45 cm	Muelle; Punta recta flexible	BowTie
PHR7F11018SC	7	11 cm	21 G x 4 cm Advance	0,018" x 45 cm	Muelle; Punta recta flexible	BowTie
PHR4F11018NTPD	4	11 cm	21 G x 4 cm Advance	0,018" x 40 cm	Mandril NT/PD (paladio)	BowTie
PHR5F11018NTPD	5	11 cm	21 G x 4 cm Advance	0,018" x 40 cm	Mandril NT/PD (paladio)	BowTie
PHR6F11018NTPD	6	11 cm	21 G x 4 cm Advance	0,018" x 40 cm	Mandril NT/PD (paladio)	BowTie
PHR4F16018NT	4	16 cm	21 G x 4 cm Advance	0,018" x 80 cm	Mandril NT/PD (platino)	BowTie
PHR5F16018NT	5	16 cm	21 G x 4 cm Advance	0,018" x 80 cm	Mandril NT/PD (platino)	BowTie
PHR6F16018NT	6	16 cm	21 G x 4 cm Advance	0,018" x 80 cm	Mandril NT/PD (platino)	BowTie
PHR7F16018NT	7	16 cm	21 G x 4 cm Advance	0,018" x 80 cm	Mandril NT/PD (platino)	BowTie
PHR4F23018NT	4	23 cm	21 G x 4 cm Advance	0,018" x 80 cm	Mandril NT/PD (platino)	BowTie
PHR5F23018NT	5	23 cm	21 G x 4 cm Advance	0,018" x 80 cm	Mandril NT/PD (platino)	BowTie
PHR6F23018NT	6	23 cm	21 G x 4 cm Advance	0,018" x 80 cm	Mandril NT/PD (platino)	BowTie
PHR7F23018NT	7	23 cm	21 G x 4 cm Advance	0,018" x 80 cm	Mandril NT/PD (platino)	BowTie
PHR4F11021SC	4	11 cm	21 G x 4 cm Advance	0,021" x 45 cm	Muelle; Punta recta flexible	No
PHR5F11021SC	5	11 cm	21 G x 4 cm Advance	0,021" x 45 cm	Muelle; Punta recta flexible	No
PHR5F11021SCSN	5	11 cm	21 G x 2,5 cm Advance	0,021" x 45 cm	Muelle; Punta recta flexible	No
PHR6F11021SC	6	11 cm	21 G x 4 cm Advance	0,021" x 45 cm	Muelle; Punta recta flexible	No
PHR6F11021SCSN	6	11 cm	21 G x 2,5 cm Advance	0,021" x 45 cm	Muelle; Punta recta flexible	No
PHR7F11021SC	7	11 cm	21 G x 4 cm Advance	0,021" x 45 cm	Muelle; Punta recta flexible	No
PHR4F16021SC	4	16 cm	21 G x 4 cm Advance	0,021" x 80 cm	Muelle; Punta recta flexible	No
PHR5F16021SC	5	16 cm	21 G x 4 cm Advance	0,021" x 80 cm	Muelle; Punta recta flexible	No
PHR6F16021SC	6	16 cm	21 G x 4 cm Advance	0,021" x 80 cm	Muelle; Punta recta flexible	No
PHR7F16021SC	7	16 cm	21 G x 4 cm Advance	0,021" x 80 cm	Muelle; Punta recta flexible	No
PHR4F23021SC	4	23 cm	21 G x 4 cm Advance	0,021" x 80 cm	Muelle; Punta recta flexible	No
PHR5F23021SC	5	23 cm	21 G x 4 cm Advance	0,021" x 80 cm	Muelle; Punta recta flexible	No
PHR6F23021SC	6	23 cm	21 G x 4 cm Advance	0,021" x 80 cm	Muelle; Punta recta flexible	No
PHR7F23021SC	7	23 cm	21 G x 4 cm Advance	0,021" x 80 cm	Muelle; Punta recta flexible	No
PHR6F11035SC	6	11 cm	No	0,035" x 50 cm	SS; DE - flexible y 3 mm J	No
PHR7F11035SC	7	11 cm	No	0,035" x 50 cm	SS; DE - flexible y 3 mm J	No
PHR4F11021PW	4	11 cm	22 G x 2,5 cm (2 partes)	0,021" x 45 cm	NT plástico; Cono corto; Angular *	
PHR5F11021PW	5	11 cm	22 G x 2,5 cm (2 partes)	0,021" x 45 cm	NT plástico; Cono corto; Angular *	
PHR6F11021PW	6	11 cm	22 G x 2,5 cm (2 partes)	0,021" x 45 cm	NT plástico; Cono corto; Angular *	
PHR4F23021PW	4	23 cm	22 G x 2,5 cm (2 partes)	0,021" x 80 cm	NT plástico; Cono corto; Angular *	
PHR5F23021PW	5	23 cm	22 G x 2,5 cm (2 partes)	0,021" x 80 cm	NT plástico; Cono corto; Angular *	
PHR6F23021PW	6	23 cm	22 G x 2,5 cm (2 partes)	0,021" x 80 cm	NT plástico; Cono corto; Angular *	
PHR4F11025PW	4	11 cm	20 G x 3,2 cm (2 partes)	0,025" x 45 cm	NT plástico; Cono corto; Angular *	
PHR5F11025PW	5	11 cm	20 G x 3,2 cm (2 partes)	0,025" x 45 cm	NT plástico; Cono corto; Angular *	
PHR6F11025PW	6	11 cm	20 G x 3,2 cm (2 partes)	0,025" x 45 cm	NT plástico; Cono corto; Angular *	
PHR4F16025PW	4	16 cm	20 G x 3,2 cm (2 partes)	0,025" x 80 cm	NT plástico; Cono corto; Angular *	
PHR5F16025PW	5	16 cm	20 G x 3,2 cm (2 partes)	0,025" x 80 cm	NT plástico; Cono corto; Angular *	
PHR6F16025PW	6	16 cm	20 G x 3,2 cm (2 partes)	0,025" x 80 cm	NT plástico; Cono corto; Angular *	

AGUJA DE DOS PARTES

K12-08289 22 G x 2,5 cm (2 partes) **

K12-08290 22 G x 3,2 cm (2 partes) **


Empaquetados en bandejas; cajas de 5 unidades. Diámetros de la guía: 0,018"=0,46 mm 0,021"=0,53 mm 0,025"=0,64 mm 0,035"=0,89 mm NT=Nitinol PD=Paladio SS=Acero inoxidable DE=Con dos extremos, recto/3 mm en J

* Incluye bisturí de pulgar y jeringa de 3 mL. **Empaquetados de manera individual, en cajas de 35 unidades.

INTRODUCTORES DE ACCESO RADIAL PRELUDE®- MINIACCESO

Los introductores de acceso radial Prelude para miniacceso facilitan la colocación del introductor a través de una aguja pequeña (21 G o 20 G) y una guía pequeña (0,46 mm o 0,64 mm). Los introductores están disponibles en tres longitudes (7 cm, 11 cm y 23 cm).

Los introductores están empaquetados en una funda que contiene el introductor, el dilatador vascular, la guía y la aguja. Estos productos pueden utilizarse para un acceso transradial, braquial y femoral.

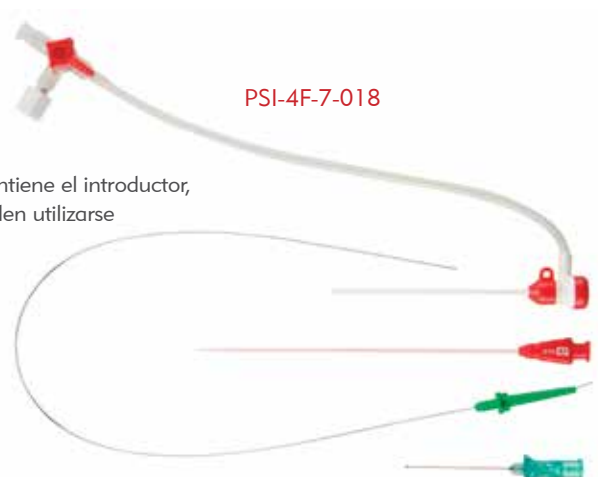

Número de referencia	Tamaño en French	Longitud	Diámetro/Longitud de la guía	Núcleo/Punta de la guía	Calibre/ Longitud de la aguja	Color del conector
PSI-4F-7-018	4	7 cm	0,018" (0,46 mm) x 40 cm	SS/SS	21 G x 4 cm	rojo
PSI-5F-7-018	5	7 cm	0,018" (0,46 mm) x 40 cm	SS/SS	21 G x 4 cm	gris
PSI-6F-7-018	6	7 cm	0,018" (0,46 mm) x 40 cm	SS/SS	21 G x 4 cm	verde
PSI-7F-7-018	7	7 cm	0,018" (0,46 mm) x 40 cm	SS/SS	21 G x 4 cm	naranja
PSI-4F-7-018NT4	4	7 cm	0,018" (0,46 mm) x 40 cm	NT/PT	21 G x 4 cm	rojo
PSI-5F-7-018NT4	5	7 cm	0,018" (0,46 mm) x 40 cm	NT/PT	21 G x 4 cm	gris
PSI-6F-7-018NT4	6	7 cm	0,018" (0,46 mm) x 40 cm	NT/PT	21 G x 4 cm	verde
PSI-4F-11-018	4	11 cm	0,018" (0,46 mm) x 40 cm	SS/SS	21 G x 4 cm	rojo
PSI-5F-11-018	5	11 cm	0,018" (0,46 mm) x 40 cm	SS/SS	21 G x 4 cm	gris
PSI-6F-11-018	6	11 cm	0,018" (0,46 mm) x 40 cm	SS/SS	21 G x 4 cm	verde
PSI-7F-11-018	7	11 cm	0,018" (0,46 mm) x 40 cm	SS/SS	21 G x 4 cm	naranja
PSI-4F-11-018NT4	4	11 cm	0,018" (0,46 mm) x 40 cm	NT/PT	21 G x 4 cm	rojo
PSI-5F-11-018NT4	5	11 cm	0,018" (0,46 mm) x 40 cm	NT/PT	21 G x 4 cm	gris
PSI-6F-11-018NT4	6	11 cm	0,018" (0,46 mm) x 40 cm	NT/PT	21 G x 4 cm	verde
PRO-4F-11-018NT7*	4	11 cm	0,018" (0,46 mm) x 40 cm	NT/PT	21 G x 7 cm	rojo
PRO-5F-11-018NT7*	5	11 cm	0,018" (0,46 mm) x 40 cm	NT/PT	21 G x 7 cm	gris
PRO-6F-11-018NT7*	6	11 cm	0,018" (0,46 mm) x 40 cm	NT/PT	21 G x 7 cm	verde
PRO-7F-11-018NT7*	7	11 cm	0,018" (0,46 mm) x 40 cm	NT/PT	21 G x 7 cm	naranja
PSI-4F-23-018NT4	4	23 cm	0,018" (0,46 mm) x 80 cm	NT/PT	21 G x 4 cm	rojo
PSI-5F-23-018NT4	5	23 cm	0,018" (0,46 mm) x 80 cm	NT/PT	21 G x 4 cm	gris
PSI-6F-23-018NT4	6	23 cm	0,018" (0,46 mm) x 80 cm	NT/PT	21 G x 4 cm	verde
PSI-7F-23-018NT4	7	23 cm	0,018" (0,46 mm) x 80 cm	NT/PT	21 G x 4 cm	naranja
PSI-4F-23-018NT7	4	23 cm	0,018" (0,46 mm) x 80 cm	NT/PT	21 G x 7 cm	rojo
PSI-5F-23-018NT7	5	23 cm	0,018" (0,46 mm) x 80 cm	NT/PT	21 G x 7 cm	gris
PSI-6F-23-018NT7	6	23 cm	0,018" (0,46 mm) x 80 cm	NT/PT	21 G x 7 cm	verde
PSI-4F-7-025	4	7 cm	0,025" (0,64 mm) x 50 cm	-	20 G x 4 cm	rojo
PSI-5F-7-025	5	7 cm	0,025" (0,64 mm) x 50 cm	-	20 G x 4 cm	gris
PSI-6F-7-025	6	7 cm	0,025" (0,64 mm) x 50 cm	-	20 G x 4 cm	verde
PSI-4F-11-025	4	11 cm	0,025" (0,64 mm) x 50 cm	-	20 G x 4 cm	rojo
PSI-5F-11-025	5	11 cm	0,025" (0,64 mm) x 50 cm	-	20 G x 4 cm	gris
PSI-6F-11-025	6	11 cm	0,025" (0,64 mm) x 50 cm	-	20 G x 4 cm	verde
La guía de 0,25" (0,64 mm) es de acero inoxidable y tiene dos extremos (3 mm en J y flexible).						
K15-00104	-	-	0,025" (0,64 mm) x 50 cm	-	-	-
K15-00174	6	11 cm	0,018" (0,46 mm) x 45 cm	SC	21 G x 4 cm	verde
K15-00201**	7	7 cm	0,018" (0,46 mm) x 40 cm	SS/SS	21 G x 7 cm	naranja

Empaquetados en fundas, cajas de 5 unidades.


SS=Acero inoxidable PT=Punta de platino NT=Nitinol SC=Coil en espiral

*Incluye tubo de polipropileno PreludePRO™.

**Incluye dispositivo para la inserción de guías BowTie™ y aguja ecogénica.

INTRODUCTORES PRELUDEPRO™

Los introductores PreludePRO utilizan tubos de polipropileno (PRO), que ofrecen una mayor resiliencia y apoyo adicional durante la inserción y la intervención.

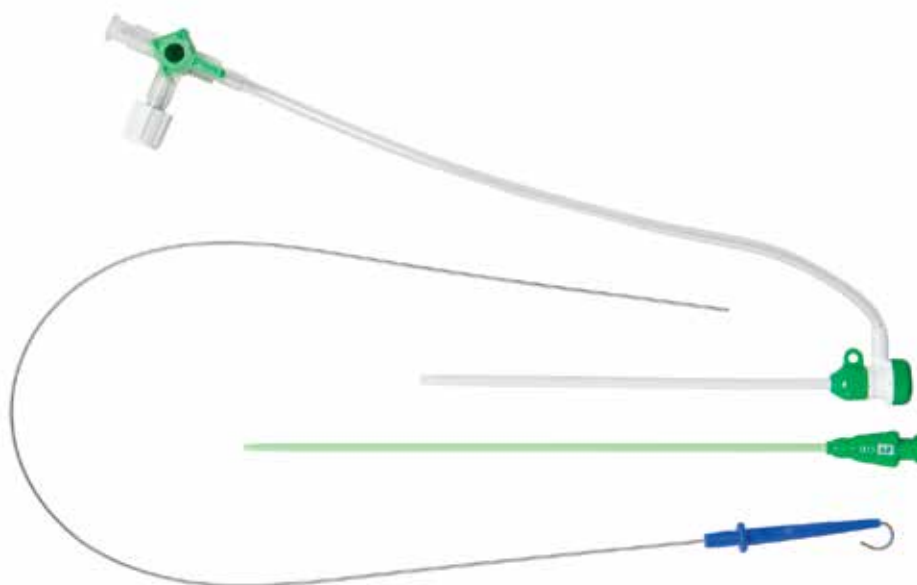


Número de referencia	Tamaño en French	Longitud	Diámetro/Longitud de la guía	Color del conector
PRO-4F-11-035	4	11 cm	0,035" (0,89 mm) x 50 cm	rojo
PRO-5F-11-035	5	11 cm	0,035" (0,89 mm) x 50 cm	gris
PRO-6F-11-035	6	11 cm	0,035" (0,89 mm) x 50 cm	verde
PRO-7F-11-035	7	11 cm	0,035" (0,89 mm) x 50 cm	naranja
PRO-8F-11-035	8	11 cm	0,035" (0,89 mm) x 50 cm	azul
PRO-5F-11-038	5	11 cm	0,038" (0,97 mm) x 50 cm	gris
PRO-6F-11-038	6	11 cm	0,038" (0,97 mm) x 50 cm	verde
PRO-7F-11-038	7	11 cm	0,038" (0,97 mm) x 50 cm	naranja
PRO-8F-11-038	8	11 cm	0,038" (0,97 mm) x 50 cm	azul
PRO-4F-11	4	11 cm	N/A	rojo
PRO-5F-11	5	11 cm	N/A	gris
PRO-6F-11	6	11 cm	N/A	verde
PRO-7F-11	7	11 cm	N/A	naranja
PRO-8F-11	8	11 cm	N/A	azul

Empaquetados en fundas, cajas de 5 unidades

INTRODUCTORES PRELUDE CON AGUJA MERIT ADVANCE®

Los introductores Prelude con aguja Merit Advance incluyen el introductor, el dilatador vascular, la guía y la aguja de acceso, todo ello empaquetado en una funda.

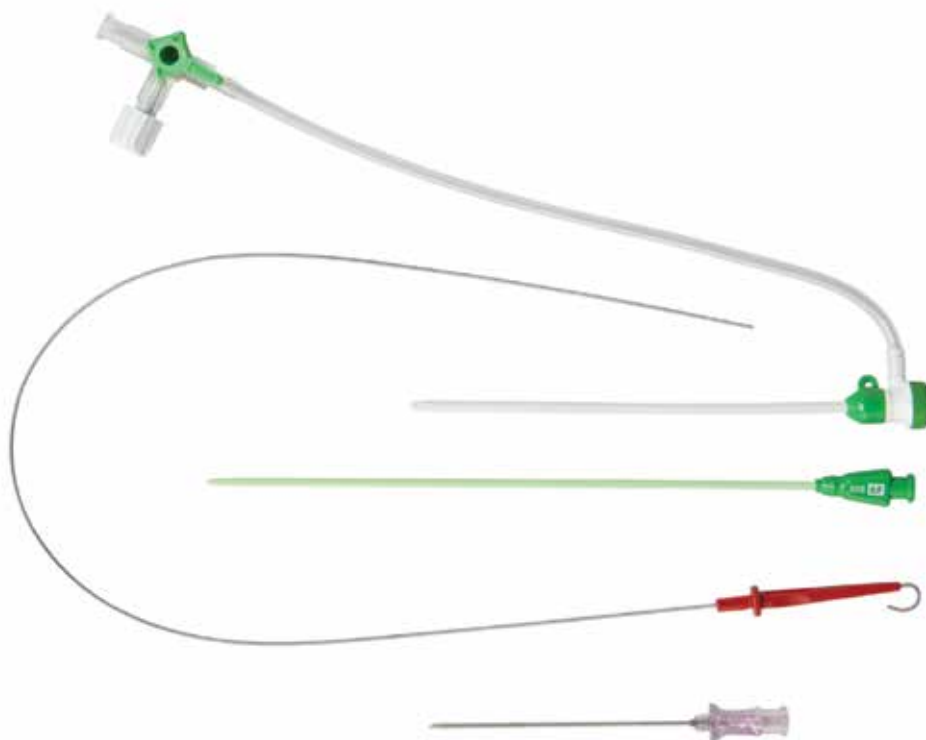


Número de referencia	Tamaño en French	Longitud	Diámetro/Longitud de la guía	Calibre/Longitud de la aguja	Color del conector
PSI-5F-11-035-18G	5	11 cm	0,035" (0,89 mm) x 50 cm	18 G x 7 cm	gris
PSI-6F-11-035-18G	6	11 cm	0,035" (0,89 mm) x 50 cm	18 G x 7 cm	verde
PSI-7F-11-035-18G	7	11 cm	0,035" (0,89 mm) x 50 cm	18 G x 7 cm	naranja
PSI-8F-11-035-18G	8	11 cm	0,035" (0,89 mm) x 50 cm	18 G x 7 cm	azul
PSI-5F-11-038-18G	5	11 cm	0,038" (0,97 mm) x 50 cm	18 G x 7 cm	gris
PSI-6F-11-038-18G	6	11 cm	0,038" (0,97 mm) x 50 cm	18 G x 7 cm	verde
PSI-7F-11-038-18G	7	11 cm	0,038" (0,97 mm) x 50 cm	18 G x 7 cm	naranja
PSI-8F-11-038-18G	8	11 cm	0,038" (0,97 mm) x 50 cm	18 G x 7 cm	azul
PRO-5F-11-038-18G*	5	11 cm	0,038" (0,97 mm) x 50 cm	18 G x 7 cm	gris
PRO-6F-11-038-18G*	6	11 cm	0,038" (0,97 mm) x 50 cm	18 G x 7 cm	verde

Empaquetados en fundas, cajas de 5 unidades. *Tubo PreludePRO™ (polipropileno).

INTRODUCTORES PRELUDE DE 11 CM

El introductor Prelude de 11 cm ofrece excelentes transiciones, inserciones suaves y mucho más. Consta de una válvula hemostática para reducir al mínimo la pérdida de sangre y facilita la inserción y la extracción de dispositivos. Empaquetado en una funda que mantiene seguros todos los componentes, en especial la guía. Los componentes se pueden enjuagar mientras están en la funda. Las guías son de acero inoxidable y tienen dos extremos, uno de 3 mm en J y otro recto flexible. El producto incluye un dilatador vascular, un introductor y una guía (también está disponible sin guía).

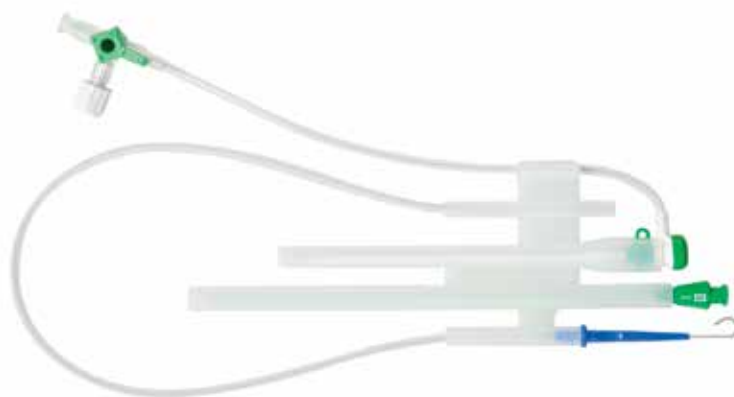

Número de referencia	Tamaño en French	Longitud	Diámetro/Longitud de la guía	Color del conector
PSI-4F-11-035	4	11 cm	0,035" (0,89 mm) x 50 cm	rojo
PSI-5F-11-035	5	11 cm	0,035" (0,89 mm) x 50 cm	gris
PSI-6F-11-035	6	11 cm	0,035" (0,89 mm) x 50 cm	verde
PSI-7F-11-035	7	11 cm	0,035" (0,89 mm) x 50 cm	naranja
PSI-8F-11-035	8	11 cm	0,035" (0,89 mm) x 50 cm	azul
PSI-5F-11-038	5	11 cm	0,038" (0,97 mm) x 50 cm	gris
PSI-6F-11-038	6	11 cm	0,038" (0,97 mm) x 50 cm	verde
PSI-7F-11-038	7	11 cm	0,038" (0,97 mm) x 50 cm	naranja
PSI-8F-11-038	8	11 cm	0,038" (0,97 mm) x 50 cm	azul
PSI-4F-11	4	11 cm	N/A	rojo
PSI-5F-11	5	11 cm	N/A	gris
PSI-6F-11	6	11 cm	N/A	verde
PSI-7F-11	7	11 cm	N/A	naranja
PSI-8F-11	8	11 cm	N/A	azul

Empaquetados en fundas, cajas de 5 unidades.

INTRODUCTORES PRELUDE DE 23 CM

El introductor Prelude de 23 cm ofrece excelentes transiciones, inserciones suaves y mucho más. Consta de una válvula hemostática para reducir al mínimo la pérdida de sangre y facilita la inserción y la extracción de dispositivos. Empaquetado en una funda que mantiene seguros todos los componentes, en especial la guía. Los componentes se pueden enjuagar mientras están en la funda. Las guías son de acero inoxidable y tienen dos extremos, uno flexible de 3 mm en J y otro recto flexible. El producto incluye un dilatador vascular, un introductor y una guía (también está disponible sin guía).




Número de referencia	Tamaño en French	Longitud	Diámetro/Longitud de la guía	Color del conector
PSI-4F-23-035	4	23 cm	0,035" (0,89 mm) x 80 cm	rojo
PSI-5F-23-035	5	23 cm	0,035" (0,89 mm) x 80 cm	gris
PSI-6F-23-035	6	23 cm	0,035" (0,89 mm) x 80 cm	verde
PSI-7F-23-035	7	23 cm	0,035" (0,89 mm) x 80 cm	naranja
PSI-8F-23-035	8	23 cm	0,035" (0,89 mm) x 80 cm	azul
PSI-5F-23-038	5	23 cm	0,038" (0,97 mm) x 80 cm	gris
PSI-6F-23-038	6	23 cm	0,038" (0,97 mm) x 80 cm	verde
PSI-7F-23-038	7	23 cm	0,038" (0,97 mm) x 80 cm	naranja
PSI-8F-23-038	8	23 cm	0,038" (0,97 mm) x 80 cm	azul
PSI-4F-23	4	23 cm	N/A	rojo
PSI-5F-23	5	23 cm	N/A	gris
PSI-6F-23	6	23 cm	N/A	verde
PSI-7F-23	7	23 cm	N/A	naranja
PSI-8F-23	8	23 cm	N/A	azul

Empaquetados en fundas, cajas de 5 unidades.

INTRODUCTORES PRELUDE ACT™

Los introductores Prelude ACT (tiempo de coagulación activado), que miden la mitad (calibre 0,5 F mayor), permiten una sencilla extracción de sangre a través de su brazo lateral, con o sin catéteres colocados.

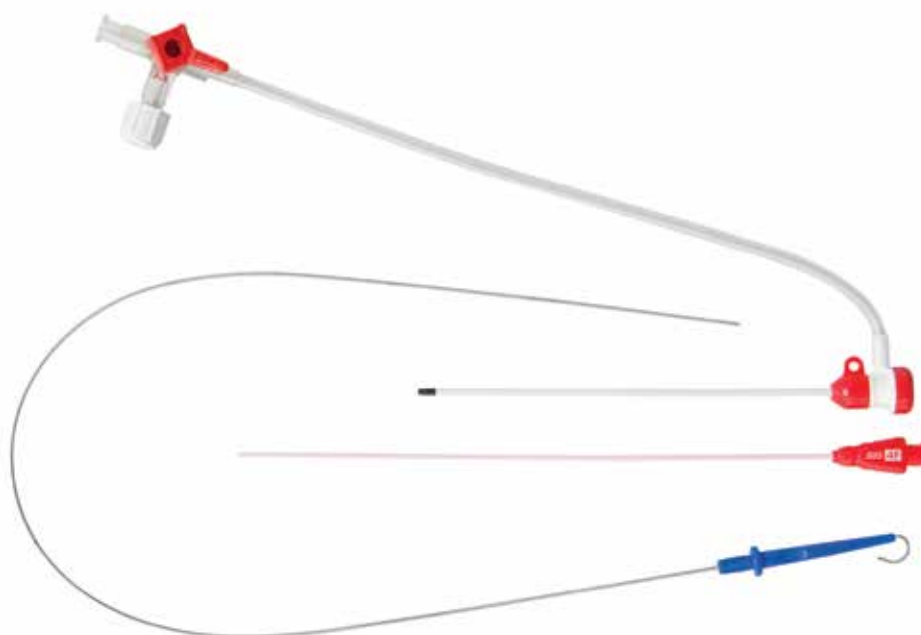

Número de referencia	Tamaño en French	Longitud	Diámetro/Longitud de la guía	Color del conector
PSI-4F-11-035ACT	4,5	11 cm	0,035" (0,89 mm) x 50 cm	rojo
PSI-5F-11-038ACT	5,5	11 cm	0,038" (0,97 mm) x 50 cm	gris
PSI-6F-11-038ACT	6,5	11 cm	0,038" (0,97 mm) x 50 cm	verde
PSI-7F-11-038ACT	7,5	11 cm	0,038" (0,97 mm) x 50 cm	naranja
PSI-8F-11-038ACT	8,5	11 cm	0,038" (0,97 mm) x 50 cm	azul
PSI-4F-11ACT	4,5	11 cm	N/A	rojo
PSI-5F-11ACT	5,5	11 cm	N/A	gris
PSI-6F-11ACT	6,5	11 cm	N/A	verde
PSI-7F-11ACT	7,5	11 cm	N/A	naranja
PSI-8F-11ACT	8,5	11 cm	N/A	azul

Empaquetados en fundas, cajas de 5 unidades. Todos los introductores ACT utilizan tubos PreludePRO™ (polipropileno).

OBTURADORES PRELUDE®

Los obturadores Prelude ofrecen apoyo y una circulación óptima para controlar la presión arterial del paciente una vez que se ha colocado el introductor. Puede extraerse sangre a través del brazo lateral del introductor con el obturador colocado, lo cual evita volver a punzar la vena.

Número de referencia	Tamaño en French	Longitud	Tamaño del introductor recomendado	Color del conector
OBTURADORES				
OBT-4F-11	4	13 cm	5 F x 11 cm	rojo
OBT-5F-11	5	13 cm	6 F x 11 cm	gris
OBT-6F-11	6	13 cm	7 F x 11 cm	verde
OBT-7F-11	7	13 cm	8 F x 11 cm	naranja
OBT-4F-23	4	25 cm	5 F x 23 cm	rojo
OBT-5F-23	5	25 cm	6 F x 23 cm	gris
OBT-6F-23	6	25 cm	7 F x 23 cm	verde
OBT-7F-23	7	25 cm	8 F x 23 cm	naranja


Empaquetados en bolsas, cajas de 10 unidades.

GUÍAS PRELUDE®

Las guías Prelude, fabricadas de acero inoxidable no recubierto en espiral, se ofrecen como productos independientes, empaquetadas en una funda de lavado para su comodidad.

Número de referencia	Longitud	Diámetro/Longitud de la guía	Punta angular
SW21A45PW	45 cm	0,021" (0,53 mm)	Sí
SW21A80PW	80 cm	0,021" (0,53 mm)	Sí
SW25A45PW	45 cm	0,025" (0,64 mm)	Sí
SW25A80PW	80 cm	0,025" (0,64 mm)	Sí
SW35DE50SST	50 cm	0,035" (0,89 mm)	-
SW35DE80SST	80 cm	0,035" (0,89 mm)	-
SW38DE50SST	50 cm	0,038" (0,97 mm)	-
SW38DE80SST	80 cm	0,038" (0,97 mm)	-

Empaquetadas en aros; cajas de 10 unidades.

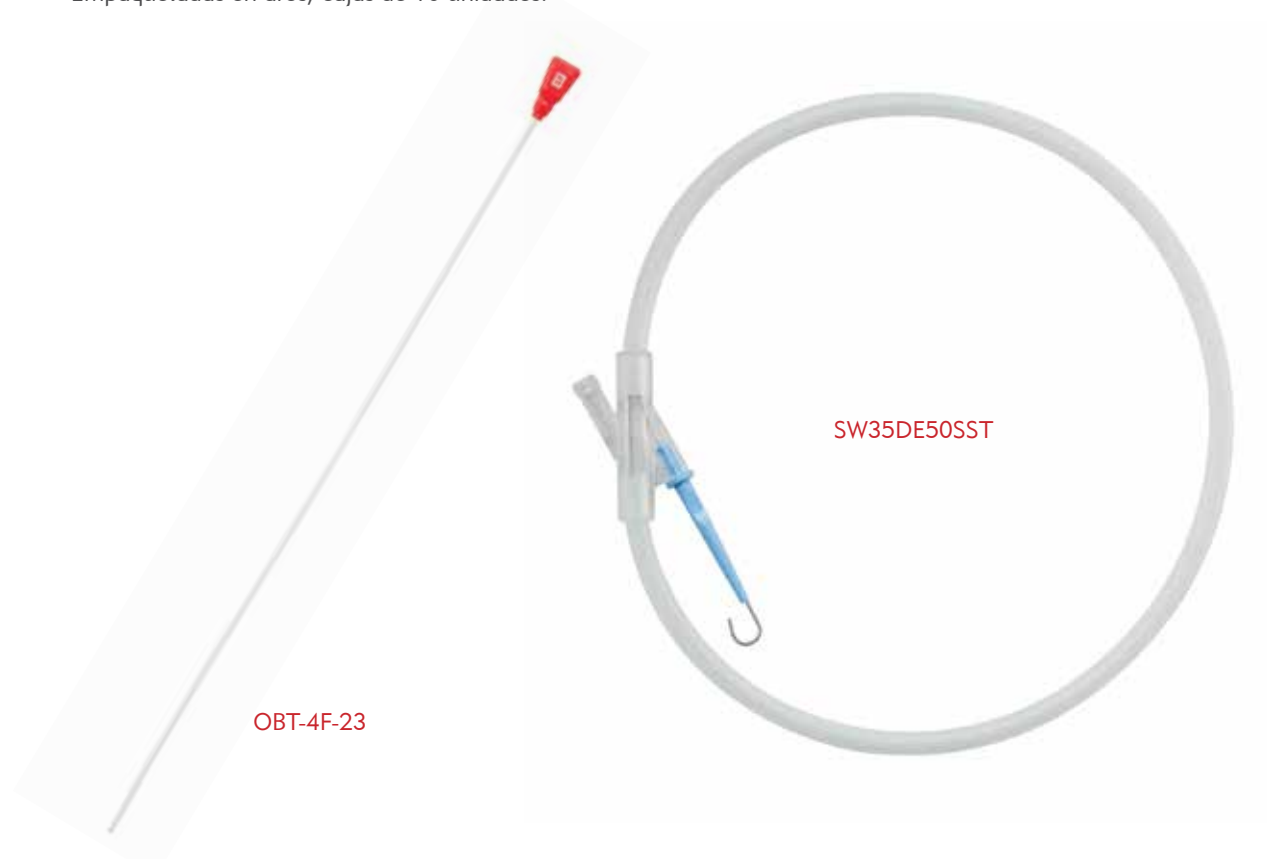

ANGIOGRAFÍA

CATÉTERES PARA DIAGNÓSTICO CARDIOLÓGICO

<i>Ilustraciones de formas de catéteres</i>	19-20
Judkins izquierdo	21
Judkins izquierdo, punta corta	22
Judkins derecho	22
Judkins derecho, punta corta	23
Judkins derecho modificado	23
Amplatz izquierdo	23
Amplatz derecho	24
Bypass coronario izquierdo	25
Bypass coronario derecho	25
Coronario derecho progresivo	25
Mamaria interna	25
Pigtail cardíaco recto	26
Pigtail cardíaco de 145°	26
Pigtail cardíaco de 155°	27
MultiPack cardíaco	27
MultiPack Plus cardíaco	28
Multiusos	29
Sones	29
Mamaria interna braquial/radial izquierdo	30
Braquial/radial coronario izquierdo	30
Braquial/radial coronario derecho	30
Amplatz coronario izquierdo	30
Radial pigtail MIV™	31
MultiPack Plus radial	32
Angiográfico Performa Ultimate™	33-34
Angiográfico Impress Ultimate™	34
Radial de mamaria interna Impress®	34
Judkins pediátrico derecho e izquierdo	35
Catéteres para diagnóstico cardiológico Merit® de FEP, pediátricos y para adultos	35
Catéteres pediátricos pigtail (nailon)	36
Medición de vasos, pediátrico	36

GUÍAS DIAGNÓSTICAS

Guías diagnósticas InQwire®	37
-----------------------------	----

GUÍAS HIDROFÍLICAS

Guías hidrofílicas Merit Laureate®	37
------------------------------------	----

ACCESORIOS PARA GUÍAS

Dispositivos de torque Torq™ H2O	38
Dispositivo de torque SeaDragon™	38

MANEJO DE FLUIDOS Y TUBOS

Sistema de administración de contraste Miser®	39
Sistemas de administración de contraste	40-41
Sets de administración de fluidos	42-44
Tubos de alta presión	45
Tubos de monitorización de presión	46
Bolsas infusoras de presión-PIB	47

MANIFOLDS, LLAVES DE PASO Y ADAPTADORES

Manifolds Merit®	48-49
Manifolds Devos™	50
Sistemas de administración de contraste a presión	50
Manifolds TRAM® con transductor integrado	51
Manifolds TRAM-P™ con transductor integrado	52
Kits de respuesta rápida Right Heart	53
Llave Marquis®	54
Adaptadores rotatorios sin aire	55


JERINGAS

Jeringas de control coronario CCS™	56-57
Jeringas de lavado RXP®	58
Jeringa de vacío VacLok®	58


TRANSDUCTORES Y ACCESORIOS

Transductores de presión Meritrans®	59-62
Accesorios Meritrans	
Organizador Meritrans	62
Soporte Clipper	62
Cable reutilizable Meritrans	62


- JUDKINS IZQUIERDO 3,5
- JUDKINS IZQUIERDO 4,0
- JUDKINS IZQUIERDO 4,5
- JUDKINS IZQUIERDO 5,0
- JUDKINS IZQUIERDO 6,0
- JUDKINS IZQUIERDO, PUNTA CORTA 3,5
- JUDKINS IZQUIERDO, PUNTA CORTA 4,0
- JUDKINS IZQUIERDO, PUNTA CORTA 5,0
- JUDKINS IZQUIERDO, PUNTA CORTA 6,0

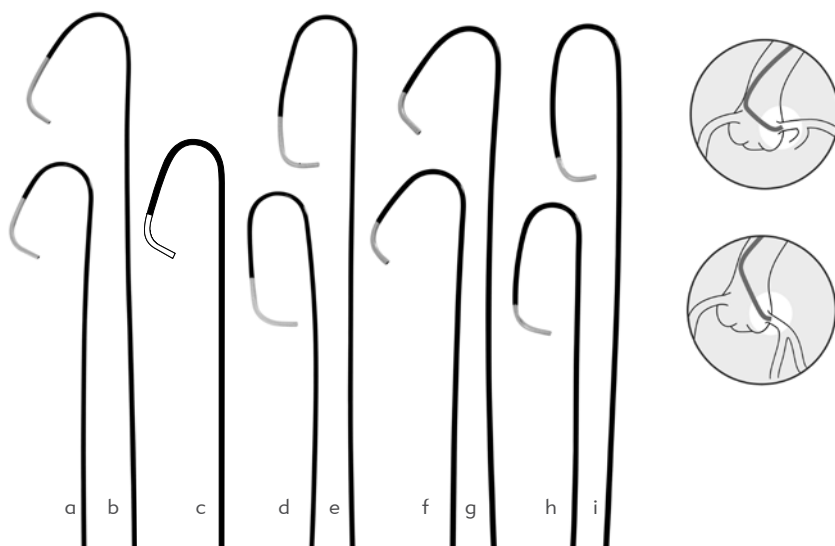



- AMPLATZ IZQUIERDO 1
- AMPLATZ IZQUIERDO 2
- AMPLATZ IZQUIERDO 3
- AMPLATZ IZQUIERDO 4
- AMPLATZ DERECHO 1
- AMPLATZ DERECHO 2
- AMPLATZ DERECHO 3
- AMPLATZ DERECHO MODIFICADO
- PROGRESIVO DERECHO (sin torque)

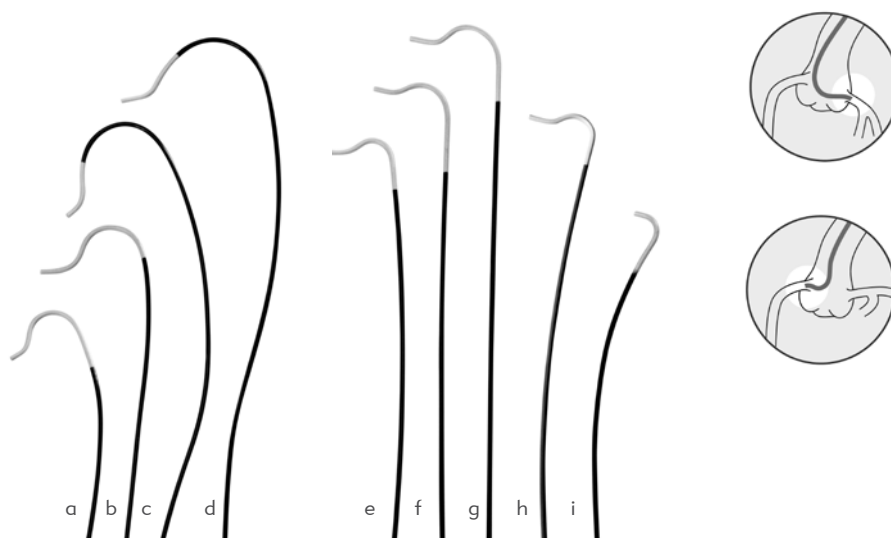


- JUDKINS DERECHO 3,5
- JUDKINS DERECHO 4,0
- JUDKINS DERECHO 4,5
- JUDKINS DERECHO 5,0
- JUDKINS DERECHO 6,0
- JUDKINS DERECHO, PUNTA CORTA 3,5
- JUDKINS DERECHO, PUNTA CORTA 4,0
- JUDKINS DERECHO, PUNTA CORTA 5,0
- JUDKINS DERECHO, PUNTA CORTA 6,0
- JUDKINS DERECHO MODIFICADO 3,5
- JUDKINS DERECHO MODIFICADO 4,0
- JUDKINS DERECHO MODIFICADO 5,0
- JUDKINS DERECHO MODIFICADO 6,0

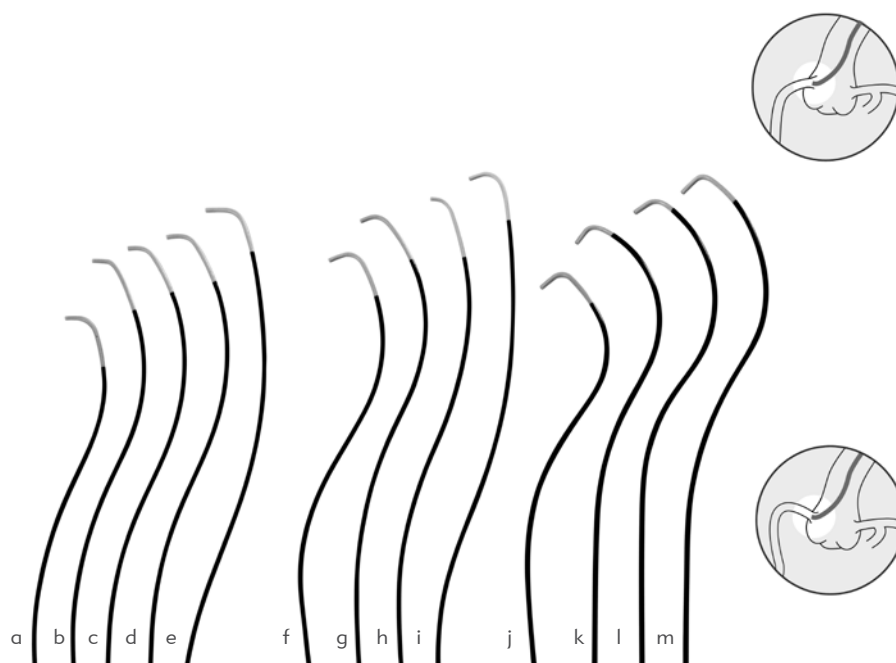


- a. PIGTAIL RECTO
- b. PIGTAIL 145°
- c. PIGTAIL 155°
- d. PIGTAIL MIV
- e. MULTIUSOS A1
- f. MULTIUSOS A2
- g. MULTIUSOS B1
- h. MULTIUSOS B2
- i. SONES

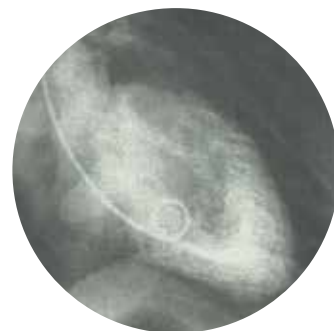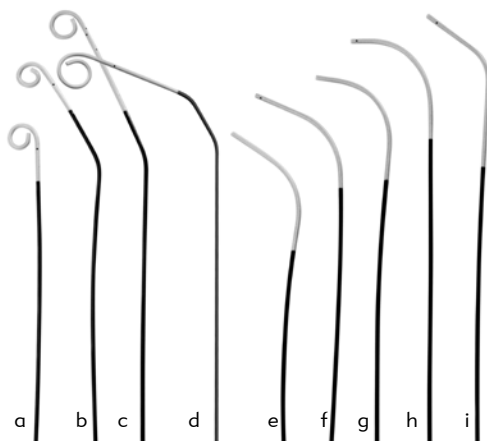


- a. BYPASS CORONARIO IZQUIERDO
- b. BYPASS CORONARIO DERECHO
- c. MAMARIA INTERNA
- d. RADIAL DE MAMARIA INTERNA

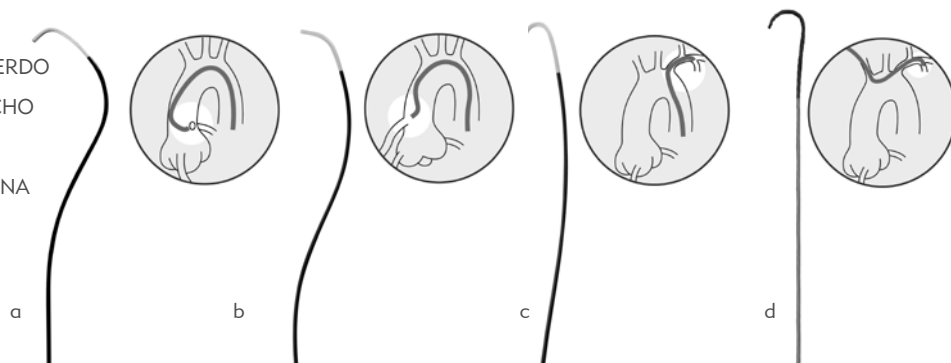

- a. ULTIMATE 1
- b. ULTIMATE 2
- c. ULTIMATE 3
- d. ULTIMATE 4
- e. MAMARIA INTERNA
BRAQUIAL/RADIAL IZQUIERDO 1
- f. MAMARIA INTERNA
BRAQUIAL/RADIAL IZQUIERDO 2
- g. CORONARIO IZQUIERDO
BRAQUIAL/RADIAL 1
- h. CORONARIO IZQUIERDO
BRAQUIAL/RADIAL 2
- i. CORONARIO IZQUIERDO
BRAQUIAL/RADIAL 3
- j. CORONARIO DERECHO
BRAQUIAL/RADIAL
- k. AMPLATZ CORONARIO IZQUIERDO
BRAQUIAL/RADIAL

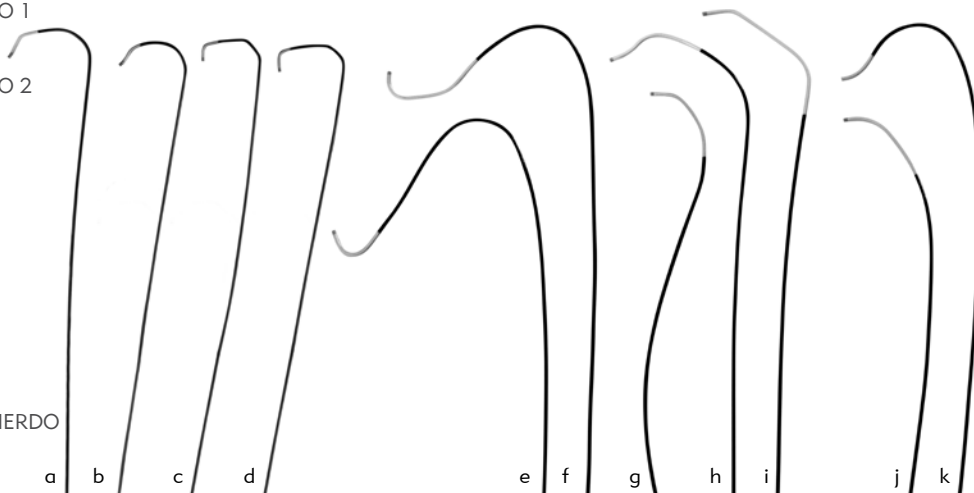

- a. PED. JUDKINS IZQUIERDO 1,5
- b. PED. JUDKINS IZQUIERDO 2,0
- c. PED. JUDKINS IZQUIERDO 2,5
- d. PED. JUDKINS IZQUIERDO 3,0
- e. PED. JUDKINS DERECHO 1,5
- f. PED. JUDKINS DERECHO 2,0
- g. PED. JUDKINS DERECHO 2,5
- h. PED. JUDKINS DERECHO 3,0

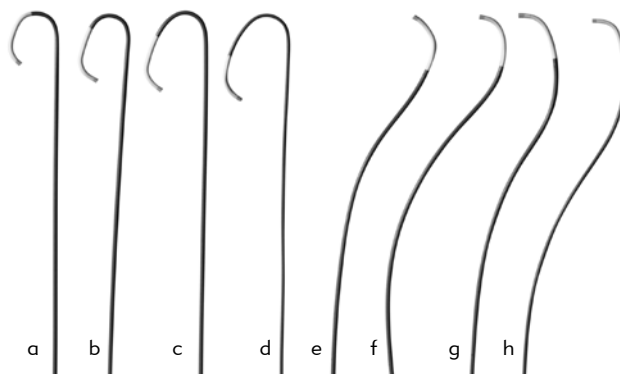


CATÉTERES PARA DIAGNÓSTICO CARDIOLÓGICO PERFORMA®

Los catéteres para diagnóstico cardiológico de Merit poseen una combinación ideal de torque + empuje + flujo. Estos catéteres incorporan un eje de nailon y un diseño mallado con alambre plano que ofrecen un mayor torque y empuje, además de más medidas de diámetros internos para lograr un flujo excelente.

CATÉTERES PERFORMA DE 4 F:

- Admiten guías de 0,038" (0,97 mm) para mayor comodidad del médico
- Punta atraumática para una colocación segura de la punta en el orificio
- Un gran diámetro interior de 0,042" (1,07 mm) permite un flujo excelente

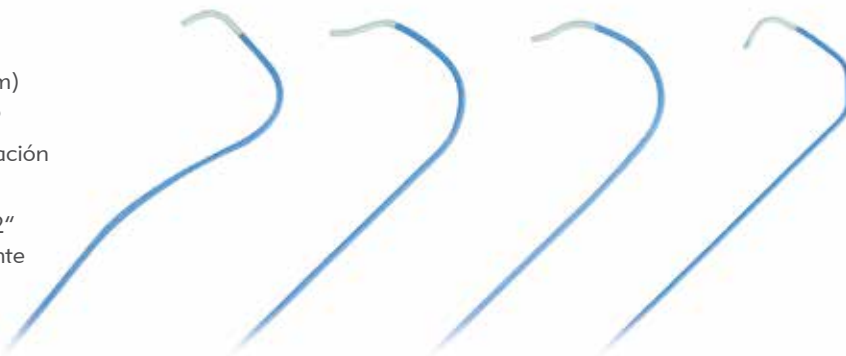

CATÉTERES PERFORMA® DE TIPO JUDKINS IZQUIERDO


Número de referencia	Tamaño en French	Diámetro interno	Longitud	Longitud de la punta	Descripción	
7700-10	4	0,042"/1,07 mm	100 cm	2,3 cm	JL3.5	Punta atraumática
7700-20	4	0,042"/1,07 mm	100 cm	2,3 cm	JL4.0	Punta atraumática
7700-30	4	0,042"/1,07 mm	100 cm	2,3 cm	JL5.0	Punta atraumática
7700-40	4	0,042"/1,07 mm	100 cm	2,3 cm	JL6.0	Punta atraumática
7521-13	5	0,046"/1,17 mm	100 cm	2,5 cm	JL3.5	 JL 3.5
7521-21	5	0,046"/1,17 mm	100 cm	2,5 cm	JL4.0	
7521-F1	5	0,046"/1,17 mm	100 cm	2,5 cm	JL4.5	
7521-33	5	0,046"/1,17 mm	100 cm	2,5 cm	JL5.0	
7521-43	5	0,046"/1,17 mm	100 cm	2,5 cm	JL6.0	
7521-53	5	0,046"/1,17 mm	125 cm	2,5 cm	JL3.5	 JL 4.0
7521-63	5	0,046"/1,17 mm	125 cm	2,5 cm	JL4.0	
7521-73	5	0,046"/1,17 mm	125 cm	2,5 cm	JL5.0	
7521-83	5	0,046"/1,17 mm	125 cm	2,5 cm	JL6.0	
7521-93	5	0,046"/1,17 mm	125 cm	2,5 cm	JL6.0	
7601-13	5	0,052"/1,32 mm	100 cm	2,5 cm	JL3.5-Flujo elevado	No mallado
7601-21	5	0,052"/1,32 mm	100 cm	2,5 cm	JL4.0-Flujo elevado	No mallado
7601-33	5	0,052"/1,32 mm	100 cm	2,5 cm	JL5.0-Flujo elevado	No mallado
7601-43	5	0,052"/1,32 mm	100 cm	2,5 cm	JL6.0-Flujo elevado	No mallado
7501-13	6	0,054"/1,37 mm	100 cm	1,9 cm	JL3.5	 JL 5.0
7501-21	6	0,054"/1,37 mm	100 cm	1,9 cm	JL4.0	
7501-H1	6	0,054"/1,37 mm	100 cm	1,9 cm	JL4.5	
7501-33	6	0,054"/1,37 mm	100 cm	1,9 cm	JL5.0	
7501-43	6	0,054"/1,37 mm	100 cm	1,9 cm	JL6.0	
7501-53	6	0,054"/1,37 mm	125 cm	1,9 cm	JL3.5	 JL 6.0
7501-63	6	0,054"/1,37 mm	125 cm	1,9 cm	JL4.0	
7501-73	6	0,054"/1,37 mm	125 cm	1,9 cm	JL5.0	
7501-83	6	0,054"/1,37 mm	125 cm	1,9 cm	JL6.0	
7501-93	6	0,054"/1,37 mm	125 cm	1,9 cm	JL6.0	
7574-13	6	0,059"/1,50 mm	100 cm	2,5 cm	JL3.5-Flujo elevado	No mallado
7574-21	6	0,059"/1,50 mm	100 cm	2,5 cm	JL4.0-Flujo elevado	No mallado
7574-33	6	0,059"/1,50 mm	100 cm	2,5 cm	JL5.0-Flujo elevado	No mallado
7574-43	6	0,059"/1,50 mm	100 cm	2,5 cm	JL6.0-Flujo elevado	No mallado

La guía recomendada es de 0,038" (0,97 mm)

CATÉTERES PERFORMA® DE TIPO JUDKINS IZQUIERDO DE PUNTA CORTA

Número de referencia	Tamaño en French	Diámetro interno	Longitud	Longitud de la punta	Descripción
7501-A3	6	0,054"/1,37 mm	100 cm	1,9 cm	JL3.5 ST
7501-B1	6	0,054"/1,37 mm	100 cm	1,9 cm	JL4.0 ST
7501-C3	6	0,054"/1,37 mm	100 cm	1,9 cm	JL5.0 ST
7501-D3	6	0,054"/1,37 mm	100 cm	1,9 cm	JL6.0 ST


La guía recomendada es de 0,038" (0,97 mm)

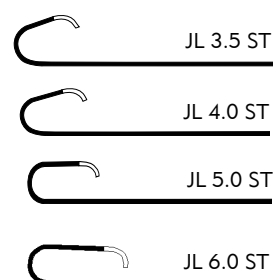

CATÉTERES PERFORMA® DE TIPO JUDKINS DERECHO

Número de referencia	Tamaño en French	Diámetro interno	Longitud	Longitud de la punta	Descripción
7701-10	4	0,042"/1,07 mm	100 cm	2,5 cm	JR3.5 Punta atraumática
7701-20	4	0,042"/1,07 mm	100 cm	2,5 cm	JR4.0 Punta atraumática
7701-50	4	0,042"/1,07 mm	100 cm	2,5 cm	JR4.5 Punta atraumática
7701-30	4	0,042"/1,07 mm	100 cm	2,5 cm	JR5.0 Punta atraumática
7701-40	4	0,042"/1,07 mm	100 cm	2,5 cm	JR6.0 Punta atraumática
7523-13	5	0,046"/1,17 mm	100 cm	2,5 cm	JR3.5
7523-21	5	0,046"/1,17 mm	100 cm	2,5 cm	JR4.0
7523-93	5	0,046"/1,17 mm	100 cm	2,5 cm	JR4.5
7523-33	5	0,046"/1,17 mm	100 cm	2,5 cm	JR5.0
7523-43	5	0,046"/1,17 mm	100 cm	2,5 cm	JR6.0
7523-53	5	0,046"/1,17 mm	125 cm	2,5 cm	JR3.5
7523-63	5	0,046"/1,17 mm	125 cm	2,5 cm	JR4.0
7523-73	5	0,046"/1,17 mm	125 cm	2,5 cm	JR5.0
7523-83	5	0,046"/1,17 mm	125 cm	2,5 cm	JR6.0
7503-13	6	0,054"/1,37 mm	100 cm	1,9 cm	JR3.5
7503-21	6	0,054"/1,37 mm	100 cm	1,9 cm	JR4.0
7503-93	6	0,054"/1,37 mm	100 cm	1,9 cm	JR4.5
7503-33	6	0,054"/1,37 mm	100 cm	1,9 cm	JR5.0
7503-43	6	0,054"/1,37 mm	100 cm	1,9 cm	JR6.0
7503-53	6	0,054"/1,37 mm	125 cm	1,9 cm	JR3.5
7503-63	6	0,054"/1,37 mm	125 cm	1,9 cm	JR4.0
7503-73	6	0,054"/1,37 mm	125 cm	1,9 cm	JR5.0
7503-83	6	0,054"/1,37 mm	125 cm	1,9 cm	JR6.0


La guía recomendada es de 0,038" (0,97 mm)

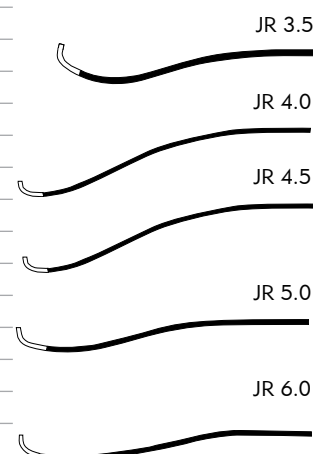

CATÉTERES PERFORMA® DE TIPO JUDKINS DERECHO DE PUNTA CORTA

Número de referencia	Tamaño en French	Diámetro interno	Longitud	Longitud de la punta	Descripción
7523-E3	5	0,046"/1,17 mm	100 cm	2,5 cm	JR3.5 ST
7523-F1	5	0,046"/1,17 mm	100 cm	2,5 cm	JR4.0 ST
7523-G3	5	0,046"/1,17 mm	100 cm	2,5 cm	JR5.0 ST
7523-H3	5	0,046"/1,17 mm	100 cm	2,5 cm	JR6.0 ST
7503-A3	6	0,054"/1,37 mm	100 cm	1,9 cm	JR3.5 ST
7503-B1	6	0,054"/1,37 mm	100 cm	1,9 cm	JR4.0 ST
7503-C3	6	0,054"/1,37 mm	100 cm	1,9 cm	JR5.0 ST
7503-D3	6	0,054"/1,37 mm	100 cm	1,9 cm	JR6.0 ST


La guía recomendada es de 0,038" (0,97 mm)

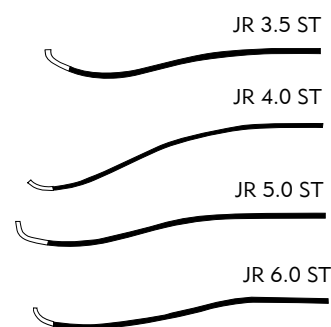

CATÉTERES PERFORMA® DE TIPO JUDKINS DERECHO MODIFICADO

Número de referencia	Tamaño en French	Diámetro interno	Longitud	Longitud de la punta	Descripción
7502-13	6	0,054"/1,37 mm	100 cm	1,9 cm	JR3.5
7502-23	6	0,054"/1,37 mm	100 cm	1,9 cm	JR4.0
7502-33	6	0,054"/1,37 mm	100 cm	1,9 cm	JR5.0
7502-43	6	0,054"/1,37 mm	100 cm	1,9 cm	JR6.0


La guía recomendada es de 0,038" (0,97 mm)

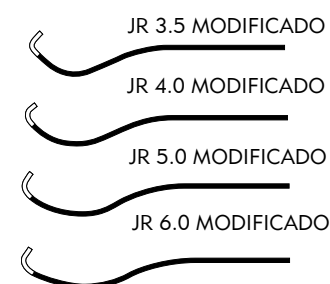

CATÉTERES PERFORMA® DE TIPO AMPLATZ IZQUIERDO

Número de referencia	Tamaño en French	Diámetro interno	Longitud	Longitud de la punta	Descripción
7703-10	4	0,042"/1,07 mm	100 cm	5,0 cm	AL1 Punta atraumática
7703-20	4	0,042"/1,07 mm	100 cm	2,2 cm	AL2 Punta atraumática
7703-30	4	0,042"/1,07 mm	100 cm	2,3 cm	AL3 Punta atraumática
7703-40	4	0,042"/1,07 mm	100 cm	2,5 cm	AL4 Punta atraumática
7527-13	5	0,046"/1,17 mm	100 cm	5,0 cm	AL1
7527-23	5	0,046"/1,17 mm	100 cm	5,0 cm	AL2
7527-33	5	0,046"/1,17 mm	100 cm	2,0 cm	AL3
7527-43	5	0,046"/1,17 mm	100 cm	2,5 cm	AL4
7507-13	6	0,054"/1,37 mm	100 cm	5,0 cm	AL1
7507-23	6	0,054"/1,37 mm	100 cm	5,0 cm	AL2
7507-33	6	0,054"/1,37 mm	100 cm	2,4 cm	AL3
7507-43	6	0,054"/1,37 mm	100 cm	2,5 cm	AL4


La guía recomendada es de 0,038" (0,97 mm)

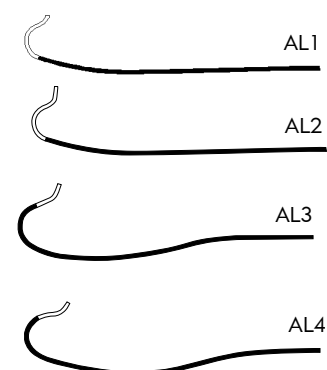

CATÉTERES PERFORMA® DE TIPO AMPLATZ DERECHO

Número de referencia	Tamaño en French	Diámetro interno	Longitud	Longitud de la punta	Descripción	
7702-40	4	0,042"/1,07 mm	100 cm	3,3 cm	AR MOD	Punta atraumática
7702-10	4	0,042"/1,07 mm	100 cm	3,3 cm	AR1	Punta atraumática
7702-20	4	0,042"/1,07 mm	100 cm	5,0 cm	AR2	Punta atraumática
7702-30	4	0,042"/1,07 mm	100 cm	5,0 cm	AR3	Punta atraumática
7526-11	5	0,046"/1,17 mm	100 cm	3,3 cm	AR MOD	
7528-13	5	0,046"/1,17 mm	100 cm	3,3 cm	AR1	
7528-23	5	0,046"/1,17 mm	100 cm	5,0 cm	AR2	
7528-33	5	0,046"/1,17 mm	100 cm	5,0 cm	AR3	
7506-11	6	0,054"/1,37 mm	100 cm	3,3 cm	AR MOD.	
7508-13	6	0,054"/1,37 mm	100 cm	3,0 cm	AR1	
7508-23	6	0,054"/1,37 mm	100 cm	3,5 cm	AR2	
7508-33	6	0,054"/1,37 mm	100 cm	4,0 cm	AR3	

La guía recomendada es de 0,038" (0,97 mm)

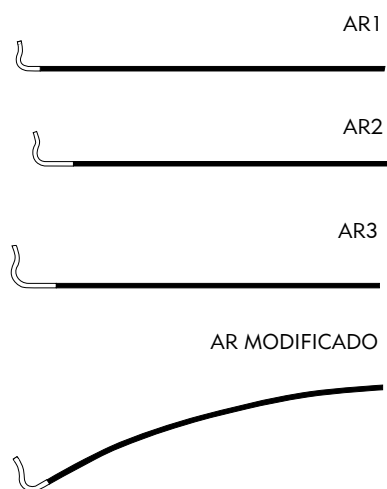

CATÉTERES PERFORMA® PARA BYPASS CORONARIO IZQUIERDO (LCB)

Número de referencia	Tamaño en French	Diámetro interno	Longitud	Longitud de la punta	Descripción
7709-10	4	0,042"/1,07 mm	100 cm	2,5 cm	Punta atraumática
7534-13	5	0,046"/1,17 mm	100 cm	2,5 cm	
7510-13	6	0,054"/1,37 mm	100 cm	2,5 cm	



La guía recomendada es de 0,038" (0,97 mm)

CATÉTERES PERFORMA® PARA BYPASS CORONARIO DERECHO (RCB)

Número de referencia	Tamaño en French	Diámetro interno	Longitud	Longitud de la punta	Descripción
7709-20	4	0,042"/1,07 mm	100 cm	2,5 cm	Punta atraumática
7534-23	5	0,046"/1,17 mm	100 cm	2,5 cm	
7510-23	6	0,054"/1,37 mm	100 cm	2,5 cm	



La guía recomendada es de 0,038" (0,97 mm)

CATÉTERES PERFORMA® DE TIPO CORONARIO DERECHO PROGRESIVO (PRC), SIN TORQUE

Número de referencia	Tamaño en French	Diámetro interno	Longitud	Longitud de la punta	Descripción
7707-10	4	0,042"/1,07 mm	100 cm	2,5 cm	Punta atraumática
7600-11	5	0,052"/1,32 mm	100 cm	2,5 cm	No mallado
7532-13	5	0,046"/1,17 mm	100 cm	2,5 cm	
7572-11	6	0,059"/1,50 mm	100 cm	2,5 cm	No mallado
7512-13	6	0,054"/1,37 mm	100 cm	2,5 cm	
7512-23	6	0,054"/1,37 mm	125 cm	2,5 cm	



La guía recomendada es de 0,038" (0,97 mm)

CATÉTERES PERFORMA® DE MAMARIA INTERNA (IMA)

Número de referencia	Tamaño en French	Diámetro interno	Longitud	Longitud de la punta	Descripción
7706-10	4	0,042"/1,07 mm	100 cm	3,3 cm	Punta atraumática
7531-33	5	0,046"/1,17 mm	65 cm	3,3 cm	
7531-13	5	0,046"/1,17 mm	100 cm	3,3 cm	
7511-13	6	0,054"/1,37 mm	100 cm	3,3 cm	



La guía recomendada es de 0,038" (0,97 mm)

CATÉTERES PERFORMA® DE TIPO PIGTAIL CARDÍACO RECTO

Número de referencia	Tamaño en French	Diámetro interno	Longitud	Longitud de la punta	Descripción	Número de orificios laterales	Curva pigtail pequeña
7704-70	4	0,042"/1,07 mm	80 cm	6,5 cm	Mallado	5	
7704-10	4	0,042"/1,07 mm	110 cm	6,5 cm	Mallado	5	
7776-11	5	0,046"/1,17 mm	90 cm	5,0 cm	Mallado	5	Sí
7776-21	5	0,046"/1,17 mm	110 cm	5,0 cm	Mallado	5	Sí
7776-B1	5	0,052"/1,32 mm	110 cm	4,6 cm	No mallado	5	Sí
7602-11	5	0,052"/1,32 mm	110 cm	7,5 cm	No mallado	5	
7529-11	5	0,046"/1,17 mm	110 cm	7,5 cm	Mallado	5	
7529-43	5	0,046"/1,17 mm	125 cm	7,5 cm	Mallado	5	
7569-11	6	0,059"/1,50 mm	110 cm	8,0 cm	No mallado	5	
7509-11	6	0,054"/1,37 mm	110 cm	7,5 cm	Mallado	5	
7777-B1	6	0,059"/1,50 mm	110 cm	4,8 cm	No mallado	5	Sí
7777-21	6	0,054"/1,37 mm	110 cm	4,6 cm	Mallado	5	Sí
7509-43	6	0,054"/1,37 mm	125 cm	7,5 cm	Mallado	5	
7569-43	6	0,059"/1,50 mm	125 cm	8,0 cm	No mallado	5	


La guía recomendada es de 0,038" (0,97 mm)



CATÉTERES PERFORMA® DE TIPO PIGTAIL CARDÍACO DE 145°

Número de referencia	Tamaño en French	Diámetro interno	Longitud	Longitud de la punta	Descripción	Número de orificios laterales	Longitud del ángulo	Curva pigtail pequeña
7704-20	4	0,042"/1,07 mm	110 cm	6,5 cm	Mallado	5	5,5 cm	
7776-C3	5	0,052"/1,32 mm	110 cm	4,6 cm	No mallado	5	5,5 cm	Sí
7776-33	5	0,046"/1,17 mm	110 cm	5,0 cm	Mallado	5	5,5 cm	Sí
7529-53	5	0,046"/1,17 mm	125 cm	7,5 cm	Mallado	5	7,5 cm	
7602-23	5	0,052"/1,32 mm	110 cm	7,5 cm	No mallado	5	7,5 cm	
7529-23	5	0,046"/1,17 mm	110 cm	7,5 cm	Mallado	5	7,5 cm	
7569-23	6	0,059"/1,50 mm	110 cm	8,0 cm	No mallado	5	5,5 cm	
7509-23	6	0,054"/1,37 mm	110 cm	7,5 cm	Mallado	5	5,5 cm	
7777-C3	6	0,059"/1,50 mm	110 cm	7,5 cm	No mallado	5	5,5 cm	Sí
7777-33	6	0,054"/1,37 mm	110 cm	4,6 cm	Mallado	5	5,5 cm	Sí
7509-53	6	0,054"/1,37 mm	125 cm	7,5 cm	Mallado	5	5,5 cm	
7569-53	6	0,059"/1,50 mm	125 cm	8,0 cm	No mallado	5	5,5 cm	

La guía recomendada es de 0,038" (0,97 mm)

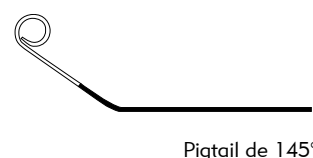

CATÉTERES PERFORMA® DE TIPO PIGTAIL CARDÍACO DE 155°

Número de referencia	Tamaño en French	Diámetro interno	Longitud	Longitud de la punta	Descripción	Número de orificios laterales	Longitud del ángulo	Curva pigtail pequeña
7704-30	4	0,042"/1,07 mm	110 cm	6,5 cm	Mallado	5	5,5 cm	
7602-33	5	0,052"/1,32 mm	110 cm	7,5 cm	No mallado	5	7,5 cm	
7529-33	5	0,046"/1,17 mm	110 cm	7,5 cm	Mallado	5	7,5 cm	
7529-63	5	0,046"/1,17 mm	125 cm	7,5 cm	Mallado	5	7,5 cm	
7776-D3	5	0,052"/1,32 mm	110 cm	4,6 cm	No mallado	5	5,5 cm	Sí
7776-43	5	0,046"/1,17 mm	110 cm	5,0 cm	Mallado	5	5,5 cm	Sí
7569-33	6	0,059"/1,50 mm	110 cm	8,0 cm	No mallado	5	5,5 cm	
7509-33	6	0,054"/1,37 mm	110 cm	7,5 cm	Mallado	5	5,5 cm	
7509-63	6	0,054"/1,37 mm	125 cm	7,5 cm	Mallado	5	5,5 cm	
7569-63	6	0,059"/1,50 mm	125 cm	8,0 cm	No mallado	5	5,5 cm	
7777-D3	6	0,059"/1,50 mm	110 cm	4,8 cm	No mallado	5	5,5 cm	Sí
7777-43	6	0,054"/1,37 mm	110 cm	4,6 cm	Mallado	5	5,5 cm	Sí

La guía recomendada es de 0,038" (0,97 mm)




PIGTAIL DE 155°

MULTIPACK CARDÍACO PERFORMA®

El multipack Performa combina tres catéteres eficaces de uso habitual en un práctico paquete.

Número de referencia	Tamaño en French	Descripción	Catéteres y número de los catéteres individuales
7751-10	4	MULTIPACK CARDÍACO I	PIG (mallado), JL4.0, JR4.0 (7704-10, 7700-20, 7701-20) Punta atraumática
7751-20	4	MULTIPACK CARDÍACO II	PIG 145° (mallado), JL4.0, JR4.0 (7704-20, 7700-20, 7701-20) Punta atraumática
7560-13	5	MULTIPACK CARDÍACO I	PIG (mallado), JL4.0, JR4.0 (7529-11, 7521-21, 7523-21)
7560-A3	5	MULTIPACK CARDÍACO I	PIG (mallado), JL4.0, PRC (7529-11, 7521-21, 7532-13)
7560-23	5	MULTIPACK CARDÍACO II	PIG 145° (mallado), JL4.0, JR4.0 (7529-23, 7521-21, 7523-21)
7560-C3	5	MULTIPACK CARDÍACO II	PIG 145° (mallado), JL4.0, PRC (7529-23, 7521-21, 7532-13)
7560-33	5	MULTIPACK CARDÍACO II	PIG 155° (mallado), JL4.0, JR4.0 (7529-33, 7521-21, 7523-21)
7560-43	5	MULTIPACK CARDÍACO IV	PIG (no mallado), JL4.0, JR4.0 (7602-11, 7521-21, 7523-21)
7560-53	5	MULTIPACK CARDÍACO V	PIG 145° (no mallado), JL4.0, JR4.0 (7602-23, 7521-21, 7523-21)
7560-G3	5	MULTIPACK CARDÍACO V	PIG (mallado), JL4.0 (flujo elevado), JR4.0, (7529-11, 7601-21, 7523-21)
7560-83	5	MULTIPACK CARDÍACO V	PIG 155° (no mallado), JL3.5, JR4.0 (7602-33, 7521-13, 7523-21)
7660-13	6	MULTIPACK CARDÍACO I	PIG (mallado), JL4.0, JR4.0, (7509-11, 7501-21, 7503-21)
7660-A3	6	MULTIPACK CARDÍACO I	PIG (mallado), JL4.0, PRC, (7509-11, 7501-21, 7512-13)
7660-23	6	MULTIPACK CARDÍACO II	PIG 145° (mallado), JL4.0, JR4.0 (7509-23, 7501-21, 7503-21)
7660-B3	6	MULTIPACK CARDÍACO II	PIG 145° (mallado), JL4.0, PRC (7509-23, 7501-21, 7512-13)
7660-33	6	MULTIPACK CARDÍACO II	PIG 155° (mallado), JL4.0, JR4.0 (7509-33, 7501-21, 7503-21)
7660-43	6	MULTIPACK CARDÍACO IV	PIG (no mallado), JL4.0, JR4.0 (7569-11, 7501-21, 7503-21)
7660-53	6	MULTIPACK CARDÍACO V	PIG 145° (no mallado), JL4.0, JR4.0 (7569-23, 7501-21, 7503-21)
7660-63	6	MULTIPACK CARDÍACO VI	PIG 155° (no mallado), JL4.0, JR4.0 (7569-33, 7501-21, 7503-21)

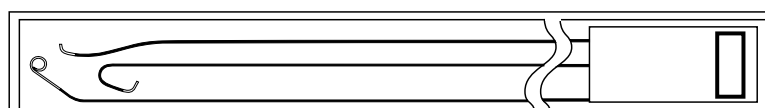

MULTIPACK PLUS CARDÍACO PERFORMA®

El Multipack Plus combina en un solo paquete los introductores Prelude® y PreludePRO™, la guía diagnóstica InQwire® y los catéteres para diagnóstico cardíológico Performa® con el objetivo de lograr una preparación sencilla y en un solo paso para sus intervenciones cardíológicas angiográficas. Así, al hacerse un pedido de un solo paquete, se ahorra tiempo y espacio, y se reducen los residuos.



Número de referencia	Tamaño en French	Catéteres	Introduccion (11 cm) c/guía de 0,038"	Guía (150 cm) 3 mm J 0,035" (0,89 mm) Núcleo fijo	Aguja
4MPPRO-W-S	4	PRC, JL 4.0, Pigtail recto	4 F PRO*	Sí	
4MPPRO-W-145	4	JR 4.0, JL 4.0, Pigtail 145°	4 F PRO*	Sí	
5MPSW-S	5	JR 4.0, JL 4.0, Pigtail recto	5 F Prelude	Sí	
5MPSW-145	5	JR 4.0, JL 4.0, Pigtail 145°	5 F Prelude	Sí	
5MPS-S	5	JR 4.0, JL 4.0, Pigtail recto	5 F Prelude	No	
5MPS-145	5	JR 4.0, JL 4.0, Pigtail 145°	5 F Prelude	No	
5MPSW-SNB	5	JR 4.0, JL 4.0, Pigtail recto (no mallado)	5 F Prelude	Sí	
5MPSW-S-18G	5	JR 4.0, JL 4.0, Pigtail recto	5 F Prelude	Sí	18 G
5MPPROW-S	5	JR 4.0, JL 4.0, Pigtail recto	5 F PRO*	Sí	
5MPPRO-S	5	JR 4.0, JL 4.0, Pigtail recto	5 F PRO*	No	
5MPPRO-145	5	JR 4.0, JL 4.0, Pigtail 145°	5 F PRO*	No	
5MPPROW-145	5	JR 4.0, JL 4.0, Pigtail 145°	5 F PRO* **	Sí	
5MPPROW-145	5	JR 4.0, JL 4.0, Pigtail 145°	5 F PRO*	Sí	
6MPSW-S	6	JR 4.0, JL 4.0, Pigtail recto	6 F Prelude	Sí	
6MPSW-145	6	JR 4.0, JL 4.0, Pigtail 145°	6 F Prelude	Sí	
6MPS-S	6	JR 4.0, JL 4.0, Pigtail recto	6 F Prelude	No	
6MPS-145	6	JR 4.0, JL 4.0, Pigtail 145°	6 F Prelude	No	
6MPSW-S-18G	6	JR 4.0, JL 4.0, Pigtail recto	6 F Prelude	Sí	18 G
6MPPROW-S	6	JR 4.0, JL 4.0, Pigtail recto	6 F PRO*	Sí	
6MPPROW-145	6	JR 4.0, JL 4.0, Pigtail 145°	6 F PRO*	Sí	


*El tubo introductor de polipropileno (PRO) proporciona una mayor resiliencia y una ayuda adicional durante la intervención.

**Contiene PreludePRO™ de 5 F con guía de 0,035".

Catéteres para diagnóstico de 100 cm, pigtails de 110 cm.

CATÉTERES PERFORMA® DE TIPO MULTIUSOS

Número de referencia	Tamaño en French	Diámetro interno	Longitud	Longitud de la punta	Número de orificios laterales	Descripción	
7708-30	4	0,042"/1,07 mm	80 cm	5,8 cm	2	MULTI A2	Punta atraumática
7708-40	4	0,042"/1,07 mm	80 cm	5,8 cm	2	MULTI B2	Punta atraumática
7708-10	4	0,042"/1,07 mm	100 cm	5,8 cm	-	MULTI A1	Punta atraumática
7708-20	4	0,042"/1,07 mm	100 cm	5,8 cm	2	MULTI A2	Punta atraumática
7708-50	4	0,042"/1,07 mm	100 cm	5,8 cm	-	MULTI B1	Punta atraumática
7708-60	4	0,042"/1,07 mm	100 cm	5,8 cm	2	MULTI B2	Punta atraumática
7533-53	5	0,046"/1,17 mm	80 cm	5,8 cm	2	MULTI A2	
7533-63	5	0,046"/1,17 mm	80 cm	5,8 cm	2	MULTI B2	
7533-13	5	0,046"/1,17 mm	100 cm	5,8 cm	-	MULTI A1	
7533-23	5	0,046"/1,17 mm	100 cm	5,8 cm	2	MULTI A2	
7533-33	5	0,046"/1,17 mm	100 cm	5,8 cm	-	MULTI B1	
7533-43	5	0,046"/1,17 mm	100 cm	5,8 cm	2	MULTI B2	
7513-A3	6	0,054"/1,37 mm	80 cm	5,8 cm	-	MULTI A1	
7513-13	6	0,054"/1,37 mm	80 cm	5,8 cm	2	MULTI A2	
7513-D3	6	0,054"/1,37 mm	80 cm	5,8 cm	-	MULTI B1	
7513-33	6	0,054"/1,37 mm	80 cm	5,8 cm	2	MULTI B2	
7513-B3	6	0,054"/1,37 mm	100 cm	5,8 cm	-	MULTI A1	
7513-23	6	0,054"/1,37 mm	100 cm	5,8 cm	2	MULTI A2	
7513-E3	6	0,054"/1,37 mm	100 cm	5,8 cm	-	MULTI B1	
7513-43	6	0,054"/1,37 mm	100 cm	5,8 cm	2	MULTI B2	
7513-C3	6	0,054"/1,37 mm	125 cm	5,8 cm	-	MULTI A1	
7513-53	6	0,054"/1,37 mm	125 cm	5,8 cm	2	MULTI A2	
7513-F3	6	0,054"/1,37 mm	125 cm	5,8 cm	-	MULTI B1	
7513-63	6	0,054"/1,37 mm	125 cm	5,8 cm	2	MULTI B2	

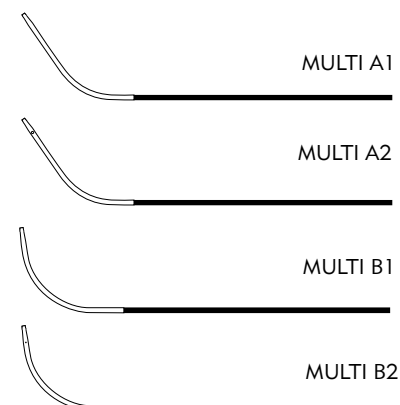

La guía recomendada es de 0,038" (0,97 mm)

CATÉTERES PERFORMA® DE TIPO SONES

Número de referencia	Tamaño en French	Diámetro interno	Longitud	Longitud de la punta	Número de orificios laterales	Descripción	
7705-10	4	0,042"/1,07 mm	80 cm	7,3 cm	4	SONES	Punta atraumática
7705-20	4	0,042"/1,07 mm	100 cm	7,3 cm	4	SONES	Punta atraumática
7530-13	5	0,046"/1,17 mm	80 cm	7,3 cm	4	SONES	
7530-23	5	0,046"/1,17 mm	100 cm	7,3 cm	4	SONES	
7520-13	6	0,054"/1,37 mm	80 cm	7,3 cm	4	SONES	
7520-23	6	0,054"/1,37 mm	100 cm	7,3 cm	4	SONES	




La guía recomendada es de 0,038" (0,97 mm)

CATÉTERES PERFORMA® DE TIPO BRAQUIAL/RADIAL IZQUIERDO DE MAMARIA INTERNA

Número de referencia	Tamaño en French	Diámetro interno	Longitud	Longitud de la punta	Descripción
7242-10	4	0,042"/1,07 mm	100 cm	4,2 cm	I MLBR1 Punta atraumática
7242-20	4	0,042"/1,07 mm	100 cm	4,2 cm	I MLBR2 Punta atraumática


La guía recomendada es de 0,038" (0,97 mm)

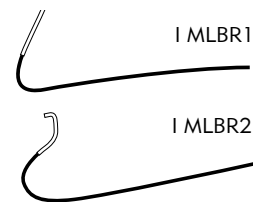

CATÉTERES PERFORMA® DE TIPO BRAQUIAL/RADIAL CORONARIO IZQUIERDO

Número de referencia	Tamaño en French	Diámetro interno	Longitud	Longitud de la punta	Descripción
7240-10	4	0,042"/1,07 mm	100 cm	3,4 cm	LBRI Punta atraumática
7240-20	4	0,042"/1,07 mm	100 cm	3,4 cm	LBR2 Punta atraumática
7240-30	4	0,042"/1,07 mm	100 cm	6,0 cm	LBR3 Punta atraumática

La guía recomendada es de 0,038" (0,97 mm)

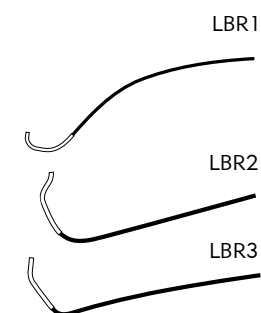

CATÉTER PERFORMA® DE TIPO BRAQUIAL/RADIAL CORONARIO DERECHO

Número de referencia	Tamaño en French	Diámetro interno	Longitud	Longitud de la punta	Descripción
7241-10	4	0,042"/1,07 mm	100 cm	3,4 cm	RBR Punta atraumática

La guía recomendada es de 0,038" (0,97 mm)



CATÉTER PERFORMA® DE TIPO AMPLATZ CORONARIO IZQUIERDO

Número de referencia	Tamaño en French	Diámetro interno	Longitud	Longitud de la punta	Descripción
7703-B0	4	0,042"/1,07 mm	100 cm	1,5 cm	AL2 Punta atraumática

La guía recomendada es de 0,038" (0,97 mm)





CATÉTERES RADIALES PIGTAIL PARA VENTRICULOGRAFÍA MIV™

El innovador catéter Radial Pigtail para ventriculografía MIV, diseñado para dirigirse hacia la valva semilunar izquierda durante un acceso por vía radial, facilita la introducción en el ventrículo.

Número de referencia	Tamaño en French	Longitud	Número de orificios laterales	Descripción
4RPS110	4	110 cm	6	Mallado
4RPS125	4	125 cm	6	Mallado
4RPL125	4	125 cm	6	Mallado
4RPL110	4	110 cm	6	Mallado
4RPS110-NB	4	110 cm	6	No mallado
4RPS125-NB	4	125 cm	6	No mallado
4RPL125-NB	4	125 cm	6	No mallado
4RPL110-NB	4	110 cm	6	No mallado
5RPS110	5	110 cm	6	Mallado
5RPS125	5	125 cm	6	Mallado
5RPL110	5	110 cm	6	Mallado
5RPL125	5	125 cm	6	Mallado
5RPS110-NB	5	110 cm	6	No mallado
5RPS125-NB	5	125 cm	6	No mallado
5RPL110-NB	5	110 cm	6	No mallado
5RPL125-NB	5	125 cm	6	No mallado
6RPS110	6	110 cm	6	Mallado
6RPS125	6	125 cm	6	Mallado
6RPL110	6	110 cm	6	Mallado
6RPL125	6	125 cm	6	Mallado
6RPS110-NB	6	110 cm	6	No mallado
6RPS125-NB	6	125 cm	6	No mallado
6RPL110-NB	6	110 cm	6	No mallado
6RPL125-NB	6	125 cm	6	No mallado

La guía recomendada es de 0,038" (0,97 mm)

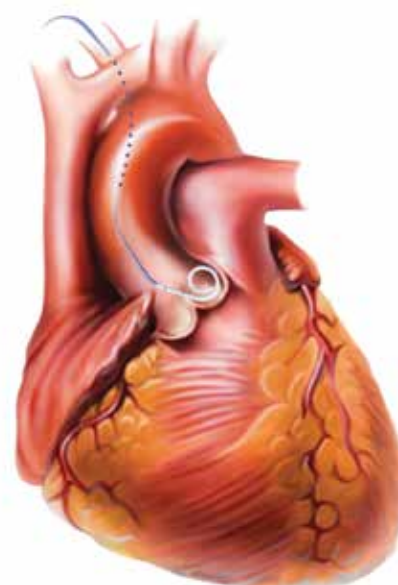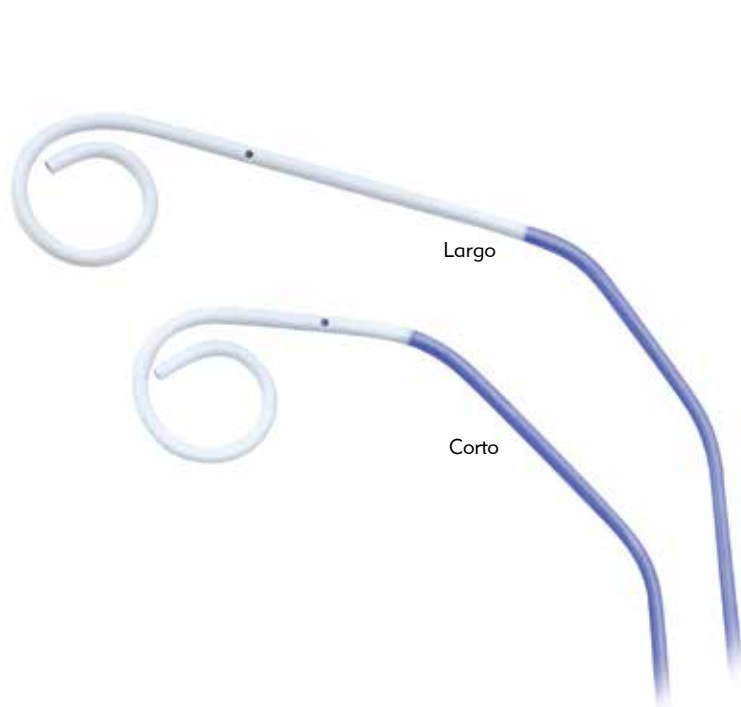

Los catéteres radiales para ventriculografía MIV están diseñados para dirigirse hacia la valva semilunar izquierda durante un acceso por vía radial, con el objetivo de facilitar la introducción en el ventrículo.

MULTIPACK PLUS RADIAL PERFORMA®

El Multipack Plus combina en un solo paquete el introductor Prelude®, la guía diagnóstica InQwire® y el catéter para diagnóstico cardiológico Performa® con el objetivo de lograr una preparación sencilla y en un solo paso para sus intervenciones. Así, al hacerse un pedido de un solo paquete, se ahorra tiempo y espacio, y se reducen los residuos.

Número de referencia	Tamaño en French	Introductor Prelude	Orificios laterales	Tipo de guía	Descripción
RADMPP-1	5	7 cm		SS/SS	Ultimate 1
RADMPP-2	5	11 cm		SS/SS	Ultimate 1
RADMPP-3	5	7 cm	1	SS/SS	Ultimate 1
RADMPP-4	5	7 cm		NT/PT	Ultimate 1
RADMPP-5	5	11 cm		NT/PT	Ultimate 1
RADMPP-6	5	7 cm	1	NT/PT	Ultimate 1
RADMPP-7	5	7 cm		SS/SS	JL 3.5, JR 4.0
RADMPP-8	5	11 cm		SS/SS	JL 3.5, JR 4.0
RADMPP-9	5	7 cm		NT/PT	JL 3.5, JR 4.0
RADMPP-10	5	11 cm		NT/PT	JL 3.5, JR 4.0
RADMPP-11	5	7 cm		NT/PT	Ultimate 4T-40
RADMPP-12	5	11 cm		NT/PT	Ultimate 4T-40


Guía InQwire de 0,035" (0,89 mm) x 180 cm/Núcleo fijo 3 mm en J

CATÉTERES ANGIOGRÁFICOS PERFORMA ULTIMATE™

El catéter angiográfico Performa Ultimate está disponible en cuatro formas, diseñadas para el acceso por vía radial. Utilice un solo catéter para acceder a las arterias coronarias derecha e izquierda.


Número de referencia	Tamaño en French	Diámetro interno	Longitud	Longitud de la punta	Número de orificios laterales	Descripción
ULTIMATE 1						
(4 cm entre la curva primaria y la secundaria)						
410038ULT1	4	0,042"/1,07 mm	100 cm	2,0 cm	-	Punta atraumática
4100381ULT1	4	0,042"/1,07 mm	100 cm	2,0 cm	1	Punta atraumática
412538ULT1	4	0,042"/1,07 mm	125 cm	2,0 cm	-	Punta atraumática
510038ULT1	5	0,046"/1,17 mm	100 cm	2,0 cm	-	Punta atraumática
5100381ULT1	5	0,046"/1,17 mm	100 cm	2,0 cm	1	Punta atraumática
5110381ULT1	5	0,046"/1,17 mm	110 cm	2,0 cm	1	Punta atraumática
512538ULT1	5	0,046"/1,17 mm	125 cm	2,0 cm	-	Punta atraumática
610038ULT1	6	0,054"/1,37 mm	100 cm	2,0 cm	-	Punta atraumática
6100381ULT1	6	0,054"/1,37 mm	100 cm	2,0 cm	1	Punta atraumática
6110381ULT1	6	0,054"/1,37 mm	110 cm	2,0 cm	1	Punta atraumática
612538ULT1	6	0,054"/1,37 mm	125 cm	2,0 cm	-	Punta atraumática

ULTIMATE 1

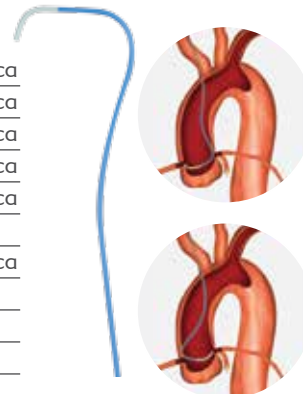


ULTIMATE 2						
(3,5 cm entre la curva primaria y la secundaria)						
410038ULT2	4	0,042"/1,07 mm	100 cm	2,0 cm	-	Punta atraumática
4100381ULT2	4	0,042"/1,07 mm	100 cm	2,0 cm	1	Punta atraumática
412538ULT2	4	0,042"/1,07 mm	125 cm	2,0 cm	-	Punta atraumática
510038ULT2	5	0,046"/1,17 mm	100 cm	2,0 cm	-	Punta atraumática
5100381ULT2	5	0,046"/1,17 mm	100 cm	2,0 cm	1	Punta atraumática
5110381ULT2	5	0,046"/1,17 mm	110 cm	2,0 cm	1	Punta atraumática
512538ULT2	5	0,046"/1,17 mm	125 cm	2,0 cm	-	Punta atraumática
610038ULT2	6	0,054"/1,37 mm	100 cm	2,0 cm	-	Punta atraumática
6100381ULT2	6	0,054"/1,37 mm	100 cm	2,0 cm	1	Punta atraumática
6110381ULT2	6	0,054"/1,37 mm	110 cm	2,0 cm	1	Punta atraumática
612538ULT2	6	0,054"/1,37 mm	125 cm	2,0 cm	1	Punta atraumática

ULTIMATE 2

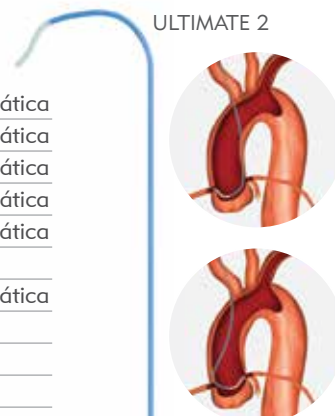

ULTIMATE 3						
(4 cm entre la curva primaria y la secundaria)						
410038ULT3	4	0,042"/1,07 mm	100 cm	2,0 cm	-	Punta atraumática
4100382ULT3	4	0,042"/1,07 mm	100 cm	2,0 cm	2	Punta atraumática
412538ULT3	4	0,042"/1,07 mm	125 cm	2,0 cm	-	Punta atraumática
510038ULT3	5	0,046"/1,17 mm	100 cm	2,0 cm	-	Punta atraumática
5100382ULT3	5	0,046"/1,17 mm	100 cm	2,0 cm	2	Punta atraumática
512538ULT3	5	0,042"/1,07 mm	125 cm	2,0 cm	-	Punta atraumática
610038ULT3	6	0,054"/1,37 mm	100 cm	2,0 cm	-	Punta atraumática
6100382ULT3	6	0,054"/1,37 mm	100 cm	2,0 cm	2	Punta atraumática
6110382ULT3	6	0,054"/1,37 mm	110 cm	2,0 cm	2	Punta atraumática
612538ULT3	6	0,054"/1,37 mm	125 cm	2,0 cm	2	Punta atraumática

ULTIMATE 3

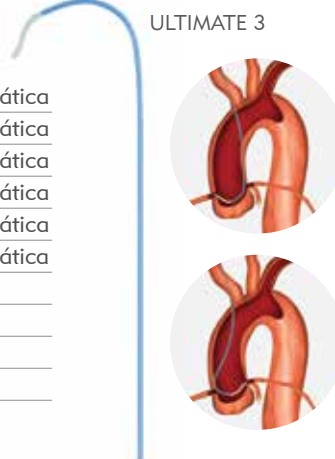

La guía recomendada es de 0,038" (0,97 mm)

CATÉTERES ANGIOGRÁFICOS PERFORMA ULTIMATE™

Número de referencia	Tamaño en French	Diámetro interno	Longitud	Longitud de la punta	Número de orificios laterales	Descripción
ULTIMATE 4						
(4 cm entre la curva primaria y la secundaria)						
410038ULT4-T40	4	0,042"/1,07 mm	100 cm	2,0 cm	-	Punta atraumática
4100381ULT4-T40	4	0,042"/1,07 mm	100 cm	2,0 cm	1	Punta atraumática
412538ULT4-T40	4	0,042"/1,07 mm	125 cm	2,0 cm	-	Punta atraumática
510038ULT4-T40	5	0,046"/1,17 mm	100 cm	2,0 cm	-	Punta atraumática
5100381ULT4-T40	5	0,046"/1,17 mm	100 cm	2,0 cm	1	Punta atraumática
5110381ULT4-T40	5	0,046"/1,17 mm	110 cm	2,0 cm	1	
512538ULT4-T40	5	0,046"/1,17 mm	125 cm	2,0 cm	-	Punta atraumática
610038ULT4-T40	6	0,054"/1,37 mm	100 cm	2,0 cm		
6100381ULT4-T40	6	0,054"/1,37 mm	100 cm	2,0 cm	1	
6110381ULT4-T40	6	0,054"/1,37 mm	110 cm	2,0 cm	1	
612538ULT4-T40	6	0,054"/1,37 mm	125 cm	2,0 cm	-	

ULTIMATE 4



(4,5 cm entre la curva primaria y la secundaria)						
410038ULT4-T45	4	0,042"/1,07 mm	100 cm	2,0 cm	-	Punta atraumática
4100381ULT4-T45	4	0,042"/1,07 mm	100 cm	2,0 cm	1	Punta atraumática
412538ULT4-T45	4	0,042"/1,07 mm	125 cm	2,0 cm	-	Punta atraumática
510038ULT4-T45	5	0,046"/1,17 mm	100 cm	2,0 cm	-	Punta atraumática
5100381ULT4-T45	5	0,046"/1,17 mm	100 cm	2,0 cm	1	Punta atraumática
5110381ULT4-T45	5	0,046"/1,17 mm	110 cm	2,0 cm	1	
512538ULT4-T45	5	0,046"/1,17 mm	125 cm	2,0 cm	-	Punta atraumática
610038ULT4-T45	6	0,054"/1,37 mm	100 cm	2,0 cm	-	
6100381ULT4-T45	6	0,054"/1,37 mm	100 cm	2,0 cm	1	
6110381ULT4-T45	6	0,054"/1,37 mm	110 cm	2,0 cm	1	
612538ULT4-T45	6	0,054"/1,37 mm	125 cm	2,0 cm	-	

La guía recomendada es de 0,038" (0,97 mm)

CATÉTERES ANGIOGRÁFICOS IMPRESS ULTIMATE™

Merit también ofrece el catéter Ultimate 1, fabricado con nuestro material de Impress, que es más blando que el material de Performa. El catéter Impress Ultimate 1 también presenta una punta cónica.

Número de referencia	Tamaño en French	Diámetro interno	Longitud	Longitud de la punta	Número de orificios laterales	Descripción
ULTIMATE 1						
5IMP10038ULT1	5	0,046"/1,17 mm	100 cm	2,0 cm	-	ULTIMATE 1
5IMP100381ULT1	5	0,046"/1,17 mm	100 cm	2,0 cm	1	ULTIMATE 1

La guía recomendada es de 0,038" (0,97 mm)

ULT1



CATÉTERES RADIALES IMPRESS® DE MAMARIA INTERNA

El nuevo catéter radial de mamaria interna está diseñado para alcanzar la arteria mamaria interna a través de un acceso por vía radial y permite al médico realizar un injerto de bypass.

Número de referencia	Tamaño en French	Diámetro interno	Longitud	Longitud de la punta	Número de orificios laterales	Mallado	Descripción
411038RADIM	4	0,042"/1,07 mm	110 cm	4,5 cm	-	Sí	RADIM
511038RADIM	5	0,046"/1,17 mm	110 cm	4,5 cm	-	Sí	RADIM

NUEVO



RADIM

La guía recomendada es de 0,038" (0,97 mm)




CATÉTERES PEDIÁTRICOS PERFORMA® DE TIPO JUDKINS DERECHO E IZQUIERDO

Número de referencia	Tamaño en French	Diámetro interno	Longitud	Longitud de la punta	Descripción
7700-A0	4	0,042"/1,07 mm	70 cm	2,0 cm	JL 1.5 Punta atraumática
7700-B0	4	0,042"/1,07 mm	70 cm	2,0 cm	JL 2.0 Punta atraumática
7700-C0	4	0,042"/1,07 mm	70 cm	2,0 cm	JL 2.5 Punta atraumática
7700-D0	4	0,042"/1,07 mm	70 cm	2,0 cm	JL 3.0 Punta atraumática
7701-A0	4	0,042"/1,07 mm	70 cm	2,0 cm	JR 1.5 Punta atraumática
7701-B0	4	0,042"/1,07 mm	70 cm	2,0 cm	JR 2.0 Punta atraumática
7701-C0	4	0,042"/1,07 mm	70 cm	2,0 cm	JR 2.5 Punta atraumática
7701-D0	4	0,042"/1,07 mm	70 cm	2,0 cm	JR 3.0 Punta atraumática
7521-L3	5	0,046"/1,17 mm	70 cm	2,0 cm	JL 1.5 Punta atraumática
7521-M3	5	0,046"/1,17 mm	70 cm	2,0 cm	JL 2.0 Punta atraumática
7521-N3	5	0,046"/1,17 mm	70 cm	2,0 cm	JL 2.5 Punta atraumática
7521-P3	5	0,046"/1,17 mm	70 cm	2,0 cm	JL 3.0 Punta atraumática
7523-L3	5	0,046"/1,17 mm	70 cm	2,0 cm	JR 1.5 Punta atraumática
7523-M3	5	0,046"/1,17 mm	70 cm	2,0 cm	JR 2.0 Punta atraumática
7523-N3	5	0,046"/1,17 mm	70 cm	2,0 cm	JR 2.5 Punta atraumática
7523-P3	5	0,046"/1,17 mm	70 cm	2,0 cm	JR 3.0 Punta atraumática

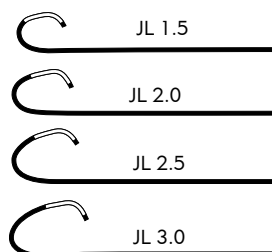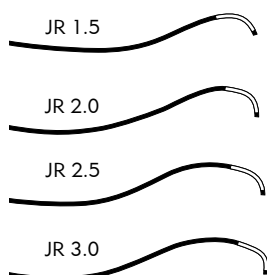

La guía recomendada es de 0,038" (0,97 mm)

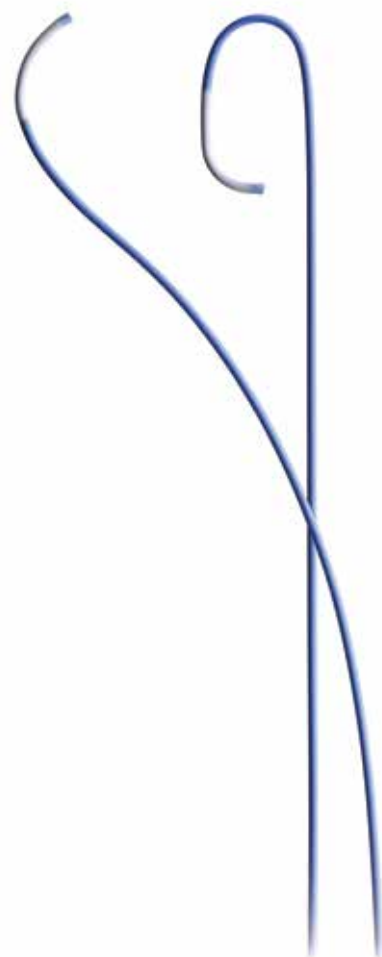

CATÉTERES PARA DIAGNÓSTICO CARDIOLÓGICO MERIT® DE FEP, PEDIÁTRICOS Y PARA ADULTOS

Los catéteres angiográficos pigtail de FEP (fluoroetileno-propileno) Teflon de Merit Medical ofrecen suavidad, control y una técnica de imágenes de calidad superior. Estos catéteres están disponibles para pacientes de cardiología, desde recién nacidos a adultos, en tamaños de 3 F a 7 F y en longitudes de 40 cm a 100 cm.

Número de referencia	Tamaño en French	Diámetro interno	Longitud	Guía recomendada	Número de orificios laterales
1310-21-0043	3	0,027"/0,69 mm	40 cm	0,021" (0,53 mm)	4
1310-21-0053	3	0,027"/0,69 mm	50 cm	0,021" (0,53 mm)	4
1310-21-0054	4	0,040"/1,02 mm	50 cm	0,021" (0,53 mm)	4
1310-21-0064	4	0,040"/1,02 mm	65 cm	0,021" (0,53 mm)	4
1310-25-0054	4	0,040"/1,02 mm	50 cm	0,025" (0,64 mm)	4
1310-25-0064	4	0,040"/1,02 mm	65 cm	0,025" (0,64 mm)	4
1310-25-0084	4	0,040"/1,02 mm	80 cm	0,025" (0,64 mm)	4
1310-25-0065	5	0,046"/1,17 mm	60 cm	0,025" (0,64 mm)	4
1310-25-0085	5	0,046"/1,17 mm	80 cm	0,025" (0,64 mm)	4
1308-25-0085	5	0,046"/1,17 mm	80 cm	0,025" (0,64 mm)	6
1308-35-0065	5	0,046"/1,17 mm	65 cm	0,035" (0,89 mm)	6
1308-35-0085	5	0,046"/1,17 mm	80 cm	0,035" (0,89 mm)	6
1308-35-0005	5	0,046"/1,17 mm	100 cm	0,035" (0,89 mm)	6
1308-35-0086	6	0,056"/1,42 mm	80 cm	0,035" (0,89 mm)	6
1308-35-0006	6	0,056"/1,42 mm	100 cm	0,035" (0,89 mm)	6
1308-38-0006	6	0,056"/1,42 mm	100 cm	0,038" (0,97 mm)	6
1308-35-0007	7	0,065"/1,65 mm	100 cm	0,035" (0,89 mm)	6
1308-38-0007	7	0,065"/1,65 mm	100 cm	0,038" (0,97 mm)	6




CATÉTERES PEDIÁTRICOS PIGTAIL PERFORMA® (NAILON)

Número de referencia	Tamaño en French	Diámetro interno	Longitud	Longitud de la punta	Número de orificios laterales	Descripción
7756-10	4	0,041"/1,04 mm	65 cm	6,0 cm	5	Estándar, no mallado
7756-20	4	0,041"/1,04 mm	80 cm	6,0 cm	5	Estándar, no mallado
7757-10	4	0,041"/1,04 mm	65 cm	5,5 cm	4	Infantil, no mallado
7757-20	4	0,041"/1,04 mm	80 cm	5,5 cm	4	Infantil, no mallado



La guía recomendada es de 0,035" (0,89 mm).

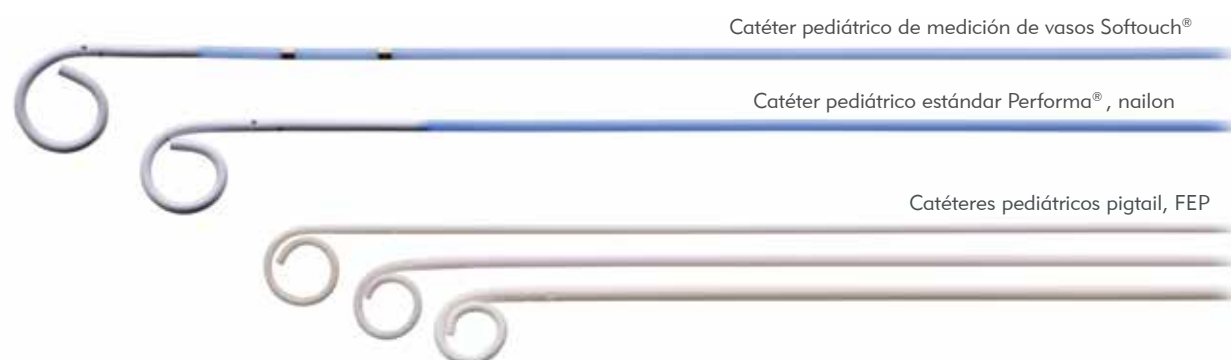

CATÉTERES PEDIÁTRICOS DE MEDICIÓN DE VASOS SOFTOUCH®

Los catéteres pediátricos de medición de vasos (curva pigtail de 11 mm) de Merit Medical están diseñados para lograr una medición precisa de la anatomía pediátrica. Los catéteres ofrecen un flujo excelente, un índice de presión de 1200 psi, 5 orificios en espiral y bandas indicativas de platino de alta visibilidad para conseguir una medición precisa.

Número de referencia	Tamaño en French	Diámetro interno	Longitud	Número de orificios laterales	Bandas y espaciadores	Descripción
4408-2M65	4	0,041"/1,04 mm	65 cm	5	2 (distancia de 1 cm)	Pigtail
4408-2M80	4	0,041"/1,04 mm	80 cm	5	2 (distancia de 1 cm)	Pigtail
4408-2M65SH*	4	0,041"/1,04 mm	65 cm	5	2 (distancia de 1 cm)	Pigtail
4408-2M80SH*	4	0,041"/1,04 mm	80 cm	5	2 (distancia de 1 cm)	Pigtail



La guía recomendada es de 0,035" (0,89 mm).

*El sufijo SH identifica a las bandas indicativas que están 16 mm más cerca de la curva pigtail.

GUÍAS DIAGNÓSTICAS INQWIRE®

La guía InQwire presenta un recubrimiento previo de PTFE en toda su superficie que ofrece una cubierta suave, uniforme y resistente al desconchamiento. Una menor fricción significa una mayor trazabilidad, lubricación y durabilidad. Gracias a la precisa memoria de la punta en J, no es necesario recargar el enderezador en J, y sus limitados márgenes de tolerancia garantizan la compatibilidad del catéter y el introductor.



Número de referencia	Descripción	Tamaño	Longitud	Núcleo	Cantidad por caja
IQ35F150J3	3 mm J	0,035" (0,89 mm)	150 cm	Fijo	10
IQ35F210J3	3 mm J	0,035" (0,89 mm)	210 cm	Fijo	10
IQ35F210J1O5	1,5 mm J	0,035" (0,89 mm)	210 cm	Fijo	10

Más opciones disponibles en el catálogo de Intervencionismo periférico de Merit. Solicite más información.

GUÍAS HIDROFÍLICAS MERIT LAUREATE®

Las guías hidrofílicas Merit Laureate facilitan la colocación de dispositivos durante procedimientos de diagnóstico e intervención. Su control de torque, su sensibilidad giro tras giro y su capacidad de penetración en las lesiones muestran buenos resultados a la hora de desplazarse por vasos tortuosos. El recubrimiento hidrofílico presenta lubricación duradera y adhesión uniforme a la capa superficial. Las guías Merit Laureate fueron diseñadas para disminuir los saltos, reducir la fricción al mínimo y permitir los cambios rápidos de catéter.



La guía hidrofílica Merit Laureate® tiene un recubrimiento hidrofílico mejorado que ofrece una lubricación duradera y una sensibilidad uniforme giro tras giro.

Número de referencia	Descripción	Tamaño	Longitud	Núcleo	Cantidad por caja
LWSTDA3580	Estándar/Angular	0,035" (0,89 mm)	80 cm	Fijo	5
LWSTDA35150	Estándar/Angular	0,035" (0,89 mm)	150 cm	Fijo	5
LWSTDA35180	Estándar/Angular	0,035" (0,89 mm)	180 cm	Fijo	5
LWSTDA35220	Estándar/Angular	0,035" (0,89 mm)	220 cm	Fijo	5

Más opciones disponibles en el catálogo de Intervencionismo periférico de Merit. Solicite más información.

DISPOSITIVO DE TORQUE H2O TORQ™

El H2O Torq es un dispositivo de torque ergonómico que se puede manejar con una mano, diseñado para mejorar la manipulación de la punta de la guía. Su estructura, constituida por un solo componente de plástico, puede utilizarse con guías hidrofílicas o con revestimiento de PTFE, y permite una fácil recolocación y extracción para poder cambiar los dispositivos con rapidez. Empaquetados individualmente, cajas de 10 unidades.



TD100



TD200

Número de referencia	Descripción
TD100	Dispositivo naranja; guías de 0,025" (0,64 mm) a 0,040" (1,02 mm)
TD200	Dispositivo amarillo; guías de 0,010" (0,25 mm) a 0,020" (0,51 mm)

DISPOSITIVO DE TORQUE SEADRAGON™

El SeaDragon es un dispositivo de torque ergonómico que se puede manejar con una mano, diseñado para mejorar la manipulación de la punta de la guía. Su estructura, constituida por un solo componente de plástico, puede utilizarse con guías hidrofílicas o con revestimiento de PTFE, y permite una fácil recolocación y extracción para poder cambiar los dispositivos con rapidez. Empaquetados individualmente, cajas de 10 unidades.



Número de referencia	Descripción
TD500	Guías de 0,018" (0,46 mm) a 0,038" (0,97 mm)

SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRASTE MISER®

El exclusivo diseño de bureta y bola anaranjada del sistema de administración de contraste Miser evita que el aire se introduzca en las vías de líquidos durante una angiografía, lo cual garantiza la seguridad del paciente. La barrera antimicrobiana de la válvula dual antirretorno evita la contaminación cruzada. El rellenado automático durante cada extracción de contraste permite una preparación simple y rápida.

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRASTE MISER

Incluye un tubo distal de 72" (183 cm), 2 válvulas antirretorno, una bureta de 30 mL, una válvula de entrada de aire. Hay configuraciones disponibles con y sin llave de paso distal, y con tubo distal de calibre grande o pequeño. Empaquetados en cajas de 10 unidades, 4 cajas por estuche.

Número de referencia	Descripción
MISER1	Tubo de gran calibre sin llave de paso
MISER2	Tubo de gran calibre con llave de paso
MISER3	Tubo de calibre pequeño sin llave de paso
MISER4	Tubo de calibre pequeño con llave de paso



BURETA Y ESPIGA PARA EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRASTE MISER

Incluye una espiga de perforación de gran calibre, una bureta de 30 mL, una válvula de entrada de aire, una llave de paso distal de 3 vías de gran calibre con conectores Luer hembra. DEBE UTILIZARSE CONJUNTAMENTE CON K08-00422D (a continuación). Empaquetadas en cajas de 10 unidades, 4 cajas por estuche.

Número de referencia MISER5



SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRASTE MERIT EN LÍNEA

Incluye un tubo de gran calibre de 54" (137 cm), 2 válvulas antirretorno, una llave de paso de presión estándar de 3 vías y un conector Luer macho fijo. Empaquetados en cajas de 10 unidades, 4 cajas por estuche.

Número de referencia K08-00422D




SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRASTE

Espiga con tubo de gran calibre, llave de paso unida Marquis® y protectores de puerto lateral ventilados. Empaquetados en cajas de 25 unidades, 4 cajas por estuche.

Número de referencia

K08-02438


Espiga ventilada de gran calibre con orificio de aire adaptable al usuario. Tubo de gran calibre de 1", llave de paso de 1 vía con conector Luer hembra distal.

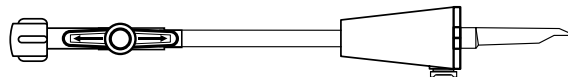

Número de referencia

K08-02384


Espiga ventilada de gran calibre con orificio de aire adaptable al usuario. Tubo de gran calibre de 2", llave de paso de 3 vías con conector Luer hembra distal.

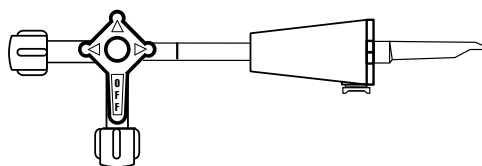

Número de referencia

K08-00417B


Espiga ventilada de gran calibre con orificio de aire adaptable al usuario. Tubo de gran calibre de 6,5", llave de paso de 3 vías con conector Luer hembra distal.

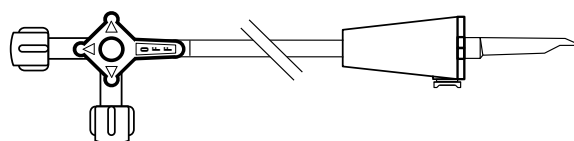

Número de referencia

K08-00077B


Espiga ventilada de gran calibre con orificio de aire adaptable al usuario. Tubo de gran calibre de 2", llave de paso con 1 vía con conector Luer macho distal.

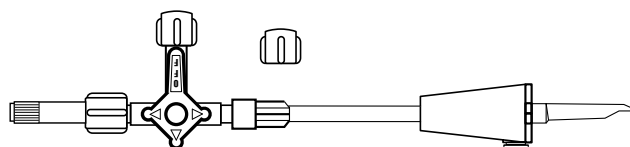

Número de referencia

K08-00078A

Espiga ventilada de gran calibre con orificio de aire adaptable al usuario. Tubo de gran calibre de 2", llave de paso con 1 vía con conector Luer macho distal.

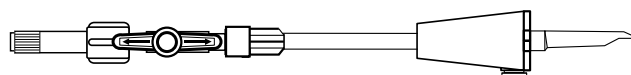


CONTINÚA

SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRASTE

Número de referencia

K08-00577

Cámara de macrogoteo con filtro, gran calibre, con tubo de gran calibre de 6,5", llave de paso de 3 vías con conector Luer hembra distal.

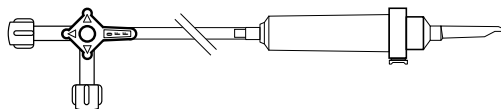

Número de referencia

K08-01878B


Espiga para la administración de medios de contraste Merit con un tubo de gran calibre de 20" (50 cm), espiga ventilada de gran calibre, válvula dual antirretorno, pinza de presión para el tubo y conector Luer macho fijo. Empaquetados en cajas de 20 unidades, 4 cajas por estuche.



Número de referencia

K08-00719

Espiga ventilada de gran calibre con orificio de aire. Tubo de gran calibre de 1", llave de paso de 3 vías con conector Luer hembra distal.

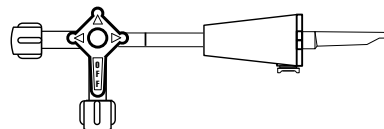

SETS DE ADMINISTRACIÓN DE FLUIDOS

Merit ofrece una amplia variedad de productos para la administración de fluidos, incluidos los sencillos sistemas espiga de una línea, las complejas cámaras cuentagotas con líneas múltiples bifurcadas o trifurcadas, y los tubos de pequeño y gran calibre con pinzas con rodillo o deslizantes. Los productos están disponibles con cámaras de micro o macrogoteo, y con o sin microfiltro. También hay disponibles sets de administración de fluidos personalizados.

SET DE ADMINISTRACIÓN DE FLUIDOS con cámara de macrogoteo ventilada adaptable al usuario y tubo de pequeño calibre. Empaquetados en cajas de 25 unidades, 4 cajas por estuche.



	48" de longitud (122 cm)	60" de longitud (152 cm)	72" de longitud (183 cm)	108" de longitud (274 cm)
--	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------

Número de referencia de los productos sin microfiltro

FAS1048

FAS1060

FAS1072

FAS1108

Número de referencia de los productos con microfiltro

FAS1160

FAS1172

SET DE ADMINISTRACIÓN DE FLUIDOS con cámara de macrogoteo no ventilada, microfiltro y tubo de pequeño calibre. Empaquetados en cajas de 25 unidades, 4 cajas por estuche.



	60" de longitud (152 cm)	72" de longitud (183 cm)
--	-----------------------------	-----------------------------

Número de referencia

FAS1260

FAS1272

SET DE ADMINISTRACIÓN DE FLUIDOS con espiga ventilada adaptable al usuario. Empaquetados en cajas de 25 unidades, 4 cajas por estuche.



	48" de longitud (122 cm)	60" de longitud (152 cm)	72" de longitud (183 cm)	108" de longitud (274 cm)
--	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------

Número de referencia de productos con tubos de pequeño calibre

FAS4048

FAS4060

FAS4072

FAS4108

Número de referencia de productos con tubos de gran calibre

FAS5048

FAS5060

FAS5072

FAS5108

SET DE ADMINISTRACIÓN DE FLUIDOS con espiga y tubo de gran calibre. Empaquetados en cajas de 25 unidades, 4 cajas por estuche.



20" de longitud (51 cm) con válvula antirretorno de un solo disco y espiga ventilada adaptable al usuario



48" de longitud (122 cm) con pinza de presión y espiga no ventilada

Número de referencia

K08-02181

FAS5248

CONTINÚA

SETS DE ADMINISTRACIÓN DE FLUIDOS

ESPIGA DE ADMINISTRACIÓN DE FLUIDOS con orificio de aire adaptable al usuario, tubo de pequeño calibre de 1" (2,5 cm) y protectores para los puertos. Empaquetados en cajas de 25 unidades, 4 cajas por estuche.



Conector Luer hembra Llave de paso de 3 vías Marquis®

Número de referencia	CAS100	CAS200
----------------------	--------	--------

SETS DE ADMINISTRACIÓN DE FLUIDOS con cámara de macrogoteo ventilada con bola, tubo de gran calibre de 72". Para uso de un solo paciente para administración de fluidos o de contraste. Empaquetados en cajas de 25 unidades, 4 cajas por estuche.



72" de longitud (183 cm)


Número de referencia	K08-02385
----------------------	-----------

TUBO DE ADMINISTRACIÓN DE FLUIDOS de pequeño calibre de 20" (50 cm) con conector Luer macho deslizante de pequeño calibre. Empaquetados en cajas de 15 unidades, 4 cajas por estuche.



Número de referencia	K08-01859
----------------------	-----------

SET DE ADMINISTRACIÓN DE FLUIDOS con cámara de macrogoteo ventilada adaptable al usuario, microfiltro, pinzas con rodillo y tubo de pequeño calibre. Empaquetados en cajas de 25 unidades, 4 cajas por estuche.

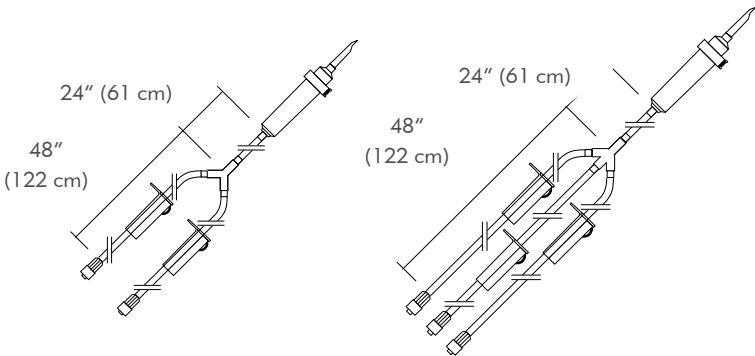


Bifurcado Trifurcado
72" de longitud (183 cm) 72" de longitud (183 cm)

Número de referencia	FAS2572	FAS3072
----------------------	---------	---------

SETS DE ADMINISTRACIÓN DE FLUIDOS

SET DE ADMINISTRACIÓN DE FLUIDOS con espiga ventilada adaptable al usuario, pinzas con rodillo y tubo de pequeño calibre.

Empaquetados en cajas de 25 unidades, 4 cajas por estuche.

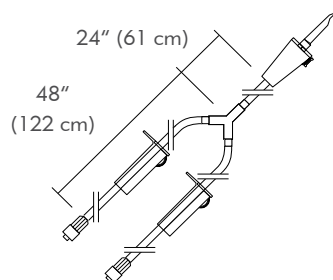

Bifurcado
72" de longitud (183 cm)

Número de referencia

FAS6072




FAS6072

TUBOS DE ALTA PRESIÓN

Merit ofrece tres configuraciones de materiales concretas, desde poliuretano altamente flexible hasta PVC transparente, para satisfacer sus necesidades específicas de presión. Las configuraciones de los tubos de alta presión de Merit ofrecen un conector macho fijo y un conector adaptador giratorio.

TUBOS DE INYECCIÓN DE CONTRASTE, POLIURETANO, FLEXIBLES MALLADOS


Índice de presión de 1200 psi (83 bar). Empaquetados enrollados en cajas de 25 unidades, 4 cajas por estuche.

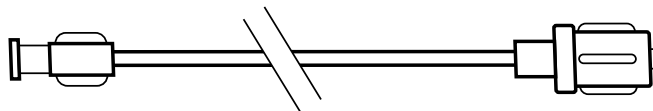

De macho a hembra	10" de longitud (25 cm)	20" de longitud (51 cm)	30" de longitud (76 cm)	48" de longitud (122 cm)	60" de longitud (152 cm)	72" de longitud (183 cm)
Adaptador rotatorio sin aire	HPF100E	HPF200E	HPF300E	HPF480E		HPF720E
Con pinza para tubos KEEP™		HPF200K	HPF300K	HPF480K	HPF600K	HPF720K
Conector macho fijo	HPF101E	HPF201E	HPF301E	HPF481E		HPF721E
Con pinza para tubos KEEP		HPF201K	HPF301K	HPF481K	HPF601K	HPF721K

TUBOS DE INYECCIÓN DE CONTRASTE, PVC, TRANSPARENTES

Índice de presión de 1200, 900 y 500 psi (83, 62 y 34 bar). Empaquetados rectos en cajas de 25 unidades, 4 cajas por estuche.

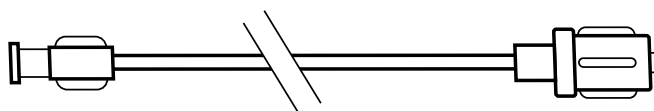


De macho a hembra	10" de longitud (25 cm)	20" de longitud (51 cm)	30" de longitud (76 cm)	48" de longitud (122 cm)	59" de longitud (150 cm)	72" de longitud (183 cm)
Adaptador rotatorio sin aire						
1200 psi (83 bar)	HPT100E	HPT200E	HPT300E	HPT480E	HPT590E	
900 psi (62 bar)	HP9100E	HP9200E	HP9300E	HP9480E		HP9720E
500 psi (34 bar)	HP5100E	HP5200E	HP5300E	HP5480E		

Conector macho fijo

1200 psi (83 bar)	HPT101E	HPT201E	HPT301E	HPT481E	HPT591E	
900 psi (62 bar)	HP9101E	HP9201E	HP9301E	HP9481E		HP9721E
500 psi (34 bar)	HP5101E	HP5201E	HP5301E	HP5481E		

TUBOS DE INYECCIÓN DE CONTRASTE, FLEXIBLES, NAILON/POLIURETANO, EXCITE™

Índice de presión de 1200 psi (83 bar). Empaquetados rectos en cajas de 25 unidades, 4 cajas por estuche.







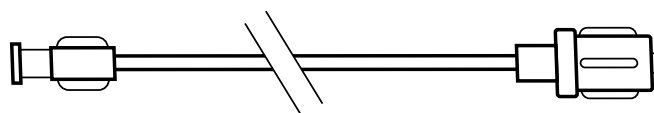







De macho a hembra	10" de longitud (25 cm)	20" de longitud (51 cm)	30" de longitud (76 cm)	39" de longitud (100 cm)	48" de longitud (122 cm)	59" de longitud (150 cm)	72" de longitud (183 cm)
Adaptador rotatorio sin aire	HPC100E	HPC200E	HPC300E	HPC390E	HPC480E	HPC590E	HPC720E
Conector macho fijo	HPC101E	HPC201E	HPC301E	HPC391E	HPC481E	HPC591E	HPC721E





TUBOS DE MONITORIZACIÓN DE PRESIÓN

TUBOS DE MONITORIZACIÓN DE PRESIÓN DE PVC RÍGIDOS Y NO EXPANDIBLES

Empaquetados enrollados en cajas de 25 unidades, 4 cajas por estuche.

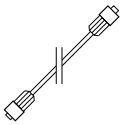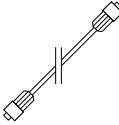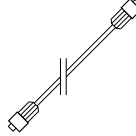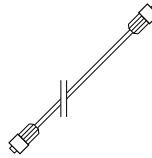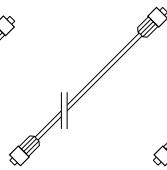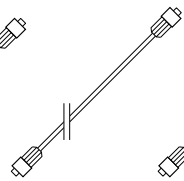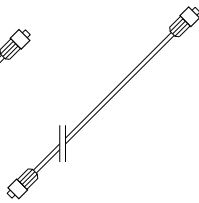
							
De macho a macho	6" de longitud (15 cm)	12" de longitud (30 cm)	24" de longitud (61 cm)	36" de longitud (91 cm)	48" de longitud (122 cm)	60" de longitud (152 cm)	72" de longitud (183 cm)
Número de referencia	PM6006	PM6012	PM6024	PM6036	PM6048	PM6060	PM6072

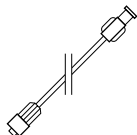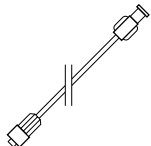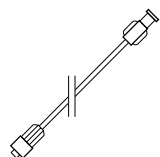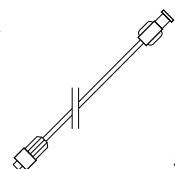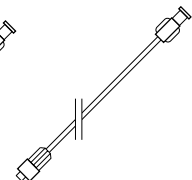					
De macho a hembra	6" de longitud (15 cm)	12" de longitud (30 cm)	24" de longitud (61 cm)	36" de longitud (91 cm)	48" de longitud (122 cm)
Número de referencia	PM6106	PM6112	PM6124	PM6136	PM6148

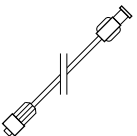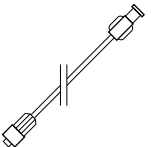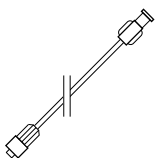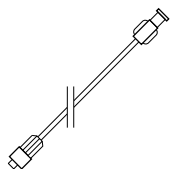				
De macho a hembra	60" de longitud (152 cm)	72" de longitud (183 cm)	84" de longitud (213 cm)	96" de longitud (244 cm)
Número de referencia	PM6160	PM6172	PM6184	PM6196

BOLSAS INFUSORAS DE PRESIÓN-PIB

Bolsas de nailon para la presurización de líquidos. La válvula de seguridad de presión dual cambia de presión normal a modo de sobrepresión con tan solo presionar un botón (solo en PIB500 y PIB1000).

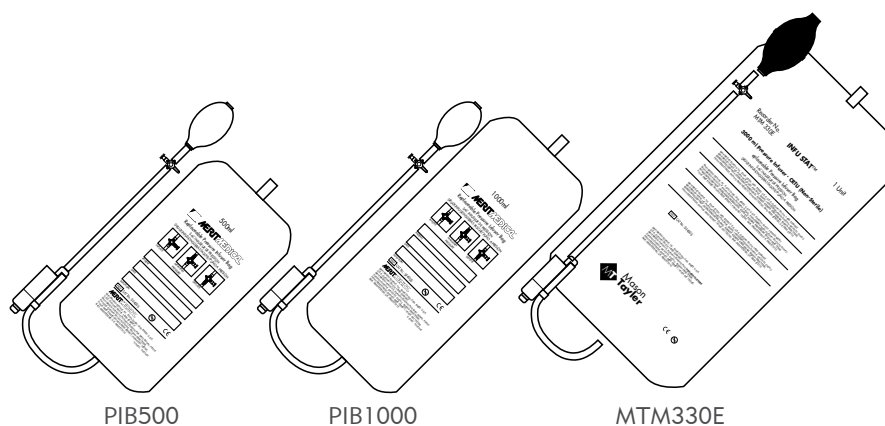

Números de referencia	Descripción
PIB500	500 mL 12 por caja, 48 por estuche
PIB1000	1000 mL 12 por caja, 48 por estuche
MTM330E	3000 mL 2 por caja, 10 por estuche




PIB1000

MANIFOLDS MERIT®

Los manifolds Merit están diseñados para ajustarse a numerosas preferencias de los médicos. El material de policarbonato transparente ofrece una buena visibilidad para la eliminación de burbujas y el diseño de las manijas ofrece facilidad de giro. Además, está disponible en modelos de uno a cinco puertos, 200 psi o 500 psi, con tubo de extensión de 6" (15 cm) y conector Luer giratorio, y en cuerpo entero o medio cuerpo. Empaquetados en cajas de 25 unidades, 4 cajas por estuche.

MANIFOLDS CON PUERTOS ORIENTADOS HACIA LA DERECHA Y CONECTOR LUER GIRATORIO

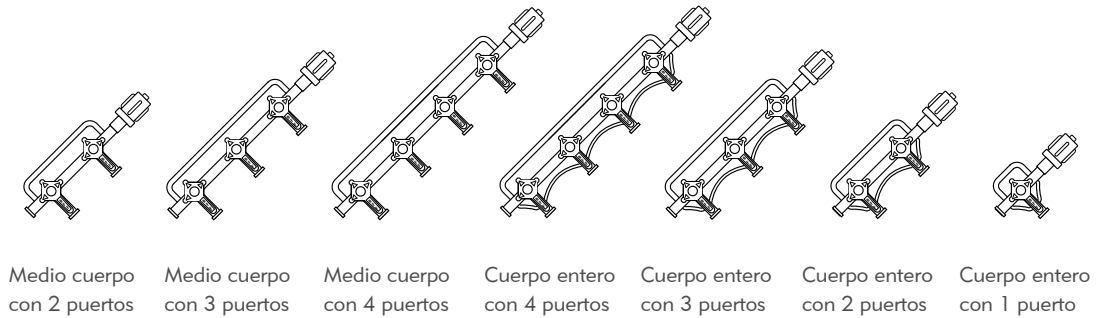

200 PSI (14 BAR)


Manifolds de apertura	202HN-R	203HN-R	204HN-R	204BN-R	203BN-R	202BN-R
Puerto amplio	202LHWN-R	203LHWN-R	204LHWN-R			
Manifolds de cierre	202HF-R	203HF-R	204HF-R	204BF-R	203BF-R	202BF-R
Puerto amplio	202LHWF-R	203LHWF-R	204LHWF-R			
Manifolds de cierre/360					204BF-RT	203BF-RT
Manifolds de apertura/360						203BN-RT

500 PSI (34 BAR)

Manifolds de apertura	502HN-R	503HN-R	504HN-R	504BN-R	503BN-R	502BN-R	501BN-R
Puerto amplio	502LHWN-R	503LHWN-R	504LHWN-R				
Manifolds de apertura/360	503HN-RT						
Manifolds de cierre	502HF-R	503HF-R	504HF-R	504BF-R	503BF-R	502BF-R	501BF-R
Puerto amplio	502LHWF-R	503LHWF-R	504LHWF-R				
Manifolds de cierre/360	502HF-RT				503BF-RT		

MANIFOLDS CON PUERTOS ORIENTADOS HACIA LA IZQUIERDA Y CONECTOR LUER GIRATORIO

Empaquetados en cajas de 25 unidades, 4 cajas por estuche.

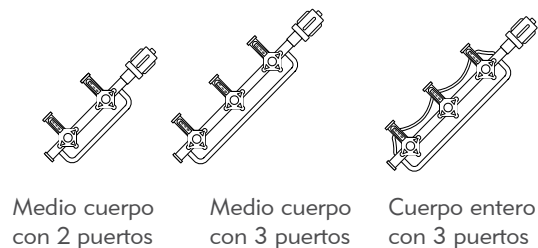

200 PSI (14 BAR)


Manifolds de apertura			203BN-L
Manifolds de cierre	202HF-L	203HF-L	
			203BF-L

500 PSI (34 BAR)

Manifolds de cierre	502HF-L	503HF-L
---------------------	---------	---------

MANIFOLDS CON TODOS LOS PUERTOS HEMBRA

Empaquetados en cajas de 25 unidades, 4 cajas por estuche.

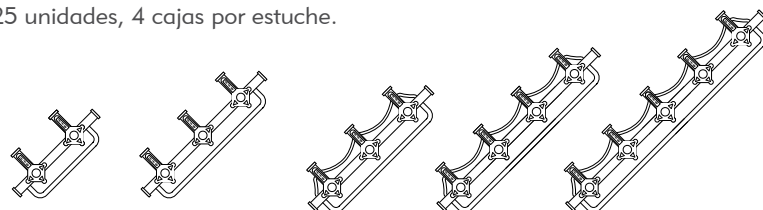

Medio
cuerpo con
2 puertos

Medio
cuerpo con
3 puertos

Cuerpo entero
con 3 puertos

Cuerpo entero
con 4 puertos

Cuerpo entero
con 5 puertos

200 PSI (14 BAR)

Manifolds de apertura			203BN-F		
Manifolds de cierre	202HF-F	203HF-F			205BF-F
Manifolds de cierre/360			203BF-FT	204BF-FT	205BF-FT

500 PSI (34 BAR)


Manifolds de cierre			503BF-F		
---------------------	--	--	---------	--	--



205BF-F

MANIFOLDS CON PUERTOS ORIENTADOS HACIA LA DERECHA, EXTENSIÓN DEL TUBO DE 6" (15 CM) Y CONECTOR LUER GIRATORIO

Empaquetados en cajas de 25 unidades, 4 cajas por estuche.

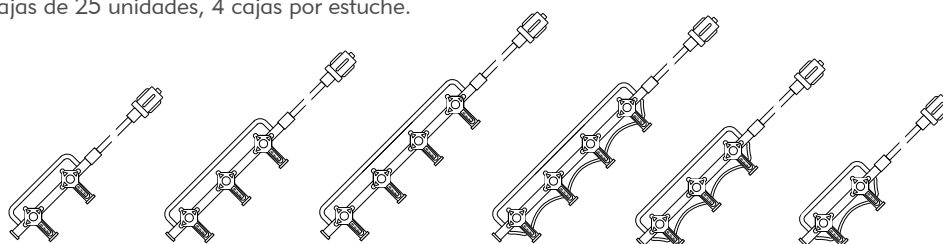

Medio
cuerpo con
2 puertos

Medio
cuerpo con
3 puertos

Medio
cuerpo con
4 puertos

Cuerpo
entero con
4 puertos

Cuerpo
entero con
3 puertos

Cuerpo
entero con
2 puertos

200 PSI (14 BAR)


Manifolds de apertura	202HN-RX	203HN-RX			
Manifolds de cierre	202HF-RX	203HF-RX	204HF-RX		203BF-RX
Manifolds de cierre/360					203BF-RXT

500 PSI (34 BAR)

Manifolds de apertura	503HN-RX				502BN-RX
Manifolds de cierre	502LHWF-R	503HF-RX	504HF-RX	503BF-RX	502BF-RX
Manifolds de cierre/360					503BF-RXT

MANIFOLDS DEVOS™

Manifolds Devos con válvula de seguridad antirretorno, puertos orientados hacia la derecha y conector Luer giratorio. Los puertos TRAM® y TRAM-P™ tienen la ventaja añadida de contar con un transductor integrado en el puerto más cercano al adaptador giratorio con asideros cómodos y espaciados. Empaquetados en cajas de 25 unidades, 4 cajas por estuche. Manifolds TRAM y TRAM-P empaquetados en cajas de 10 unidades, 4 cajas por estuche.

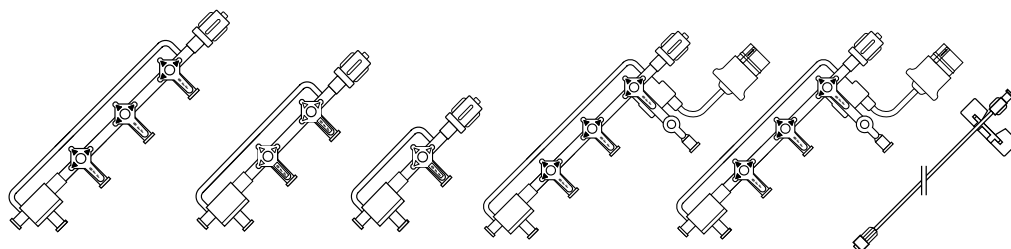

Medio
cuerpo con
4 puertos

Medio
cuerpo con
3 puertos

Medio
cuerpo con
2 puertos

TRAM con
4 puertos

TRAM-P con
4 puertos*

200 PSI (14 BAR)

Manifolds de cierre	2V4LHWF-R	2V3HF-R	2V2HF-R	2V4LTPHWF-R	2V4LTCHWF-R
Extensión de tubos	2V4LHWF-RXT				
Manifolds de cierre/360	2V4LHWF-RT	2V3HF-RT	2V2HF-RT	2V4LTPHWF-RT	2V4LTCHWF-RT


*Pinza y línea de compensación de 48" (122 cm)




2V3HF-R

SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRASTE A PRESIÓN

Presenta una espiga unidireccional de perforación tipo sosa y un tubo de gran calibre. Empaquetados en cajas de 15 unidades, 4 cajas por estuche.

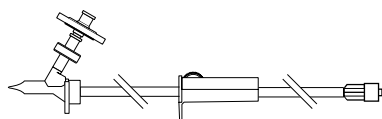

72" de longitud (183 cm)

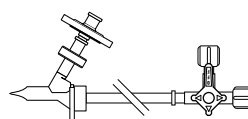

6,5" de longitud (17 cm)


Número de referencia

K08-00006

K08-00685A

MANIFOLDS TRAM® CON TRANSDUCTOR INTEGRADO

El manifold TRAM con transductor integrado le brinda a un único operador la practicidad de quitar las burbujas, iniciar y reiniciar dentro del campo estéril. El TRAM ha optimizado la comodidad del médico reduciendo la fatiga de la mano con manijas espaciadas fáciles de girar y de bajo torque, incluso al utilizar presiones de inyección más elevadas. El manifold Devos™ TRAM tiene una válvula antirretorno de seguridad. Empaquetados en cajas de 10 unidades, 4 cajas por estuche.

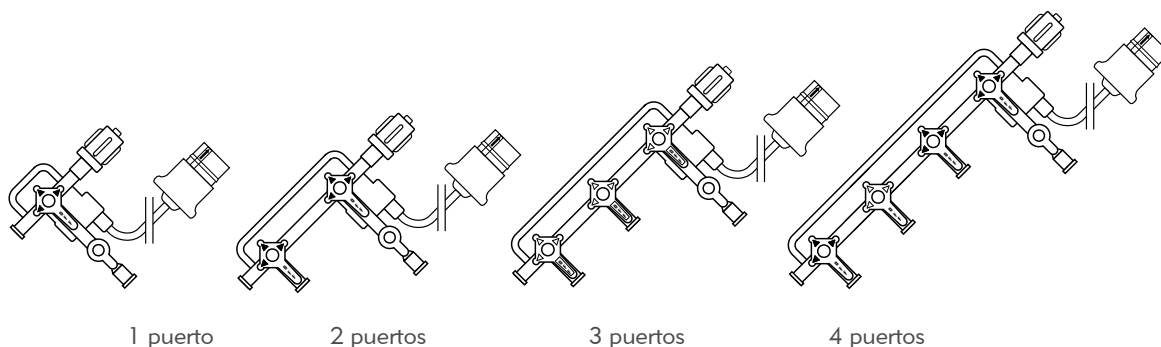

200 PSI (14 BAR)


Manifolds de apertura espaciadas			
Estándar	201LTPHN-R	203LTPHN-R	
Manifolds de cierre espaciadas		202LTPHWF-R	203LTPHWF-R
Devos			204LTPHWF-R
Devos con manija de 360°			2V4LTPHWF-R
Estándar		203LTPHF-R	2V4LTPHWF-RT

500 PSI (34 BAR)

Manifolds de apertura espaciadas		502LTPHWN-R	503LTPHWN-R	504LTPHWN-R
Estándar		501LTPHN-R	503LTPHN-R	
Manifolds de cierre espaciadas		502LTPHWF-R	503LTPHWF-R	504LTPHWF-R
Estándar			503LTPHF-R	


MANIFOLDS TRAM-P™ CON TRANSDUCTOR INTEGRADO

El TRAM-P presenta un transductor de presión en el primer puerto. Al colocar la línea de compensación en un portasueros en lugar de una mesa, el TRAM-P mantiene una lectura constante y calibrada. Con esta configuración, el manifold puede moverse a cualquier posición sin que ello afecte a la precisión de la lectura de la presión. Está disponible con cómodos asideros espaciados. El manifold Devos™ TRAM-P tiene una válvula antirretorno de seguridad. Empaquetados en cajas de 10 unidades, 4 cajas por estuche.

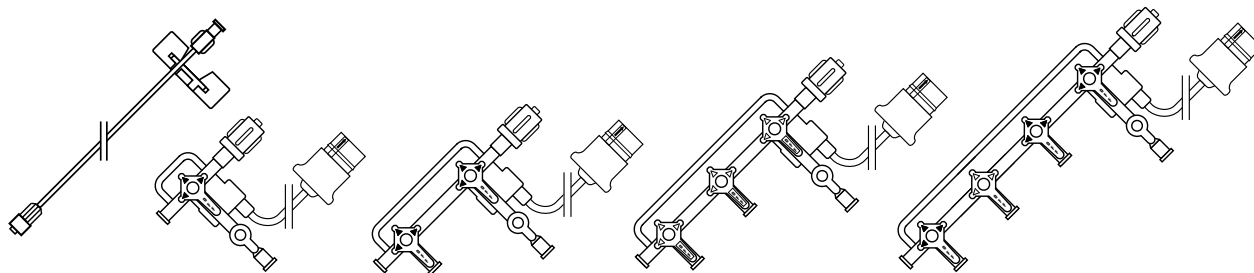

	1 puerto	2 puertos	3 puertos	4 puertos
200 PSI (14 BAR)				
Manifolds de apertura espaciadas		202LTCHWN-R	203LTCHWN-R	204LTCHWN-R
Estándar	201LTCHN-R		203LTCHN-R	
Manifolds de cierre espaciadas		202LTCHWF-R	203LTCHWF-R	204LTCHWF-R
Devos				22V4LTCHWF-R
Devos con manija de 360°				2V4LTCHWF-RT
Estándar			203LTCHF-R	

500 PSI (34 BAR)				
Manifolds de apertura espaciadas		502LTCHWN-R	503LTCHWN-R	504LTCHWN-R
Estándar	501LTCHN-R		503LTCHN-R	
Manifolds de cierre espaciadas		502LTCHWF-R	503LTCHWF-R	504LTCHWF-R
Estándar	501LTCHF-R		503LTCHF-R	

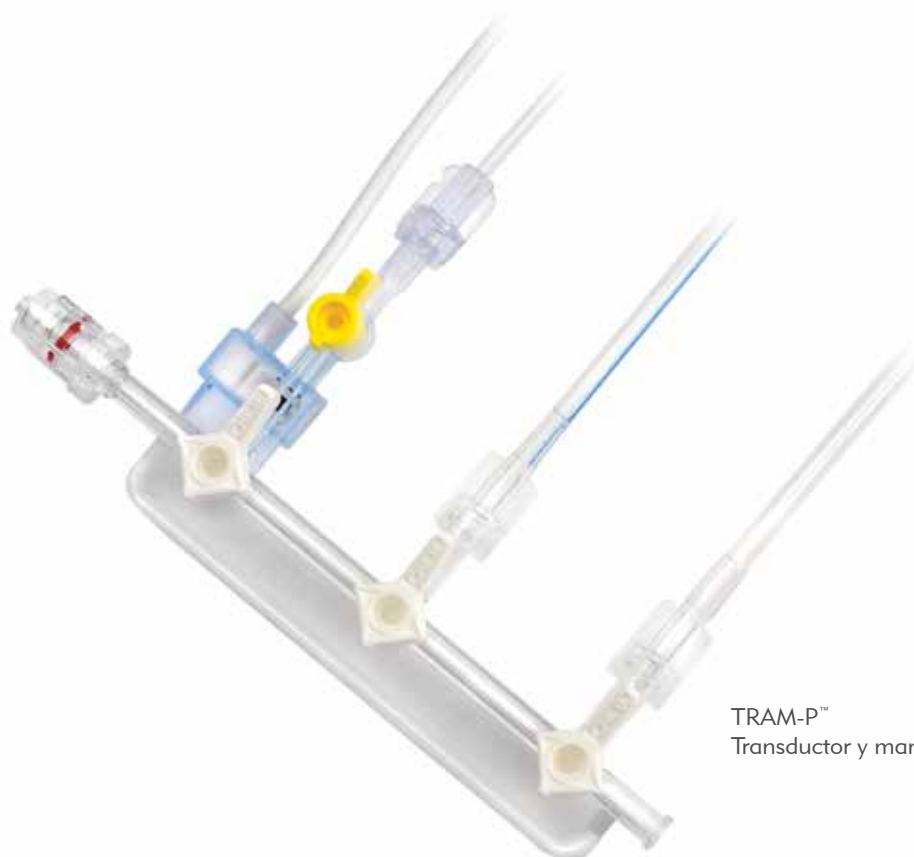


TRAM-P™
Transductor y manifold

KITS DE RESPUESTA RÁPIDA RIGHT HEART

Los kits Right Heart están preensamblados e incluyen componentes necesarios para el control de la presión y la gestión de fluidos.

KIT DE RESPUESTA RÁPIDA RIGHT HEART ON


Manifold de 2 puertos, llave de apertura con transductor, tubo de monitorización de presión de 60" (152 cm) y vía de lavado de tubo de calibre pequeño de 60" (152 cm), sin ventilación. Empaquetados en cajas de 10 unidades, 4 cajas por estuche.

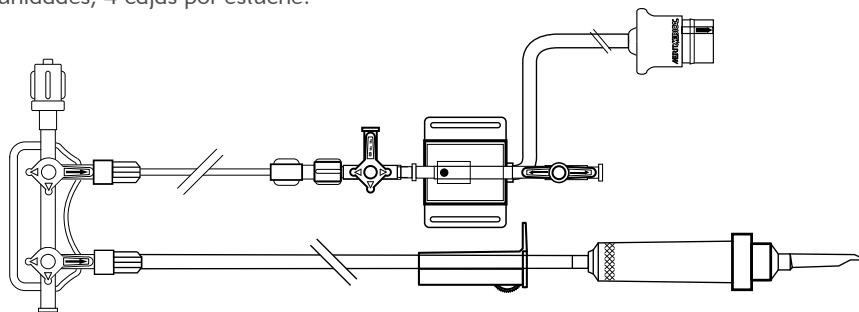

Número de referencia K09-10471

KIT DE RESPUESTA RÁPIDA RIGHT HEART OFF

Manifold de 2 puertos, llave de apertura con transductor, tubo de monitorización de presión de 60" (152 cm) y vía de lavado de tubo de calibre pequeño de 60" (152 cm), sin ventilación. Empaquetados en cajas de 10 unidades, 4 cajas por estuche.

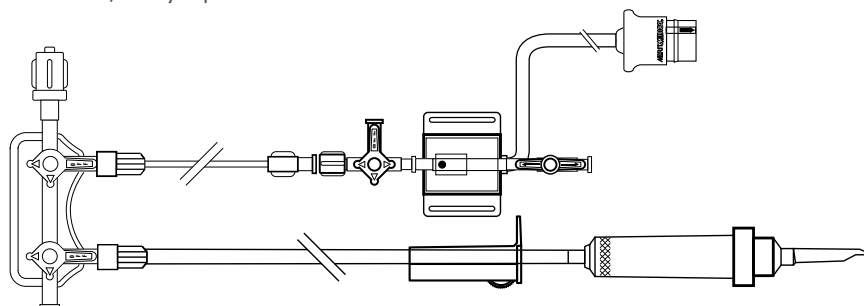

Número de referencia K09-10472


Los kits de respuesta rápida no llevan el marcado CE.

LLAVES DE PASO DE LA SERIE MARQUIS®

Las grandes llaves de fácil agarre de Merit Medical facilitan la sujeción y el giro de la llave de paso Marquis. Disponible con índices de presión de 200, 500 y 1050 psi con llaves fáciles de girar. Disponibles con conector Luer rotatorio, de tuerca giratoria, fijo y deslizable. Empaquetadas en cajas de 50 unidades, 4 cajas por estuche.



HIRC

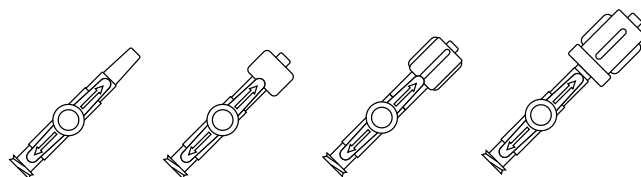

Luer deslizable Luer macho fijo Tuerca giratoria Adaptador macho rotatorio

200 PSI (14 BAR)


1 vía (manija blanca)	S1SLC	S1FLC	S1SNC
-----------------------	-------	-------	-------

500 PSI (34 BAR)

1 vía (manija azul claro)	M1SLC	M1FLC	M1SNC
---------------------------	-------	-------	-------

1050 PSI (72 BAR)

1 vía (manija azul oscuro)		H1FLC	H1SNC	H1RC
----------------------------	--	-------	-------	------

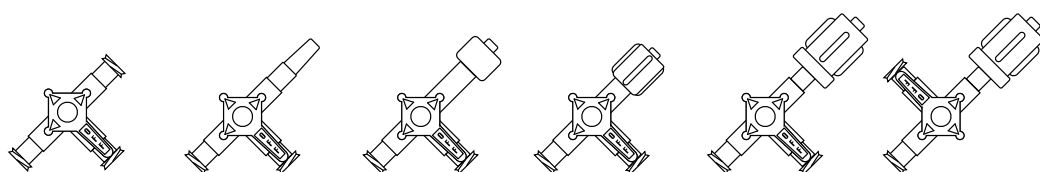

Todos hembra Luer deslizable Luer macho fijo Tuerca giratoria Adaptador macho rotatorio (orientado hacia la derecha) Adaptador macho rotatorio (orientado hacia la izquierda)

200 PSI (14 BAR)

3 vías (manija blanca)	S3FC	S3SLC	S3FLC	S3SNC
4 vías (manija blanca)		S4SLC	S4FLC	S4SNC

500 PSI (34 BAR)

3 vías (manija azul claro)	M3SLC	M3FLC	M3SNC	M3RRC	M3RLC
3 vías (manija roja)				M3RRC-R	
4 vías (manija azul claro)		M4FLC	M4SNC	M4RRC	

1050 PSI (72 BAR)

3 vías (manija azul oscuro)		H3FLC	H3SNC	H3RRC	H3RLC
4 vías (manija azul oscuro)		H4FLC	H4SNC	H4RRC	

1200 PSI (83 bar)

3 vías (manija roja)				U3RRC	
----------------------	--	--	--	-------	--

ADAPTADORES ROTATORIOS SIN AIRE

Se utilizan como conectores entre dos dispositivos. El conector Luer gira 360° e impide la transferencia de torque entre los dos dispositivos conectados. Mejora la seguridad del paciente, reduciendo al mínimo la posibilidad de que se quede aire atrapado. Empaquetados en cajas de 25 unidades, 4 cajas por estuche.




Adaptador rotatorio macho-hembra

Adaptador rotatorio macho-macho

Número de referencia	MFA100	MMA100
----------------------	--------	--------

JERINGAS DE CONTROL CORONARIO CCS™

La jeringa de control coronario CCS presenta un cilindro transparente que permite lograr visibilidad y uniformidad, y un émbolo resistente para mantener la estabilidad y durabilidad bajo presión. Los conectores Luer giratorios y fijos permiten lograr una conexión flexible y segura. El diseño especial del espacio de seguridad limita la posibilidad de que se introduzcan burbujas de aire en el catéter. El anillo de anclaje de CCS permite generar un vacío o presión negativa. Las jeringas Inject8™ e Inject10™ ofrecen a los médicos más presión con menor fuerza aplicada. Empaquetadas en cajas de 25 unidades, 4 cajas por estuche.

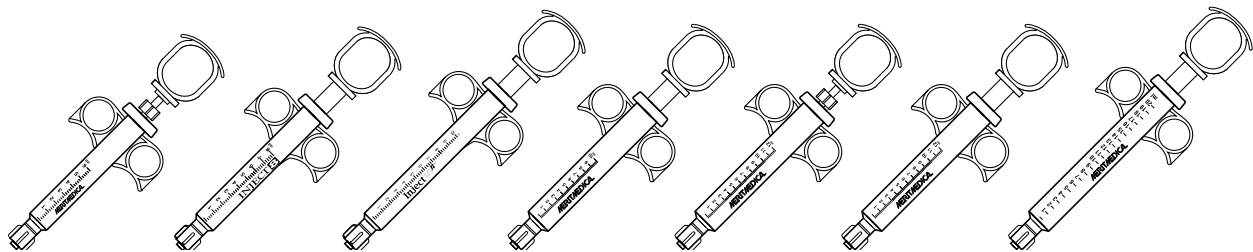

Émbolo con anillo de anclaje de 6 mL	Émbolo resistente de 8 mL Inject8™	Émbolo resistente de 10 mL Inject10™	Émbolo resistente de 10 mL	Émbolo con anillo de anclaje de 12 mL	Émbolo resistente de 12 mL	Émbolo resistente de 20 mL
--------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	---------------------------------------	----------------------------	----------------------------

Adaptador rotatorio

CCS460	CCS880	CCX010	CCS800	CCS100	CCS600	CCS320
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------


Conector macho fijo

CCS461	CCS881	CCX011	CCS801	CCS101	CCS601	CCS321
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------



ST800

JERINGA DE CONTROL SMART TIP™ con punta azul de silicona, émbolo con anillo y anillos de sujeción. Empaquetadas en cajas de 25 unidades, 4 cajas por estuche.

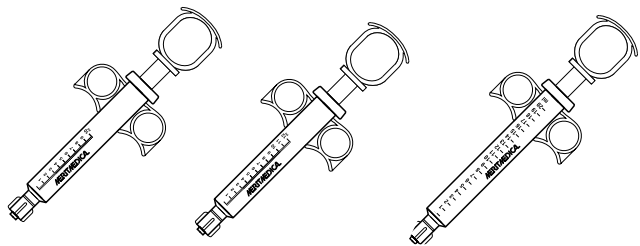

10 mL Émbolo resistente	12 mL Émbolo resistente	20 mL Émbolo resistente
----------------------------	----------------------------	----------------------------


Adaptador rotatorio

ST800	ST600	ST320
-------	-------	-------

Conector macho fijo

ST801	ST601	ST321
-------	-------	-------


JERINGA DE CONTROL CORONARIO con émbolo con protector para la palma de la mano y anillos de sujeción.
Empaquetadas en cajas de 25 unidades, 4 cajas por estuche.

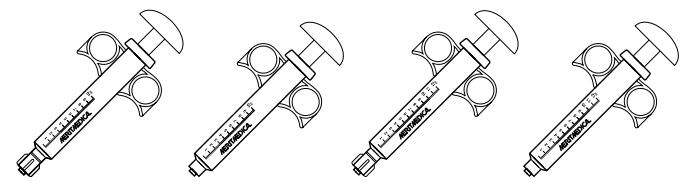

10 mL Émbolo resistente	10 mL Émbolo resistente	12 mL Émbolo resistente	12 mL Émbolo resistente
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Adaptador rotatorio	CCSB900	CCSB700
----------------------------	---------	---------

Conector macho fijo	CCSB901	CCSB701
----------------------------	---------	---------

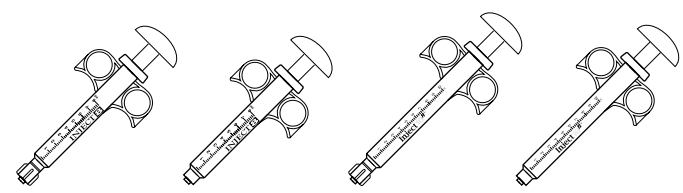

Émbolo resistente de 8 mL Inject8™	Émbolo resistente de 8 mL Inject8™	Émbolo resistente de 10 mL Inject10™	Émbolo resistente de 10 mL Inject10™
--	--	--	--


Adaptador rotatorio	CCSB880	CCXB010
----------------------------	---------	---------

Conector macho fijo	CCSB881	CCXB011
----------------------------	---------	---------



CCSB900


JERINGA DE CONTROL CORONARIO con émbolo con protector para la palma de la mano y aletas de sujeción.
Empaquetadas en cajas de 25 unidades, 4 cajas por estuche.

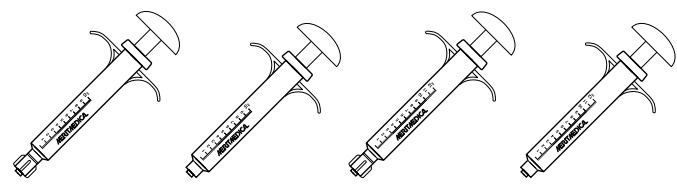

10 mL Émbolo resistente	10 mL Émbolo resistente	12 mL Émbolo resistente	12 mL Émbolo resistente
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Adaptador rotatorio	CCSB910	CCSB710
----------------------------	---------	---------

Conector macho fijo	CCSB911	CCSB711
----------------------------	---------	---------

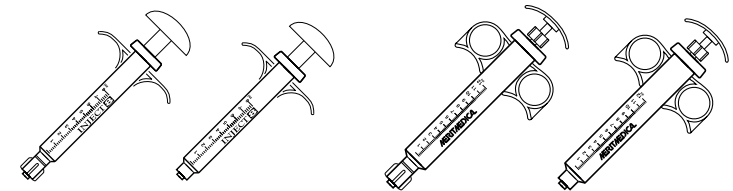

Émbolo resistente de 8 mL Inject8™	Émbolo resistente de 8 mL Inject8™	Émbolo con anillo de anclaje de 12 mL	Émbolo con anillo de anclaje de 12 mL
--	--	--	--

Adaptador rotatorio	CCSW880	CCS200
----------------------------	---------	--------

Conector macho fijo	CCSW881	CCS201
----------------------------	---------	--------

JERINGA RXP® DE PREPARACIÓN PARA CAMBIO RÁPIDO

La jeringa RXP se ha diseñado específicamente para facilitar el lavado del lumen de la guía de balones de intercambio rápido. El cilindro está fabricado con policarbonato transparente, que ofrece una apariencia y una textura similar al vidrio durante el uso. Empaquetadas en cajas de 25 unidades, 4 cajas por estuche.

Número de referencia RXPOR



JERINGAS DE VACÍO VACLOK®

La jeringa de vacío VacLok presenta un cilindro de policarbonato transparente, un émbolo blanco, un mecanismo de bloqueo de cuatro o seis posiciones y un conector Luer macho fijo. Empaquetadas en cajas de 20 o 25 unidades, 4 cajas por estuche.



10 mL, cuatro
posiciones, 25/caja

20 mL, cuatro
posiciones, 20/caja

30 mL, seis
posiciones, 20/caja

60 mL, seis
posiciones, 25/caja

Número de referencia

VAC110

VAC120


VAC130

VAC160

TRANSDUCTORES DE PRESIÓN MERITRANS®

Con una precisión fiable, configuraciones adaptadas y una ruta transparente para el fluido, los transductores de presión arterial Meritans pueden personalizarse para satisfacer las necesidades de sus médicos y laboratorios. Nuestros transductores están disponibles como dispositivos de mano y Paley. Meritans también puede configurarse con una amplia gama de accesorios de Merit.

TRANSDUCTORES DE PRESIÓN ARTERIAL MERITRANS con carcasa con aletas. Empaquetados en cajas de 25 unidades, 4 cajas por estuche.

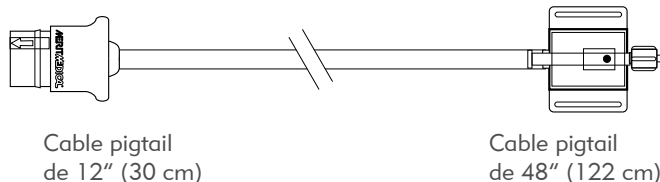


Número de referencia MER100

MER148



TRANSDUCTOR DE PRESIÓN ARTERIAL MERITRANS con carcasa sin aletas. Empaquetados en cajas de 25 unidades, 4 cajas por estuche.

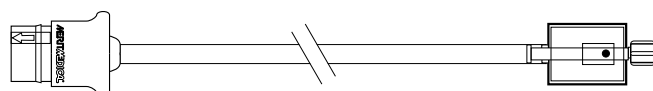


Número de referencia

MER212

Cable pigtail de 48" (122 cm)

MER200


MERITRANS MER100 con llaves de paso de presión estándares unidas de 1 y 3 vías Marquis®. Empaquetados en cajas de 25 kits, 4 cajas por estuche.

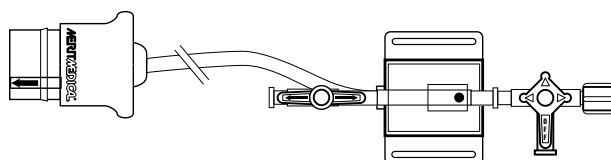

Número de referencia

K11-00096

MERITRANS MER100 con dos llaves de paso de presión estándares unidas de 1 vía Marquis. Empaquetados en cajas de 15 kits, 4 cajas por estuche.

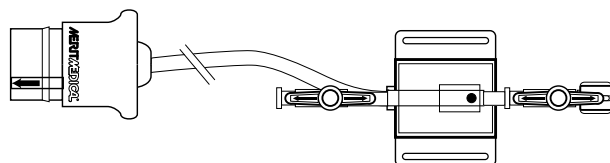


Número de referencia

K11-00098

TRANSDUCTORES DE PRESIÓN MERITRANS®


MERITRANS MER100 con dos llaves de paso de presión estándares unidas de 3 vías Marquis®. Empaquetados en cajas de 15 kits, 4 cajas por estuche.

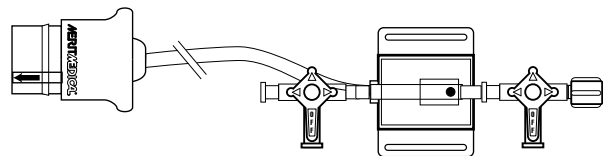

Cable pigtail de 12" (30 cm)

Número de referencia K11-00099


MERITRANS MER100 con llaves de paso de presión estándares unidas de 1 y 3 vías Marquis. Empaquetados en cajas de 15 kits, 4 cajas por estuche.

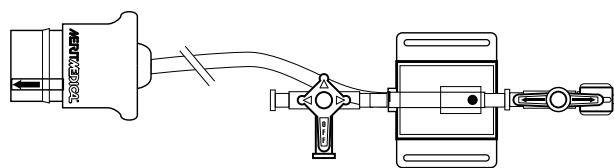

Cable pigtail de 12" (30 cm)

Número de referencia K11-00100


MERITRANS MER200 con llave de paso de presión estándar unida de 1 vía Marquis. Empaquetados en cajas de 25 kits, 4 cajas por estuche.

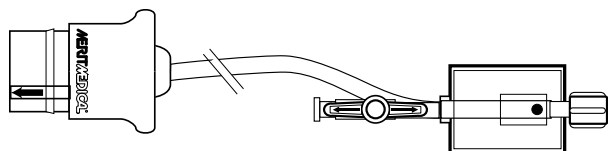

Cable pigtail de 48" (122 cm)

Número de referencia K11-00137

MERITRANS MER200 con una llave de paso de 3 vías Marquis unida a ambos extremos. Empaquetados en cajas de 15 kits, 4 cajas por estuche.

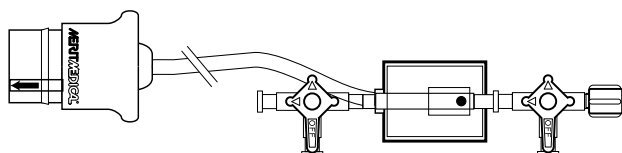


Cable pigtail de 48" (122 cm)

Número de referencia K11-00144

CONTINUÁ

TRANSDUCTORES DE PRESIÓN MERITRANS®


MERITRANS MER100 con llaves de paso de 3 vías Marquis® unidas al conector Luer hembra, el dispositivo de lavado y la vía de administración de fluidos de calibre pequeño de 72" (183 cm) con cámara cuentagotas con filtro/orificio de aire. Empaquetados en cajas de 15 kits, 4 cajas por estuche.

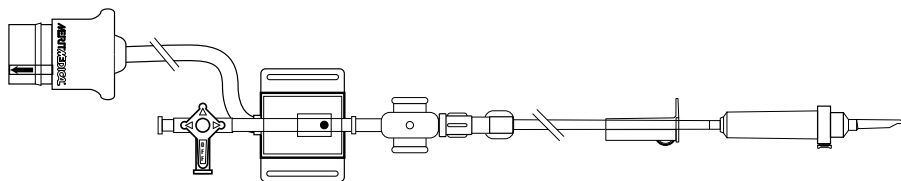

Cable pigtail de 12" (30 cm)

Número de referencia K11-00280


MERITRANS MER200 con una llave de paso de 3 vías Marquis (presión media, adaptador rotatorio macho) y una llave de paso de 1 vía Marquis. Empaquetados en cajas de 15 kits, 4 cajas por estuche.

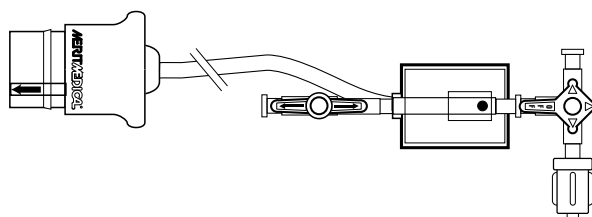

Cable pigtail de 48" (122 cm)

Número de referencia K11-00392


MERITRANS MER200 con una llave de paso de 3 vías Marquis y una llave de paso de 1 vía Marquis. Empaquetados en cajas de 15 kits, 4 cajas por estuche.

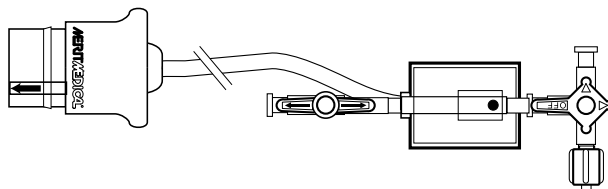

Cable pigtail de 48" (122 cm)

Número de referencia K11-00202

MERITRANS MER100 con una llave de paso de 1 vía Marquis. Empaquetados en cajas de 15 kits, 4 cajas por estuche.

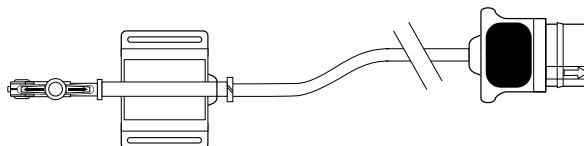


Cable pigtail de 48" (122 cm)

Número de referencia K11-01321

CONTINÚA

TRANSDUCTORES DE PRESIÓN MERITRANS®

MERITRANS MER200 con una llave de paso de 3 vías Marquis® y una llave de paso de 1 vía Marquis. Empaquetados en cajas de 15 kits, 4 cajas por estuche.

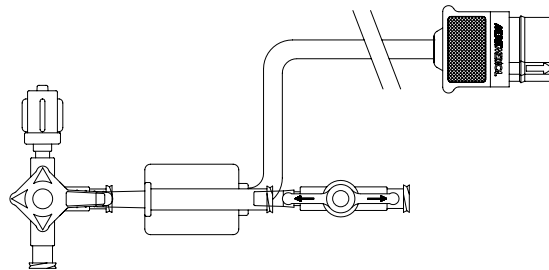


Cable pigtail de 48" (122 cm)

Número de referencia K11-00419


ACCESORIOS MERITRANS®

PLACA ORGANIZADORA MERITRANS

Con etiquetas de colores. Empaquetadas en cajas de 5 unidades.

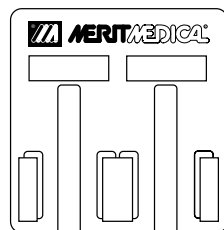

2 puertos

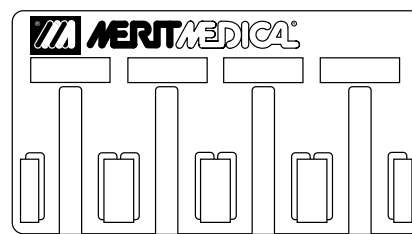


4 puertos

Número de referencia MER110


MER111

SOPORTE CLIPPER

Empaquetado en cajas de 1 unidad.

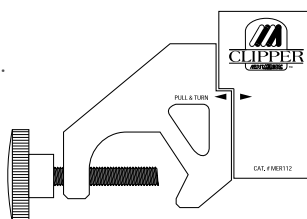

Gira a una posición vertical u horizontal

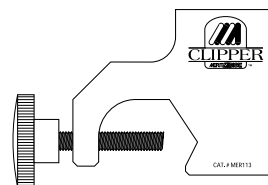

Posición fija


Número de referencia MER112

MER113

NOTA: El Clipper® esterilizable en autoclave (MER113A) está disponible previa solicitud expresa. Prevea un plazo de entrega de unas seis semanas.

SERIE DE CABLES REUTILIZABLES MERITRANS

Incluye 19 cables estándares que se pueden utilizar con la mayor parte de configuraciones de control. Cables compatibles para su sistema de control disponibles a través de su representante de Merit.

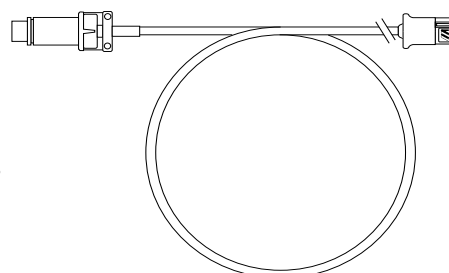

TERAPÉUTICA

TERAPÉUTICA



CATÉTERES DE ASPIRACIÓN

Catéter de aspiración ASAP®	65
Catéter de aspiración ASAPLP™	65

CATÉTERES GUÍA

Catéteres guía ConcierGE® de calidad superior	66-74
Judkins derecho	66
Judkins izquierdo	67
SBS	69
SBS arteria descendente anterior izquierda	70
SBS arteria coronaria derecha	70
Amplatz derecho	71
Amplatz izquierdo	72
Multiusos	72
Bypass coronario izquierdo	72
Bypass coronario derecho	73
Mamaria interna	73
El Gamal	73
Hockey Stick	73
Ultimate™	74

VÁLVULAS Y ACCESORIOS HEMOSTÁTICOS

Válvulas y accesorios hemostáticos	75
Paquetes de angioplastia de Merit - MAP™	76

DISPOSITIVOS DE INFLADO

Dispositivos de inflado BasixCOMPAK™	77
Dispositivos de inflado BasixTOUCH™	78
Dispositivos de inflado Blue Diamond™	79

SISTEMA PARA POSICIONAMIENTO DE STENTS

Sistema de posicionamiento de stents Ostial PRO®	80
--	----

CATÉTERES DE ASPIRACIÓN

Los catéteres de aspiración ASAP® y ASAPLP™ (perfil bajo) están diseñados para una aspiración de coágulos eficaz y rápida. El ASAP es un catéter de 5,2 F con un diámetro exterior máximo de 0,068". El ASAPLP es un catéter de perfil bajo de 4 F con un diámetro exterior máximo de 0,055". Ambos catéteres están disponibles en kits que incluyen todos los componentes necesarios para llevar a cabo una intervención de aspiración con catéter segura, rápida y eficaz.


CADA KIT INCLUYE:

- Catéter ASAP o ASAPLP
- 2 jeringas VacLok®
- Jeringa de lavado RXP®
- 2 cestas filtrantes, 70 micras
- Recipiente cerrado para desechos MicroStop™
- Conjunto de tubos de 21,5 cm con llave de paso

Número de referencia	Descripción	Área de lumen	Cantidad por caja
ASAP100	Catéter de aspiración ASAP y kit	1,01 mm ²	1
ASAPLP	Catéter de aspiración ASAPLP y kit	0,81 mm ²	1



ASAPLP™
Catéter de aspiración de perfil bajo y kit

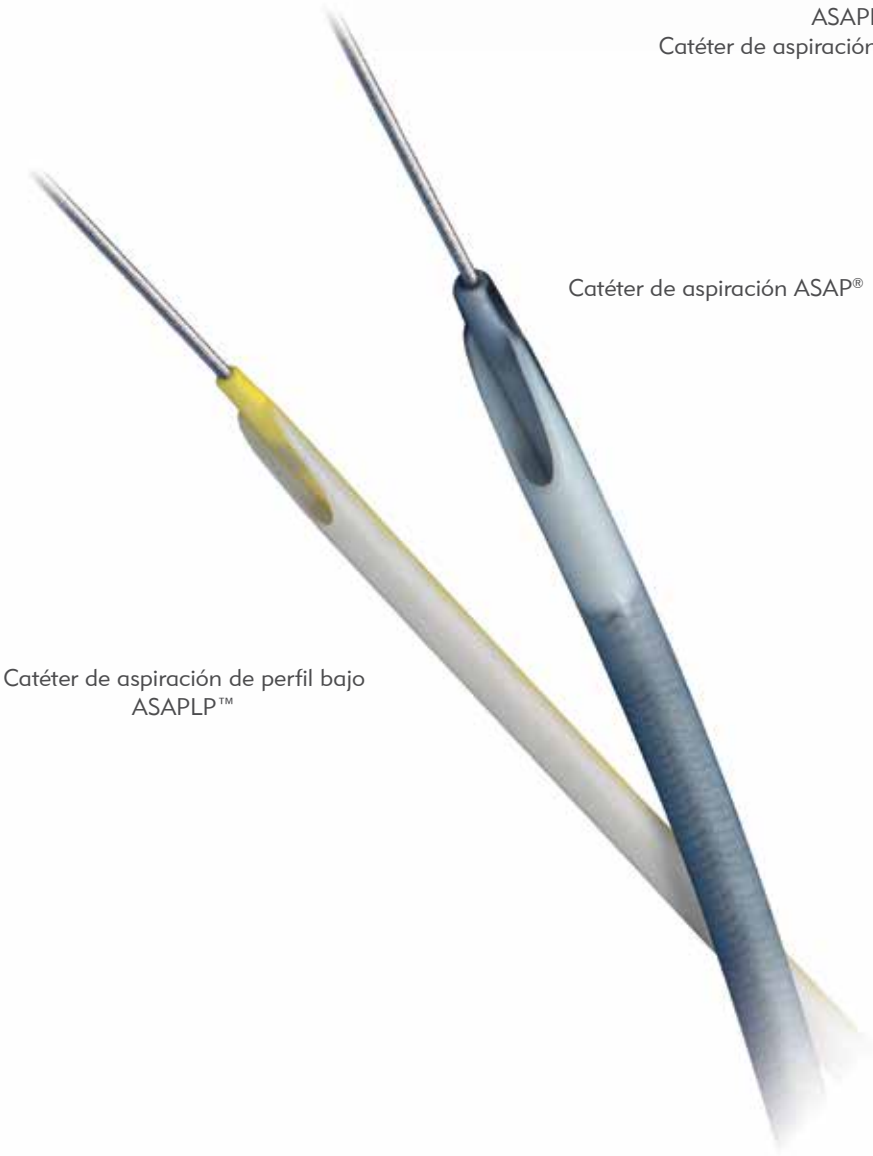

Catéter de aspiración ASAP®

Catéter de aspiración de perfil bajo
ASAPLP™

CATÉTERES GUÍA CONCIERGE®

Los catéteres ConciERGE de Merit Medical ofrecen un excelente desempeño durante la orientación y un rendimiento superior en las características que los médicos más valoran: resistencia al acodamiento (30 % más que las marcas principales¹), capacidad de apoyo, punta atraumática y torque 1:1.

El recubrimiento de nailon aporta un buen apoyo y capacidad de empuje al catéter.

Este segmento, más blando que el eje verde oscuro, brinda al catéter una mayor flexibilidad mientras se desplaza por el cayado aórtico y empieza a dar forma al catéter.

Zona aún más blanda que proporciona aún más flexibilidad a la forma de la punta del catéter. Los segmentos se van haciendo más blandos de forma progresiva.




¹Datos en el archivo. Resultados de las pruebas basados en la comparación de catéter guía de 6 F.

CATÉTERES GUÍA CONCIERGE® DE TIPO JUDKINS DERECHO

Número de referencia	Tamaño en French	Punta	Diámetro interno	Longitud	Número de orificios laterales
CGC5100JR30	5	3,0	0,057"/1,4 mm	100 cm	-
CGC5100JR35	5	3,5	0,057"/1,4 mm	100 cm	-
CGC5100JR35SH	5	3,5	0,057"/1,4 mm	100 cm	2
CGC5100JR40	5	4,0	0,057"/1,4 mm	100 cm	-
CGC5100JR40SH	5	4,0	0,057"/1,4 mm	100 cm	2
CGC5100JR50	5	5,0	0,057"/1,4 mm	100 cm	-
CGC5100JR50SH	5	5,0	0,057"/1,4 mm	100 cm	2
CGC5100JR60	5	6,0	0,057"/1,4 mm	100 cm	-
CGC6100JR30	6	3,0	0,070"/1,8 mm	100 cm	-
CGC6100JR35	6	3,5	0,070"/1,8 mm	100 cm	-
CGC6100JR35SH	6	3,5	0,070"/1,8 mm	100 cm	2
CGC6100JR40	6	4,0	0,070"/1,8 mm	100 cm	-
CGC6100JR40SH	6	4,0	0,070"/1,8 mm	100 cm	2
CGC6100JR50	6	5,0	0,070"/1,8 mm	100 cm	-
CGC6100JR50SH	6	5,0	0,070"/1,8 mm	100 cm	2
CGC6100JR60	6	6,0	0,070"/1,8 mm	100 cm	-
CGC7100JR30	7	3,0	0,078"/2,0 mm	100 cm	-
CGC7100JR35	7	3,5	0,078"/2,0 mm	100 cm	-
CGC7100JR35SH	7	3,5	0,078"/2,0 mm	100 cm	2
CGC7100JR40	7	4,0	0,078"/2,0 mm	100 cm	-
CGC7100JR40SH	7	4,0	0,078"/2,0 mm	100 cm	2
CGC7100JR50	7	5,0	0,078"/2,0 mm	100 cm	-
CGC7100JR50SH	7	5,0	0,078"/2,0 mm	100 cm	2
CGC7100JR60	7	6,0	0,078"/2,0 mm	100 cm	-
CGC8100JR30	8	3,0	0,088"/2,2 mm	100 cm	-
CGC8100JR35	8	3,5	0,088"/2,2 mm	100 cm	-
CGC8100JR35SH	8	3,5	0,088"/2,2 mm	100 cm	2
CGC8100JR40	8	4,0	0,088"/2,2 mm	100 cm	-
CGC8100JR40SH	8	4,0	0,088"/2,2 mm	100 cm	2
CGC8100JR50	8	5,0	0,088"/2,2 mm	100 cm	-
CGC8100JR50SH	8	5,0	0,088"/2,2 mm	100 cm	2
CGC8100JR60	8	6,0	0,088"/2,2 mm	100 cm	-


SH = orificio lateral Los catéteres guía de 8 F se fabrican previa solicitud.

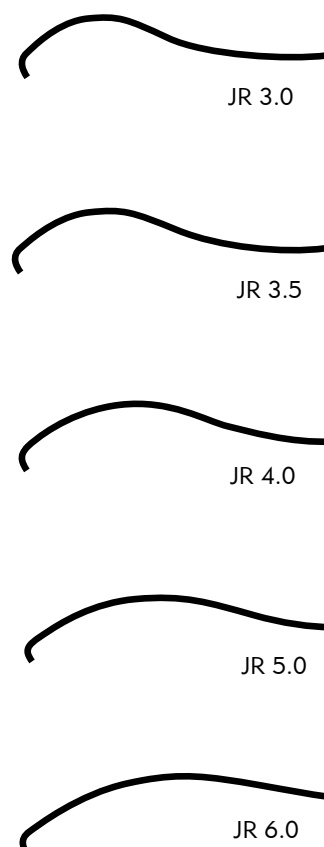

CATÉTERES GUÍA CONCIERGE® DE TIPO JUDKINS IZQUIERDO

Número de referencia	Tamaño en French	Descripción	Diámetro interno	Longitud	Número de orificios laterales
CGC5100JL30	5	3,0	0,057"/1,4 mm	100 cm	-
CGC5100JL35	5	3,5	0,057"/1,4 mm	100 cm	-
CGC5100JL35SH	5	3,5	0,057"/1,4 mm	100 cm	2
CGC5100JL35ST (punta corta)	5	3,5	0,057"/1,4 mm	100 cm	-
CGC5100JL40	5	4,0	0,057"/1,4 mm	100 cm	-
CGC5100JL40SH	5	4,0	0,057"/1,4 mm	100 cm	2
CGC5100JL40ST (punta corta)	5	4,0	0,057"/1,4 mm	100 cm	-
CGC5100JL45	5	4,5	0,057"/1,4 mm	100 cm	-
CGC5100JL45SH	5	4,5	0,057"/1,4 mm	100 cm	2
CGC5100JL50	5	5,0	0,057"/1,4 mm	100 cm	-
CGC5100JL50SH	5	5,0	0,057"/1,4 mm	100 cm	2
CGC6100JL30	6	3,0	0,070"/1,8 mm	100 cm	-
CGC6100JL35	6	3,5	0,070"/1,8 mm	100 cm	-
CGC6100JL35SH	6	3,5	0,070"/1,8 mm	100 cm	2
CGC6100JL35ST (punta corta)	6	3,5	0,070"/1,8 mm	100 cm	-
CGC6100JL40	6	4,0	0,070"/1,8 mm	100 cm	-
CGC6100JL40SH	6	4,0	0,070"/1,8 mm	100 cm	2
CGC6100JL40ST (punta corta)	6	4,0	0,070"/1,8 mm	100 cm	-
CGC6100JL45	6	4,5	0,070"/1,8 mm	100 cm	-
CGC6100JL45SH	6	4,5	0,070"/1,8 mm	100 cm	2
CGC6100JL50	6	5,0	0,070"/1,8 mm	100 cm	-
CGC6100JL50SH	6	5,0	0,070"/1,8 mm	100 cm	2
CGC7100JL30	7	3,0	0,078"/2,0 mm	100 cm	-
CGC7100JL35	7	3,5	0,078"/2,0 mm	100 cm	-
CGC7100JL35SH	7	3,5	0,078"/2,0 mm	100 cm	2
CGC7100JL35ST (punta corta)	7	3,5	0,078"/2,0 mm	100 cm	-
CGC7100JL40	7	4,0	0,078"/2,0 mm	100 cm	-
CGC7100JL40SH	7	4,0	0,078"/2,0 mm	100 cm	2
CGC7100JL40ST (punta corta)	7	4,0	0,078"/2,0 mm	100 cm	-
CGC7100JL45	7	4,5	0,078"/2,0 mm	100 cm	-
CGC7100JL45SH	7	4,5	0,078"/2,0 mm	100 cm	2
CGC7100JL50	7	5,0	0,078"/2,0 mm	100 cm	-
CGC7100JL50SH	7	5,0	0,078"/2,0 mm	100 cm	2
CGC8100JL30	8	3,0	0,088"/2,2 mm	100 cm	-
CGC8100JL35	8	3,5	0,088"/2,2 mm	100 cm	-
CGC8100JL35SH	8	3,5	0,088"/2,2 mm	100 cm	2
CGC8100JL35ST (punta corta)	8	3,5	0,088"/2,2 mm	100 cm	-
CGC8100JL40	8	4,0	0,088"/2,2 mm	100 cm	-
CGC8100JL40SH	8	4,0	0,088"/2,2 mm	100 cm	2
CGC8100JL40ST (punta corta)	8	4,0	0,088"/2,2 mm	100 cm	-
CGC8100JL45	8	4,5	0,088"/2,2 mm	100 cm	-
CGC8100JL45SH	8	4,5	0,088"/2,2 mm	100 cm	2
CGC8100JL50	8	5,0	0,088"/2,2 mm	100 cm	-
CGC8100JL50SH	8	5,0	0,088"/2,2 mm	100 cm	2

SH = orificio lateral ST = punta corta

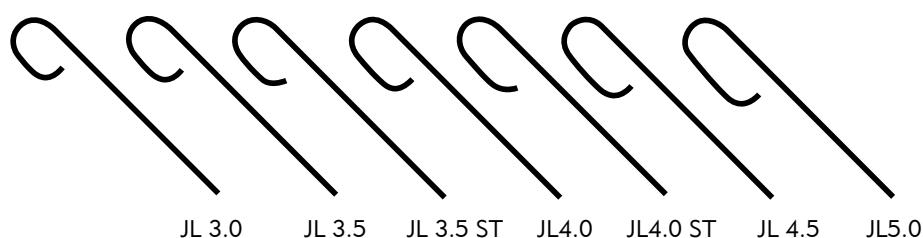


CATÉTERES GUÍA CONCIERGE® DE TIPO SBS

Número de referencia	Tamaño en French	Descripción	Diámetro interno	Longitud	Número de orificios laterales
SBS 3.0					
CGC5100SBS30	5	3.0	0,057"/1,4 mm	100 cm	-
CGC5100SBS30SH	5	3.0	0,057"/1,4 mm	100 cm	2
CGC6100SBS30	6	3.0	0,070"/1,8 mm	100 cm	-
CGC6100SBS30SH	6	3.0	0,070"/1,8 mm	100 cm	2
CGC7100SBS30	7	3.0	0,078"/2,0 mm	100 cm	-
CGC7100SBS30SH	7	3.0	0,078"/2,0 mm	100 cm	2
CGC8100SBS30	8	3.0	0,088"/2,2 mm	100 cm	-
CGC8100SBS30SH	8	3.0	0,088"/2,2 mm	100 cm	2
SBS 3.5					
CGC5100SBS35	5	3.5	0,057"/1,4 mm	100 cm	-
CGC5100SBS35SH	5	3.5	0,057"/1,4 mm	100 cm	2
CGC6100SBS35	6	3.5	0,070"/1,8 mm	100 cm	-
CGC6100SBS35SH	6	3.5	0,070"/1,8 mm	100 cm	2
CGC7100SBS35	7	3.5	0,078"/2,0 mm	100 cm	-
CGC7100SBS35SH	7	3.5	0,078"/2,0 mm	100 cm	2
CGC8100SBS35	8	3.5	0,088"/2,0 mm	100 cm	-
CGC8100SBS35SH	8	3.5	0,088"/2,0 mm	100 cm	2
SBS 3.5 MODIFICADO					
CGC5100SBS35-M	5	3.5-M	0,057"/1,4 mm	100 cm	-
CGC5100SBS35-MSH	5	3.5-M	0,057"/1,4 mm	100 cm	2
CGC6100SBS35-M	6	3.5-M	0,070"/1,8 mm	100 cm	-
CGC6100SBS35-MSH	6	3.5-M	0,070"/1,8 mm	100 cm	2
CGC7100SBS35-M	7	3.5-M	0,078"/2,0 mm	100 cm	-
CGC7100SBS35-MSH	7	3.5-M	0,078"/2,0 mm	100 cm	2
CGC8100SBS35-M	8	3.5-M	0,088"/2,0 mm	100 cm	-
CGC8100SBS35-MSH	8	3.5-M	0,088"/2,0 mm	100 cm	2
SBS 3.75					
CGC5100SBS375	5	3.75	0,057"/1,4 mm	100 cm	-
CGC5100SBS375SH	5	3.75	0,057"/1,4 mm	100 cm	2
CGC6100SBS375	6	3.75	0,070"/1,8 mm	100 cm	-
CGC6100SBS375SH	6	3.75	0,070"/1,8 mm	100 cm	2
CGC7100SBS375	7	3.75	0,078"/2,0 mm	100 cm	-
CGC7100SBS375SH	7	3.75	0,078"/2,0 mm	100 cm	2
CGC8100SBS375	8	3.75	0,088"/2,0 mm	100 cm	-
CGC8100SBS375SH	8	3.75	0,088"/2,0 mm	100 cm	2
SBS 3.75 MODIFICADO					
CGC5100SBS375-M	5	3.75-M	0,057"/1,4 mm	100 cm	-
CGC6100SBS375-M	6	3.75-M	0,057"/1,4 mm	100 cm	-
CGC7100SBS375-M	7	3.75-M	0,070"/1,8 mm	100 cm	-
CGC8100SBS375-M	8	3.75-M	0,070"/1,8 mm	100 cm	-
SBS 4.0					
CGC5100SBS40	5	4.0	0,057"/1,4 mm	100 cm	-
CGC5100SBS40SH	5	4.0	0,057"/1,4 mm	100 cm	2
CGC6100SBS40	6	4.0	0,070"/1,8 mm	100 cm	-
CGC6100SBS40SH	6	4.0	0,070"/1,8 mm	100 cm	2
CGC7100SBS40	7	4.0	0,078"/2,0 mm	100 cm	-
CGC7100SBS40SH	7	4.0	0,078"/2,0 mm	100 cm	2
CGC8100SBS40	8	4.0	0,088"/2,2 mm	100 cm	-
CGC8100SBS40SH	8	4.0	0,088"/2,2 mm	100 cm	2

SH = orificio lateral


CONTINÚA

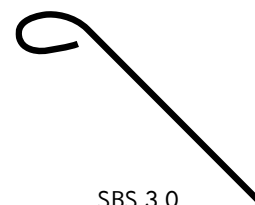

SBS 3.0




SBS 3.5

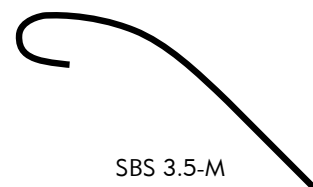

SBS 3.5-M



SBS 3.75

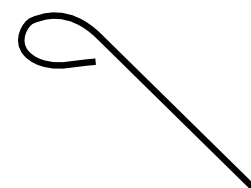

SBS 3.75-M



SBS 4.0

TERAPÉUTICA


CATÉTERES GUÍA CONCIERGE® DE TIPO SBS

Número de referencia	Tamaño en French	Descripción	Diámetro interno	Longitud	Número de orificios laterales
SBS 4.5					
CGC5100SBS45	5	4.5	0,057"/1,4 mm	100 cm	-
CGC5100SBS45SH	5	4.5	0,057"/1,4 mm	100 cm	2
CGC6100SBS45	6	4.5	0,070"/1,8 mm	100 cm	-
CGC6100SBS45SH	6	4.5	0,070"/1,8 mm	100 cm	2
CGC7100SBS45	7	4.5	0,078"/2,0 mm	100 cm	-
CGC7100SBS45SH	7	4.5	0,078"/2,0 mm	100 cm	2
CGC8100SBS45	8	4.5	0,088"/2,2 mm	100 cm	-
CGC8100SBS45SH	8	4.5	0,088"/2,2 mm	100 cm	2

SBS 4.5 MODIFICADO

CGC5100SBS45-M	5	4.5-M	0,057"/1,4 mm	100 cm	-
CGC5100SBS45-MSH	5	4.5-M	0,057"/1,4 mm	100 cm	2
CGC6100SBS45-M	6	4.5-M	0,070"/1,8 mm	100 cm	-
CGC6100SBS45-MSH	6	4.5-M	0,070"/1,8 mm	100 cm	2
CGC7100SBS45-M	7	4.5-M	0,078"/2,0 mm	100 cm	-
CGC7100SBS45-MSH	7	4.5-M	0,078"/2,0 mm	100 cm	2
CGC8100SBS45-M	8	4.5-M	0,088"/2,2 mm	100 cm	-
CGC8100SBS45-MSH	8	4.5-M	0,088"/2,2 mm	100 cm	2

SH = (orificio lateral)

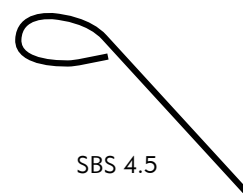


SBS 4.5



SBS 4.5-M

CATÉTERES GUÍA CONCIERGE® DE TIPO SBS ARTERIA DESCENDENTE ANTERIOR IZQUIERDA

Número de referencia	Tamaño en French	Descripción	Diámetro interno	Longitud	Número de orificios laterales
CGC5100SBSLAD30	5	SBSLAD3.0	0,057"/1,4 mm	100 cm	-
CGC5100SBSLAD30SH	5	SBSLAD3.0	0,057"/1,4 mm	100 cm	2
CGC5100SBSLAD35	5	SBSLAD3.5	0,057"/1,4 mm	100 cm	-
CGC5100SBSLAD35SH	5	SBSLAD3.5	0,057"/1,4 mm	100 cm	2
CGC5100SBSLAD40	5	SBSLAD4.0	0,057"/1,4 mm	100 cm	-
CGC5100SBSLAD40SH	5	SBSLAD4.0	0,057"/1,4 mm	100 cm	2
CGC5100SBSLAD45	5	SBSLAD4.5	0,057"/1,4 mm	100 cm	-
CGC5100SBSLAD45SH	5	SBSLAD4.5	0,057"/1,4 mm	100 cm	2
CGC6100SBSLAD30	6	SBSLAD3.0	0,070"/1,8 mm	100 cm	-
CGC6100SBSLAD30SH	6	SBSLAD3.0	0,070"/1,8 mm	100 cm	2
CGC6100SBSLAD35	6	SBSLAD3.5	0,070"/1,8 mm	100 cm	-
CGC6100SBSLAD35SH	6	SBSLAD3.5	0,070"/1,8 mm	100 cm	2
CGC6100SBSLAD40	6	SBSLAD4.0	0,070"/1,8 mm	100 cm	-
CGC6100SBSLAD40SH	6	SBSLAD4.0	0,070"/1,8 mm	100 cm	2
CGC6100SBSLAD45	6	SBSLAD4.5	0,070"/1,8 mm	100 cm	-
CGC6100SBSLAD45SH	6	SBSLAD4.5	0,070"/1,8 mm	100 cm	2
CGC7100SBSLAD30	7	SBSLAD3.0	0,078"/2,0 mm	100 cm	-
CGC7100SBSLAD30SH	7	SBSLAD3.0	0,078"/2,0 mm	100 cm	2
CGC7100SBSLAD35	7	SBSLAD3.5	0,078"/2,0 mm	100 cm	-
CGC7100SBSLAD35SH	7	SBSLAD3.5	0,078"/2,0 mm	100 cm	2
CGC7100SBSLAD40	7	SBSLAD4.0	0,078"/2,0 mm	100 cm	-
CGC7100SBSLAD40SH	7	SBSLAD4.0	0,078"/2,0 mm	100 cm	2
CGC7100SBSLAD45	7	SBSLAD4.5	0,078"/2,0 mm	100 cm	-
CGC7100SBSLAD45SH	7	SBSLAD4.5	0,078"/2,0 mm	100 cm	2
CGC8100SBSLAD30	8	SBSLAD3.0	0,088"/2,2 mm	100 cm	-
CGC8100SBSLAD30SH	8	SBSLAD3.0	0,088"/2,2 mm	100 cm	2
CGC8100SBSLAD35	8	SBSLAD3.5	0,088"/2,2 mm	100 cm	-
CGC8100SBSLAD35SH	8	SBSLAD3.5	0,088"/2,2 mm	100 cm	2
CGC8100SBSLAD40	8	SBSLAD4.0	0,088"/2,2 mm	100 cm	-
CGC8100SBSLAD40SH	8	SBSLAD4.0	0,088"/2,2 mm	100 cm	2
CGC8100SBSLAD45	8	SBSLAD4.5	0,088"/2,2 mm	100 cm	-
CGC8100SBSLAD45SH	8	SBSLAD4.5	0,088"/2,2 mm	100 cm	2

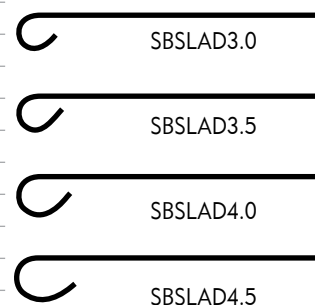

TERAPÉUTICA

CATÉTERES GUÍA CONCIERGE® DE TIPO SBS ARTERIA CORONARIA DERECHA




Número de referencia	Tamaño en French	Descripción	Diámetro interno	Longitud	Número de orificios laterales
CGC5100SBSRCA	5	SBSRCA	0,057"/1,4 mm	100 cm	-
CGC5100SBSRCASH	5	SBSRCA	0,057"/1,4 mm	100 cm	2
CGC6100SBSRCA	6	SBSRCA	0,070"/1,8 mm	100 cm	-
CGC6100SBSRCASH	6	SBSRCA	0,070"/1,8 mm	100 cm	2
CGC7100SBSRCA	7	SBSRCA	0,078"/2,0 mm	100 cm	-
CGC7100SBSRCASH	7	SBSRCA	0,078"/2,0 mm	100 cm	2
CGC8100SBSRCA	8	SBSRCA	0,088"/2,2 mm	100 cm	-
CGC8100SBSRCASH	8	SBSRCA	0,088"/2,2 mm	100 cm	2

SH = (orificio lateral)


CATÉTERES GUÍA CONCIERGE® DE TIPO AMPLATZ DERECHO

Número de referencia	Tamaño en French	Descripción	Diámetro interno	Longitud	Número de orificios laterales
AMPLATZ DERECHO 1					
CGC5100AR1	5	AR1	0,057"/1,4 mm	100 cm	-
CGC5100AR1SH	5	AR1	0,057"/1,4 mm	100 cm	2
CGC6100AR1	6	AR1	0,070"/1,8 mm	100 cm	-
CGC6100AR1SH	6	AR1	0,070"/1,8 mm	100 cm	2
CGC7100AR1	7	AR1	0,078"/2,0 mm	100 cm	-
CGC7100AR1SH	7	AR1	0,078"/2,0 mm	100 cm	2
CGC8100AR1	8	AR1	0,088"/2,2 mm	100 cm	-
CGC8100AR1SH	8	AR1	0,088"/2,2 mm	100 cm	2

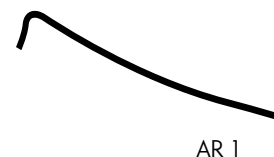


AR 1

AMPLATZ DERECHO 2					
CGC5100AR2	5	AR2	0,057"/1,4 mm	100 cm	-
CGC5100AR2SH	5	AR2	0,057"/1,4 mm	100 cm	2
CGC6100AR2	6	AR2	0,070"/1,8 mm	100 cm	-
CGC6100AR2SH	6	AR2	0,070"/1,8 mm	100 cm	2
CGC7100AR2	7	AR2	0,078"/2,0 mm	100 cm	-
CGC7100AR2SH	7	AR2	0,078"/2,0 mm	100 cm	2
CGC8100AR2	8	AR2	0,088"/2,2 mm	100 cm	-
CGC8100AR2SH	8	AR2	0,088"/2,2 mm	100 cm	2

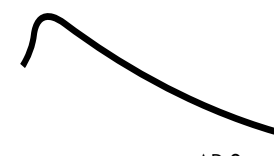

AR 2

AMPLATZ DERECHO 3					
CGC5100AR3	5	AR3	0,057"/1,4 mm	100 cm	-
CGC6100AR3	6	AR3	0,070"/1,8 mm	100 cm	-
CGC7100AR3	7	AR3	0,078"/2,0 mm	100 cm	-
CGC8100AR3	8	AR3	0,088"/2,2 mm	100 cm	-

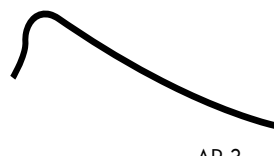

AR 3


CATÉTERES GUÍA CONCIERGE® DE TIPO AMPLATZ IZQUIERDO

Número de referencia	Tamaño en French	Descripción	Diámetro interno	Longitud	Número de orificios laterales
AMPLATZ IZQUIERDO .75					
CGC5100AL75	5	AL.75	0,057"/1,4 mm	100 cm	-
CGC5100AL75SH	5	AL.75	0,057"/1,4 mm	100 cm	2
CGC6100AL75	6	AL.75	0,070"/1,8 mm	100 cm	-
CGC6100AL75SH	6	AL.75	0,070"/1,8 mm	100 cm	2
CGC7100AL75	7	AL.75	0,078"/2,0 mm	100 cm	-
CGC7100AL75SH	7	AL.75	0,078"/2,0 mm	100 cm	2
CGC8100AL75	8	AL.75	0,088"/2,2 mm	100 cm	-
CGC8100AL75SH	8	AL.75	0,088"/2,2 mm	100 cm	2



AL.75

AMPLATZ IZQUIERDO 1					
CGC5100AL1	5	AL1	0,057"/1,4 mm	100 cm	-
CGC5100AL1SH	5	AL1	0,057"/1,4 mm	100 cm	2
CGC6100AL1	6	AL1	0,070"/1,8 mm	100 cm	-
CGC6100AL1SH	6	AL1	0,070"/1,8 mm	100 cm	2
CGC7100AL1	7	AL1	0,078"/2,0 mm	100 cm	-
CGC7100AL1SH	7	AL1	0,078"/2,0 mm	100 cm	2
CGC8100AL1	8	AL1	0,088"/2,2 mm	100 cm	-
CGC8100AL1SH	8	AL1	0,088"/2,2 mm	100 cm	2

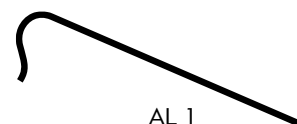

AL 1

SH = (orificio lateral)

CONTINÚA

CATÉTERES GUÍA CONCIERGE® DE TIPO AMPLATZ IZQUIERDO


Número de referencia	Tamaño en French	Descripción	Diámetro interno	Longitud	Número de orificios laterales
AMPLATZ IZQUIERDO 2					
CGC5100AL2	5	AL2	0,057"/1,4 mm	100 cm	-
CGC5100AL2SH	5	AL2	0,057"/1,4 mm	100 cm	2
CGC6100AL2	6	AL2	0,070"/1,8 mm	100 cm	-
CGC6100AL2SH	6	AL2	0,070"/1,8 mm	100 cm	2
CGC7100AL2	7	AL2	0,078"/2,0 mm	100 cm	-
CGC7100AL2SH	7	AL2	0,078"/2,0 mm	100 cm	2
CGC8100AL2	8	AL2	0,088"/2,2 mm	100 cm	-
CGC8100AL2SH	8	AL2	0,088"/2,2 mm	100 cm	2



AL 2

AMPLATZ IZQUIERDO 3

CGC5100AL3	5	AL3	0,057"/1,4 mm	100 cm	-
CGC6100AL3	6	AL3	0,070"/1,8 mm	100 cm	-
CGC7100AL3	7	AL3	0,078"/2,0 mm	100 cm	-
CGC8100AL3	8	AL3	0,088"/2,2 mm	100 cm	-

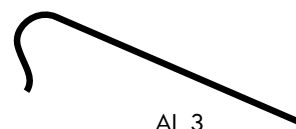

AL 3

CATÉTERES GUÍA CONCIERGE® DE TIPO MULTIUSOS 1

Número de referencia	Tamaño en French	Descripción	Diámetro interno	Longitud	Número de orificios laterales
CGC5100MP1	5	MP	0,057"/1,4 mm	100 cm	-
CGC5100MP1SH	5	MP	0,057"/1,4 mm	100 cm	2
CGC6100MP1	6	MP	0,070"/1,8 mm	100 cm	-
CGC6100MP1SH	6	MP	0,070"/1,8 mm	100 cm	2
CGC7100MP1	7	MP	0,078"/2,0 mm	100 cm	-
CGC7100MP1SH	7	MP	0,078"/2,0 mm	100 cm	2
CGC8100MP1	8	MP	0,088"/2,2 mm	100 cm	-
CGC8100MP1SH	8	MP	0,088"/2,2 mm	100 cm	2



MP

CATÉTERES GUÍA CONCIERGE® PARA BYPASS CORONARIO IZQUIERDO

Número de referencia	Tamaño en French	Descripción	Diámetro interno	Longitud	Número de orificios laterales
CGC5100LCB	5	LCB	0,057"/1,4 mm	100 cm	-
CGC5100LCBSH	5	LCB	0,057"/1,4 mm	100 cm	2
CGC6100LCB	6	LCB	0,070"/1,8 mm	100 cm	-
CGC6100LCBSH	6	LCB	0,070"/1,8 mm	100 cm	2
CGC7100LCB	7	LCB	0,078"/2,0 mm	100 cm	-
CGC7100LCBSH	7	LCB	0,078"/2,0 mm	100 cm	2
CGC8100LCB	8	LCB	0,088"/2,2 mm	100 cm	-
CGC8100LCBSH	8	LCB	0,088"/2,2 mm	100 cm	2



LCB

SH = (orificio lateral)

CATÉTERES GUÍA CONCIERGE® PARA BYPASS CORONARIO DERECHO

Número de referencia	Tamaño en French	Descripción	Diámetro interno	Longitud	Número de orificios laterales
CGC5100RCB	5	RCB	0,057"/1,4 mm	100 cm	-
CGC5100RCBSH	5	RCB	0,057"/1,4 mm	100 cm	2
CGC6100RCB	6	RCB	0,070"/1,8 mm	100 cm	-
CGC6100RCBSH	6	RCB	0,070"/1,8 mm	100 cm	2
CGC7100RCB	7	RCB	0,078"/2,0 mm	100 cm	-
CGC7100RCBSH	7	RCB	0,078"/2,0 mm	100 cm	2
CGC8100RCB	8	RCB	0,088"/2,2 mm	100 cm	-
CGC8100RCBSH	8	RCB	0,088"/2,2 mm	100 cm	2



RCB

CATÉTERES GUÍA CONCIERGE® DE MAMARIA INTERNA


Número de referencia	Tamaño en French	Descripción	Diámetro interno	Longitud	Número de orificios laterales
CGC5100IM	5	IM	0,057"/1,4 mm	100 cm	-
CGC5100IMSH	5	IM	0,057"/1,4 mm	100 cm	2
CGC6100IM	6	IM	0,070"/1,8 mm	100 cm	-
CGC6100IMSH	6	IM	0,070"/1,8 mm	100 cm	2
CGC7100IM	7	IM	0,078"/2,0 mm	100 cm	-
CGC7100IMSH	7	IM	0,078"/2,0 mm	100 cm	2
CGC8100IM	8	IM	0,088"/2,2 mm	100 cm	-
CGC8100IMSH	8	IM	0,088"/2,2 mm	100 cm	2



IM

CATÉTERES GUÍA CONCIERGE® DE TIPO EL GAMAL

Número de referencia	Tamaño en French	Descripción	Diámetro interno	Longitud	Número de orificios laterales
CGC5100EG	5	EG	0,057"/1,4 mm	100 cm	-
CGC6100EG	6	EG	0,070"/1,8 mm	100 cm	-
CGC7100EG	7	EG	0,078"/2,0 mm	100 cm	-
CGC8100EG	8	EG	0,088"/2,2 mm	100 cm	-

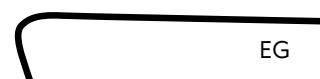

EG

CATÉTERES GUÍA CONCIERGE® DE TIPO HOCKEY STICK

Número de referencia	Tamaño en French	Descripción	Diámetro interno	Longitud	Número de orificios laterales
CGC5100HS	5	HS	0,057"/1,4 mm	100 cm	-
CGC5100HSSH	5	HS	0,057"/1,4 mm	100 cm	2
CGC6100HS	6	HS	0,070"/1,8 mm	100 cm	-
CGC6100HSSH	6	HS	0,070"/1,8 mm	100 cm	2
CGC7100HS	7	HS	0,078"/2,0 mm	100 cm	-
CGC7100HSSH	7	HS	0,078"/2,0 mm	100 cm	2
CGC8100HS	8	HS	0,088"/2,2 mm	100 cm	-
CGC8100HSSH	8	HS	0,088"/2,2 mm	100 cm	2



HS

SH = (orificio lateral)

CATÉTERES GUÍA CONCIERGE ULTIMATE™

Número de referencia	Tamaño en French	Descripción	Diámetro interno	Longitud	Número de orificios laterales
ULTIMATE 1					
CGC5100ULT1	5	ULT1	0,057"/1,4 mm	100 cm	-
CGC6100ULT1	6	ULT1	0,070"/1,8 mm	100 cm	-
CGC7100ULT1	7	ULT1	0,078"/2,0 mm	100 cm	-
ULTIMATE 2					
CGC5100ULT2	5	ULT2	0,057"/1,4 mm	100 cm	-
CGC6100ULT2	6	ULT2	0,070"/1,8 mm	100 cm	-
CGC7100ULT2	7	ULT2	0,078"/2,0 mm	100 cm	-
ULTIMATE 3					
CGC5100ULT3	5	ULT3	0,057"/1,4 mm	100 cm	-
CGC6100ULT3	6	ULT3	0,070"/1,8 mm	100 cm	-
CGC7100ULT3	7	ULT3	0,078"/2,0 mm	100 cm	-
ULTIMATE 4-T40					
CGC5100ULT4-T40	5	ULT4	0,057"/1,4 mm	100 cm	-
CGC6100ULT4-T40	6	ULT4	0,070"/1,8 mm	100 cm	-
CGC7100ULT4-T40	7	ULT4	0,078"/2,0 mm	100 cm	-
ULTIMATE 4-T45					
CGC5100ULT4-T45	5	ULT4	0,057"/1,4 mm	100 cm	-
CGC6100ULT4-T45	6	ULT4	0,070"/1,8 mm	100 cm	-
CGC7100ULT4-T45	7	ULT4	0,078"/2,0 mm	100 cm	-



ULT 1



ULT 2



ULT 3



ULT 40
ULT 4-T40



ULT 40
ULT 4-T45



TERAPÉUTICA

VÁLVULAS Y ACCESORIOS HEMOSTÁTICOS

Merit Medical ha desarrollado una línea completa de válvulas y accesorios hemostáticos sofisticados desde el punto de vista técnico y reconocidos en el mundo clínico para reducir al mínimo la pérdida de sangre y optimizar el control de los dispositivos de intervención. Se vende por unidades.

Empaquetadas en cajas de 25 unidades, 4 cajas por estuche.



Válvula hemostática Honor®

Válvula hemostática de gran calibre AccessPLUS™

Herramienta de inserción de guía de metal o plástico

Dispositivo de torque 0,009" - 0,018"

Válvula hemostática PhD™

Dispositivo de torque TORQ™ H2O de 0,010" a 0,020"

Dispositivo de torque SEADRAGON™ de 0,18" a 0,38"

Número de referencia

Descripción

MAP150	Válvula hemostática de gran calibre AccessPLUS
MAP300	Válvula hemostática Honor
MAP301	Válvula hemostática Honor con herramienta de inserción de guía de metal
MAP500	Dispositivo de torque (rosa fluorescente)
MAP501	Dispositivo de torque (verde fluorescente)
MAP550	Herramienta de inserción de guía de metal
MAP600	Herramienta de inserción de guía de plástico
MAP800	Válvula hemostática PhD
TD200	Dispositivo de torque Torq H2O, amarillo
TD500	Dispositivo de torque de guía SeaDragon

Nota: Las válvulas hemostáticas también están disponibles con extensiones de tubos previa solicitud expresa.

Para pedidos personalizados, prevea un plazo de entrega de unas seis semanas.



MAP800

La válvula hemostática PhD de Merit Medical, que se puede utilizar con facilidad con una sola mano, presenta una válvula tipo Tuohy convencional y una válvula de pulsar y soltar para impedir el reflujo sanguíneo.

PAQUETES DE ANGIOPLASTIA DE MERIT - MAP™

Los paquetes de angioplastia de Merit incluyen una válvula hemostática, la herramienta de inserción que usted elija y un dispositivo de torque. Empaquetados en cajas de 25 unidades, 4 cajas por estuche.

Número de referencia	Descripción
MAP151	Válvula hemostática de gran calibre AccessPLUS™ con herramienta de inserción de guía de metal
MAP152	Válvula hemostática de gran calibre AccessPLUS con herramienta de inserción de guía de metal y dispositivo de torque
MAP152SD	Válvula hemostática de gran calibre AccessPLUS con herramienta de inserción de metal y dispositivo de torque SeaDragon
MAP153	Válvula hemostática de gran calibre AccessPLUS con herramienta de inserción de guía de plástico
MAP154	Válvula hemostática de gran calibre AccessPLUS con herramienta de inserción de guía de plástico y dispositivo de torque
MAP302	Válvula hemostática Honor® con herramienta de inserción de guía de metal y dispositivo de torque
MAP350	Válvula hemostática Honor con tubo de 20 cm y llave de paso
MAP351	Válvula hemostática Honor con herramienta de inserción de guía de metal, tubo de 20 cm y llave de paso
MAP352	Válvula hemostática Honor con herramienta de inserción de guía de metal, tubo de 20 cm, llave de paso y dispositivo de torque
MAP353	Válvula hemostática Honor con tubo de 50 cm, herramienta de inserción de guía de metal y dispositivo de torque
MAP354	Válvula hemostática Honor con tubo de 50 cm, herramienta de inserción de guía de plástico y dispositivo de torque
MAP360	Válvula hemostática Honor con tubo flexible y llave de paso
MAP362	Válvula hemostática Honor con tubo flexible y llave de paso, guía
MAP801	Válvula hemostática PhD™, pequeño calibre con resorte, herramienta de inserción de metal, estéril
MAP802	Válvula hemostática PhD, pequeño calibre con resorte, herramienta de inserción de metal, dispositivo de torque
MAP803	Válvula hemostática PhD, pequeño calibre con resorte, herramienta de inserción de plástico
MAP804	Válvula hemostática PhD, pequeño calibre con resorte, herramienta de inserción de plástico, dispositivo de torque
MAP805	Válvula hemostática PhD, pequeño calibre con resorte, tubo de 10" (25,4 cm) 500 psi, herramienta de inserción de metal, dispositivo de torque

Nota: Las válvulas hemostáticas también están disponibles, previa solicitud expresa, con extensiones de tubos. Para pedidos personalizados, prevea un plazo de entrega de unas seis semanas.

MAP805 no lleva el marcado CE.




MAP352

KITS DE DISPOSITIVOS DE INFLADO BASIXCOMPAK™

El BasixCOMPAK es un dispositivo de inflado analógico de 30 atm que integra un manómetro en ángulo para una mejor visualización de las lecturas de presión y un dial luminiscente para intervenciones con poca luz. El espacio de seguridad de 5 mL ha sido diseñado para reducir al mínimo las burbujas de aire que se introducen en el balón.

CADA KIT INCLUYE:

- Dispositivo de inflado BasixCOMPAK
- Tubo de extensión de 13" (33 cm)
- Llave de paso de 3 vías
- MAP (paquete de angioplastia de Merit, con válvula hemostática, herramienta de inserción para guía de metal y dispositivo de torque)

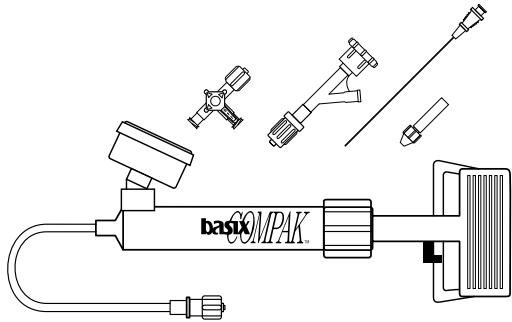

Número de referencia	Descripción
IN4530	con válvula hemostática AccessPLUS™, herramienta de inserción de guía de metal y dispositivo de torque
IN4330	con válvula hemostática Honor®, herramienta de inserción de metal y dispositivo de torque
IN4352	con válvula hemostática Honor, herramienta de inserción de guía de metal, tubo de 20 cm, llave de paso y dispositivo de torque
IN4802	con válvula hemostática PhD™, pequeño calibre con resorte, herramienta de inserción de metal y dispositivo de torque

KIT DE JERINGAS DE INFLADO BASIXCOMPAK

CADA KIT INCLUYE:

- Dispositivo de inflado BasixCOMPAK
- Tubo de extensión de 13" (33 cm)
- Llave de paso de 3 vías

Número de referencia	Descripción
K05-02286	con herramienta de inserción de guía de metal, dispositivo de torque
K05-00807A	con jeringas Medallion® NITRO de 10 mL rojas y HEPARIN de 10 mL amarillas
K05-01840	con MAP (paquete de angioplastia de Merit) que incluye una válvula hemostática AccessPlus, una herramienta de inserción de guía de metal, un dispositivo de torque y una jeringa de lavado RXP®
K05-00812	con jeringa de vacío VacLok® de 20 mL
K05-00808	con jeringa Medallion NITRO de 10 mL roja

Empaquetados en cajas de 5 kits, 4 cajas por estuche.



KITS DE DISPOSITIVOS DE INFLADO BASIXTOUCH™

El dispositivo de inflado BasixTOUCH™ es un dispositivo innovador con una manija ergonómica que permite realizar la preparación y el cebado con una sola mano, con una capacidad de presión de 35 atm y una capacidad para 30 mL de líquidos. Integra una manija de apertura rápida para facilitar la liberación, incluso en inflados de alta presión, que acorta el tiempo de desinflado. Alcanza altas presiones con rapidez, con menos de tres giros de la manija. Está disponible con una llave de paso de alta presión.

Número de referencia

Descripción

IN8100	independiente, sin llave de paso
IN8152	con MAP152, válvula hemostática AccessPLUS™
IN8302	con MAP302, válvula hemostática Honor®
IN8352	con MAP352, válvula hemostática Honor
IN8353	con MAP353, válvula hemostática Honor
IN8802	con MAP802, válvula hemostática PhD™

Empaquetados en cajas de 5 unidades, 2 cajas por estuche.

KIT DE DISPOSITIVOS DE INFLADO BASIXTOUCH

EL KIT INCLUYE:

- Dispositivo de inflado BasixTOUCH
- Tubo de extensión de 13" (33 cm)
- Llave de paso de 3 vías
- MAP (paquete de angioplastia de Merit, con válvula hemostática de gran calibre, herramienta de inserción para guía de metal y dispositivo de torque)




KIT DE JERINGAS DE INFLADO BASIXTOUCH

Dispositivo de inflado analógico de 35 atm con manómetro en ángulo, un tubo de extensión de 13" (33 cm), una herramienta de inserción de guía de metal, un dispositivo de torque y una llave de paso de 3 vías.

Empaquetados en cajas de 5 unidades, 2 cajas por estuche.

Número de referencia K05-02680

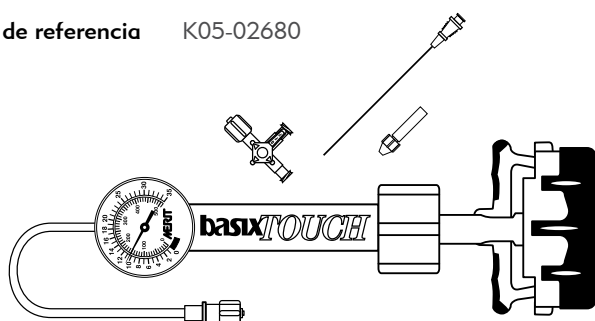

DISPOSITIVO DE INFLADO BLUE DIAMOND™

El dispositivo de inflado Blue Diamond de 30 atm combina la precisión de un dispositivo digital con la sencillez de los sistemas analógicos. Entre sus características se incluye una funcionalidad con un solo botón, que aporta sencillez, una pantalla grande con dígitos de gran tamaño para mejorar la visibilidad y una marca del último inflado para recordar la presión más alta del inflado anterior. Incluye un tubo de extensión de 13" (33 cm) y una llave de paso de 3 vías. Empaquetados en cajas de 5 unidades, 4 cajas por estuche.

Número de referencia IN7130




KIT DE DISPOSITIVOS DE INFLADO BLUE DIAMOND

CADA KIT INCLUYE:

- Dispositivo de inflado Blue Diamond
- Tubo de extensión de 13" (33 cm)
- Llave de paso de 3 vías
- MAP (paquete de angioplastia de Merit, con válvula hemostática de gran calibre, herramienta de inserción para guía de metal y dispositivo de torque)



Empaquetados en cajas de 5 kits, 4 cajas por estuche.

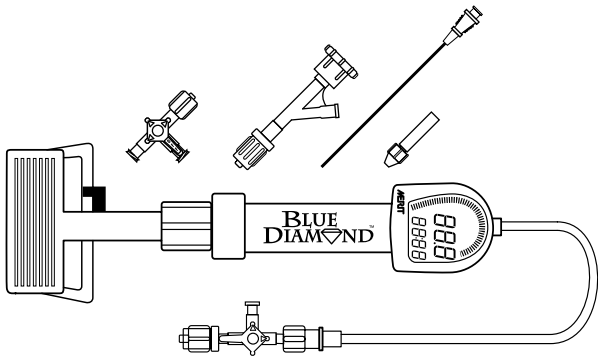

Número de referencia	Descripción
IN7152	con válvula hemostática AccessPLUS™
IN7352	con válvula hemostática Honor®

SISTEMA DE POSICIONAMIENTO DE STENTS OSTIAL PRO®

El sistema Ostial PRO es un sistema de guía desechable de nivel médico diseñado para lograr una implantación uniforme y precisa de stents en lesiones aortoostiales durante procedimientos de intervención coronarios o periféricos. Consiste en un eje de guía flexible que puede colocarse con facilidad y precisión en la ubicación aortoostial deseada. Los «pies» expandibles de bajo perfil, atraumáticos y radiopacos situados en la punta distal del sistema de guía facilitan la colocación precisa del stent en la lesión aortoostial.

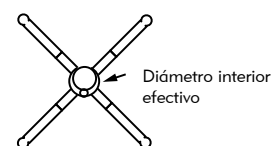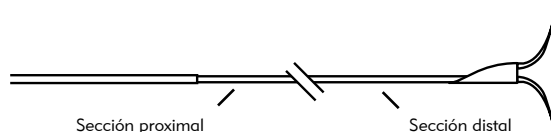

Número de referencia 3011

Empaquetados en cajas de 1 unidades, 5 cajas por estuche.

DIÁMETROS Y LONGITUDES DE GUÍA:

Sección de la guía	Diámetro de la guía	Longitud de la sección
Total	-	127 cm
Sección distal	0,014" (0,35 mm)	4 cm
Sección proximal	0,018" (0,46 mm)	122 cm

DIÁMETRO INTERIOR EFECTIVO EN LOS CATÉTERES GUÍA:

Tamaño del catéter	Diámetro interior estimado del catéter	Diámetro interior efectivo
6 F	0,070" (1,8 mm)	0,050" (1,3 mm)
7 F	0,078" (2,0 mm)	0,058" (1,5 mm)
8 F	0,088" (2,2 mm)	0,068" (1,7 mm)



Ostial PRO es una herramienta de alineación con «pies» con recubrimiento de oro que contacta con la pared aórtica y facilita la evaluación del ostium coronario o renal, lo que mejora la precisión en la colocación de stents en lesiones aortoostiales.

LOS PIES DE NITINOL RECUBIERTOS DE ORO permiten una mayor visualización para ayudar a identificar el plano del ostium

LA LONGITUD DE LAS PATAS DE 15 MM se acomoda al ostium


CILINDRO FLEXIBLE
La abertura longitudinal permite el uso de catéteres de 6, 7 y 8 F

GUÍA DISTAL FLEXIBLE

La parte distal de 4 cm de la guía tiene un tamaño de 0,014" y está tratada con calor para lograr una mayor flexibilidad y evitar el enderezamiento de la curva del catéter guía y al mismo tiempo mantener sus características de empuje/tracción

LA FORMA CÓNICA DEL CILINDRO permite un repliegue fácil en el catéter guía

LA LONGITUD TOTAL DE 127 CM permite el uso con cualquier guía que tenga una longitud ≤ 100 cm

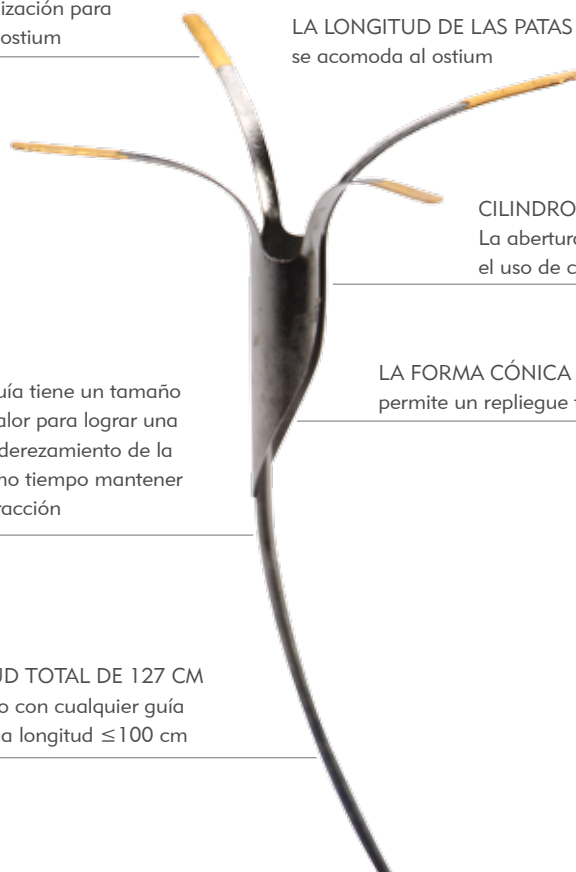

HEMOSTASIA



DISPOSITIVOS DE COMPRESIÓN

Dispositivo para compresión asistida SafeGuard®	83
Dispositivo de compresión Safeguard Radial™	83
Dispositivo de compresión radial Finale®	84
Sistema de compresión de arteria radial RADstat®	84

DISPOSITIVO PARA COMPRESIÓN ASISTIDA SAFEGUARD®

El dispositivo para compresión asistida SafeGuard proporciona una compresión pasiva y permite el ajuste inmediato de la presión. Igualmente, mantiene una presión constante en el sitio cuando se obtiene una hemostasia con compresión manual y durante la recuperación, el posicionamiento y el transporte del paciente. El dispositivo para compresión asistida SafeGuard reduce la carga de trabajo del personal clínico, permite aprovechar al máximo los valiosos recursos, a la vez que aumenta la comodidad del paciente.



Número de referencia	Tamaño	Descripción
82000	24 cm	Dispositivo para compresión asistida SafeGuard
82050	12 cm	Dispositivo para compresión asistida SafeGuard
0684-00-0504	24 cm	Dispositivo para compresión asistida SafeGuard (solo en Japón)

Empaquetados en cajas de 10 unidades.

DISPOSITIVO DE COMPRESIÓN SAFEGUARD RADIAL™

El dispositivo de compresión Safeguard Radial es una muñequera autoadhesiva de 26 cm de longitud que ofrece una compresión focalizada y contribuye a conseguir una hemostasis sin oclusión al finalizar la intervención radial. Este dispositivo, que posee un diseño de perfil bajo y no está fabricado de látex de caucho natural, se presenta en paquetes individuales.

Número de referencia	Descripción	Cantidad
SGR26	SAFEGUARD Radial	10 por caja

Longitud de la muñequera = 26 cm



DISPOSITIVO DE COMPRESIÓN RADIAL FINALE®

El dispositivo de compresión radial Finale ofrece una compresión directa con un solo giro de un dial. El dispositivo, que posee una banda disponible en dos longitudes, se presenta en paquetes individuales.

Número de referencia	Descripción	Cantidad
FCD100	Longitud estándar; 10" (25,4 cm)	10 por caja
FCD200	Longitud larga; 12" (30,5 cm)	10 por caja



SISTEMA DE COMPRESIÓN DE ARTERIA RADIAL RADSTAT®

El sistema de compresión de la arteria radial RADstat ofrece una hemostasia controlada, comodidad y seguridad para el paciente, combinando una cómoda inmovilización de la muñeca y una práctica presión directa ajustable en el sitio de acceso.

EL SISTEMA DE COMPRESIÓN INCLUYE:

- Base de apoyo (no estéril)
- Disco de compresión cuadrado (estéril)
- Disco de compresión alargado (estéril)



RADSTD
Base de apoyo estándar



RADSRT
Base de apoyo corta



RADCDS
Disco de compresión cuadrado



RADCDO
Disco de compresión alargado

Número de referencia	Descripción	Cantidad
RADSRT	Base de apoyo corta	20 por estuche
RADSTD	Base de apoyo estándar	20 por estuche
RADCDS	Disco de compresión, cuadrado 7/8" (22,2 mm) x 7/8" (22,2 mm), estéril	50 por caja
RADCDO	Disco de compresión, alargado 7/8" (22,2 mm) x 1/2" (12,7 mm), estéril	50 por caja

ELECTROFISIOLOGÍA Y GESTIÓN DEL RITMO CARDÍACO

ELECTROFISIOLOGÍA

Introductores transeptales de curva fija HeartSpan®	87
Agujas transeptales HeartSpan	88
Introductores dirigibles 8,5 F HeartSpan	88

GESTIÓN DEL RITMO CARDÍACO

Introductores pelables Prelude SNAP™	90
Introductores hemostáticos pelables Classic Sheath™	91

Sistema Worley™ avanzado de administración LV	92-93
Catéteres para seno coronario Worley (CSG)	92
Introductores de vena lateral Worley (LVI)	92
Selectores de venas Worley	93
Equipos avanzados de administración de medio de contraste Worley	93

INTRODUCTORES TRANSEPTALES DE CURVA FIJA HEARTSPAN®


El introductor transeptal de curva fija HeartSpan tiene un eje mallado de acero que ofrece una excelente capacidad de torque. El dilatador cónico y la punta atraumática blanda están diseñados para mejorar la capacidad de atravesar los tejidos. El marcador de platino incorporado ayuda a conseguir una colocación adecuada gracias a su radiopacidad. El introductor está diseñado para utilizarse conjuntamente con la aguja transeptal HeartSpan.

EL KIT DEL INTRODUTOR INCLUYE:

- Introductor transeptal mallado
- Dilatador
- Guía con extremo en J

Número de referencia	Diámetro interior del introductor	Longitud	Ángulo de la curva
FCL-160-00	8,5 F	60 cm	15°
FCL-160-01	8,5 F	60 cm	30°
FCL-160-02	8,5 F	60 cm	55°
FCL-160-03	8,5 F	60 cm	120°
FCL-160-04	8,5 F	60 cm	120°
FCL-160-05	8,5 F	60 cm	150°
FCL-160-06	8,5 F	79,4 cm	15°
FCL-160-07	8,5 F	79,4 cm	55°
FCL-160-08	8,5 F	79,4 cm	90°
FCL-160-09	8,5 F	79,4 cm	120°
FCL-160-10	8,5 F	101,5 cm	55°

Empaquetadas en cajas de 5 unidades.

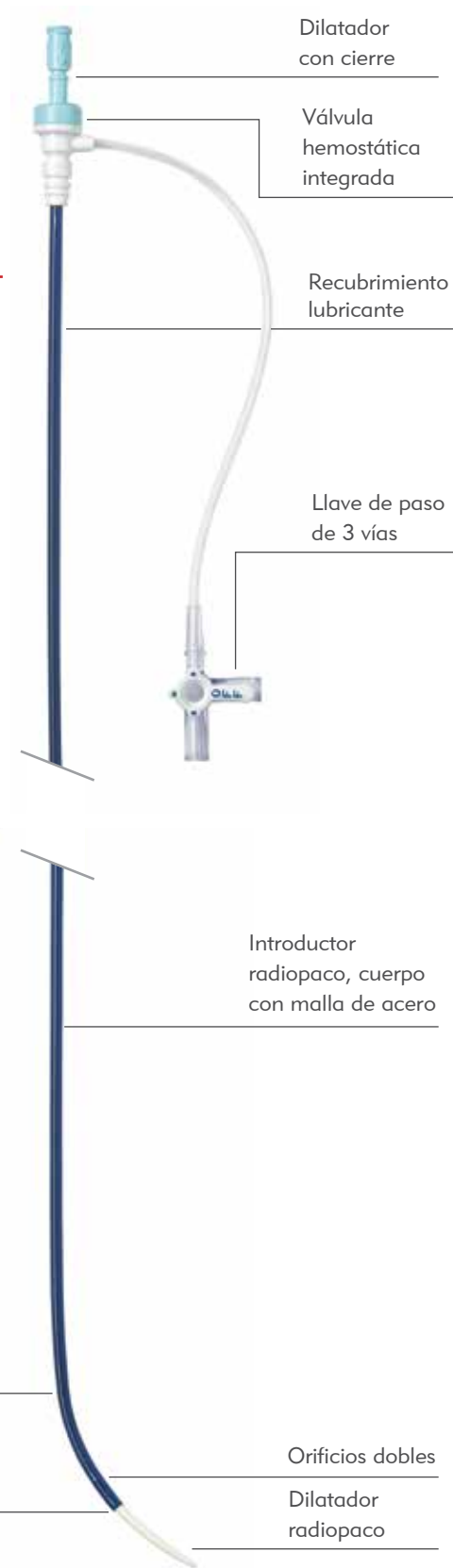

AGUJAS TRANSEPTALES HEARTSPAN®



La aguja transeptal HeartSpan presenta una sensibilidad excepcional y una mayor rigidez. La manija ergonómica se ajusta al contorno de la mano para lograr un control y un desplazamiento ágiles. La aguja HeartSpan está diseñada para utilizarse conjuntamente con el introductor transeptal HeartSpan.

EL KIT DE LA AGUJA INCLUYE:

- Aguja transeptal HeartSpan
- Estilete

Número de referencia	Calibre	Longitud	Ángulo de la curva
FND-019-00	19 G	56 cm	50°
FND-019-01	18 G	71 cm	50°
FND-019-02	18 G	71 cm	86°
FND-019-03	18 G	89 cm	50°
FND-019-04	18 G	89 cm	86°
FND-019-05	18 G	98 cm	50°
FND-019-06	18 G	98 cm	86°

Empaquetadas en cajas de 5 unidades.

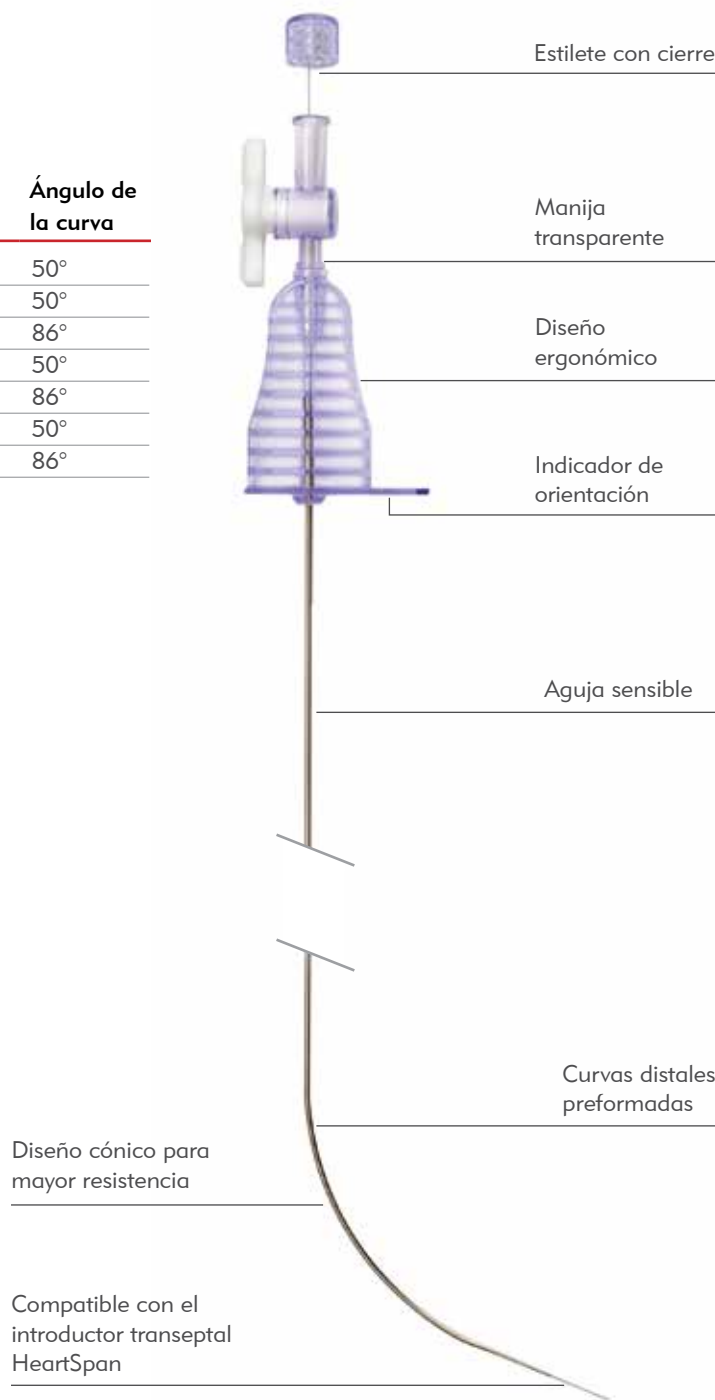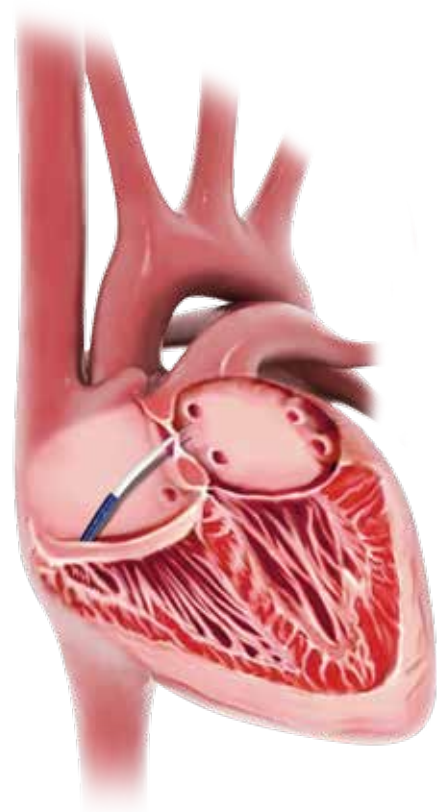

INTRODUCTORES DIRIGIBLES DE 8,5 F HEARTSPAN®

El introductor dirigible HeartSpan está diseñado para ofrecer una punta más blanda y flexible, con el fin de reducir el riesgo de perforación de la pared auricular.


La estructura mallada le proporciona resistencia al acodamiento y solidez a su curva durante intervenciones de fibrilación auricular. El introductor está diseñado para proporcionar un control cómodo y ergonómico y una deflexión más precisa a la hora de desplazarse a través de las cavidades cardíacas durante intervenciones de electrofisiología. El introductor dirigible está concebido para utilizarse conjuntamente con la aguja transeptal HeartSpan.

EL KIT DEL INTRODUCTOR DIRIGIBLE INCLUYE:

- Introductor dirigible de 8,5 F
- Dilatador
- Guía de 0,032" x 180 cm

Número de referencia	Diámetro interior del introductor	Curva	Ángulo de la curva
FST-085-00	8,5	Pequeña	16,4 mm
FST-085-01	8,5	Media	22,4 mm
FST-085-02	8,5	Grande	36,0 mm

Empaquetados en cajas de 5 unidades.

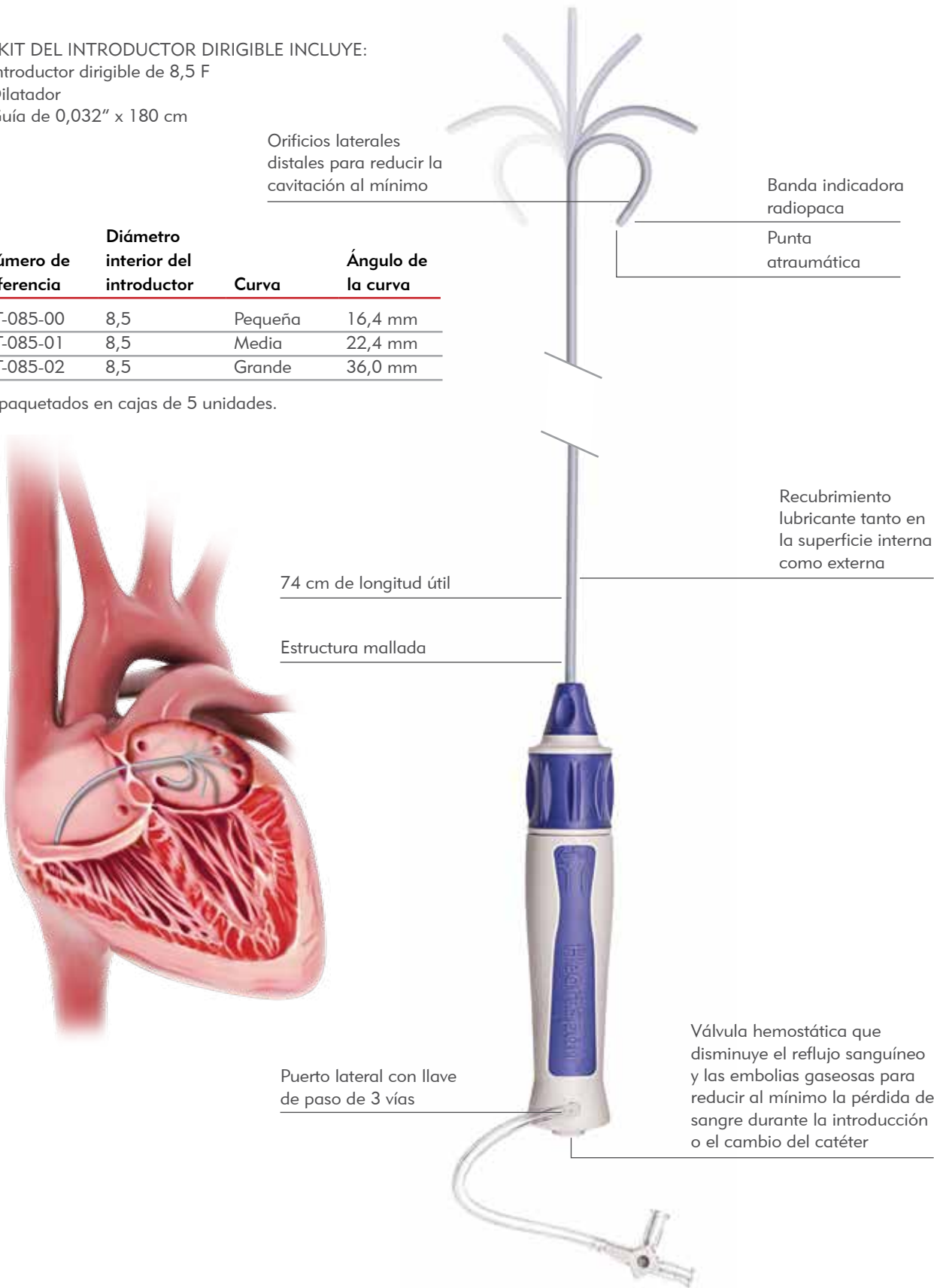

INTRODUCTOR PELABLE PRELUDE SNAP™

El introductor Prelude SNAP de Merit Medical ofrece una transición fluida entre el introductor y el dilatador a fin de reducir el traumatismo vascular y facilitar el desplazamiento por una anatomía tortuosa. Asimismo, el introductor Prelude SNAP es más fácil de romper, puesto que necesita un 66 % menos de fuerza de rotura que su predecesor*, lo cual facilita su extracción y contribuye a garantizar que los electrodos permanecen en su lugar.

EL KIT DEL INTRODUCTOR PELABLE INCLUYE:

- Introductor pelable
- Dilatador
- Guía de 0,038" x 50 cm o 0,038" x 80 cm
- Aguja Merit Advance® de 18 G x 7 cm
- Jeringa de 12 mL

Número de referencia con orificio lateral	Tamaño en French	Longitud del introductor	Color del conector
PLS-1006	6	13 cm	Verde
PLS-1007	7	13 cm	Naranja
PLS-1008	8	13 cm	Azul
PLS-1008.5	8,5	13 cm	Azul claro
PLS-1009	9	13 cm	Negro
PLS-1009.5	9,5	13 cm	Gris
PLS-1010	10	13 cm	Fucsia
PLS-1010.5	10,5	13 cm	Fucsia claro
PLS-1011	11	13 cm	Amarillo
PLS-1012	12	13 cm	Marrón
PLS-1012.5	12,5	13 cm	Marrón claro
PLS-2506	6	25 cm	Verde
PLS-2507	7	25 cm	Naranja
PLS-2508	8	25 cm	Azul
PLS-2509	9	25 cm	Negro
PLS-2510	10	25 cm	Fucsia
PLS-2510.5	10,5	25 cm	Fucsia claro
PLS-2511	11	25 cm	Amarillo

Número de referencia sin orificio lateral	Tamaño en French	Longitud del introductor	Color del conector
PLSX-1006	6	13 cm	Verde
PLSX-1007	7	13 cm	Naranja
PLSX-1008	8	13 cm	Azul
PLSX-1008.5	8,5	13 cm	Azul claro
PLSX-1009	9	13 cm	Negro
PLSX-1009.5	9,5	13 cm	Gris
PLSX-1010	10	13 cm	Fucsia
PLSX-1010.5	10,5	13 cm	Fucsia claro
PLSX-1011	11	13 cm	Amarillo
PLSX-1012	12	13 cm	Marrón
PLSX-1012.5	12,5	13 cm	Marrón claro
PLSX-2506	6	25 cm	Verde
PLSX-2507	7	25 cm	Naranja
PLSX-2508	8	25 cm	Azul
PLSX-2509	9	25 cm	Negro
PLSX-2510	10	25 cm	Fucsia
PLSX-2510.5	10,5	25 cm	Fucsia claro
PLSX-2511	11	25 cm	Amarillo

Sólido diseño de la válvula

Sellado hermético para proteger contra las embolias gaseosas y la pérdida de sangre

Sujeción mejorada

Las amplias aletas con superficie rugosa y antideslizante facilitan una sujeción más firme y segura



Transición fluida

Transición fluida entre el introductor y el dilatador a fin de reducir el traumatismo vascular y facilitar la introducción.

Mayor facilidad de rotura

Necesita un 66 % menos de fuerza de rotura que su predecesor*.

*Datos en el archivo.

SISTEMA INTRODUTOR HEMOSTÁTICO PELABLE CLASSICSHEATH™


El sistema introductor hemostático pelable ClassicSheath ha sido el estándar de referencia en implantes de electrodos de marcapasos y desfibriladores durante casi 20 años. La línea ClassicSheath brinda una sólida válvula que ayuda a reducir el riesgo de embolia gaseosa y reflujo sanguíneo. El introductor está marcado para lograr un desprendimiento uniforme.

EL KIT DEL SISTEMA CLASSICSHEATH INCLUYE:

- ClassicSheath
- Dilatador
- Guía con extremo en J
- Jeringa
- Aguja de 18 G

Número de referencia	Tamaño en French	De la punta al conector
CLS-1006	6	13 cm
CLS-1007	7	13 cm
CLS-1008	8	13 cm
CLS-1009	9	13 cm
CLS-1009.5	9,5	13 cm
CLS-1010	10	13 cm
CLS-1010.5	10,5	13 cm
CLS-1011	11	13 cm
CLS-1012	12	13 cm
CLS-1012.5	12,5	13 cm
CLS-2506	6	25 cm
CLS-2507	7	25 cm
CLS-2508	8	25 cm
CLS-2509	9	25 cm
CLS-2510	10	25 cm
CLS-2510.5	10,5	25 cm
CLS-2511	11	25 cm

Empaquetados en cajas de 5 unidades.

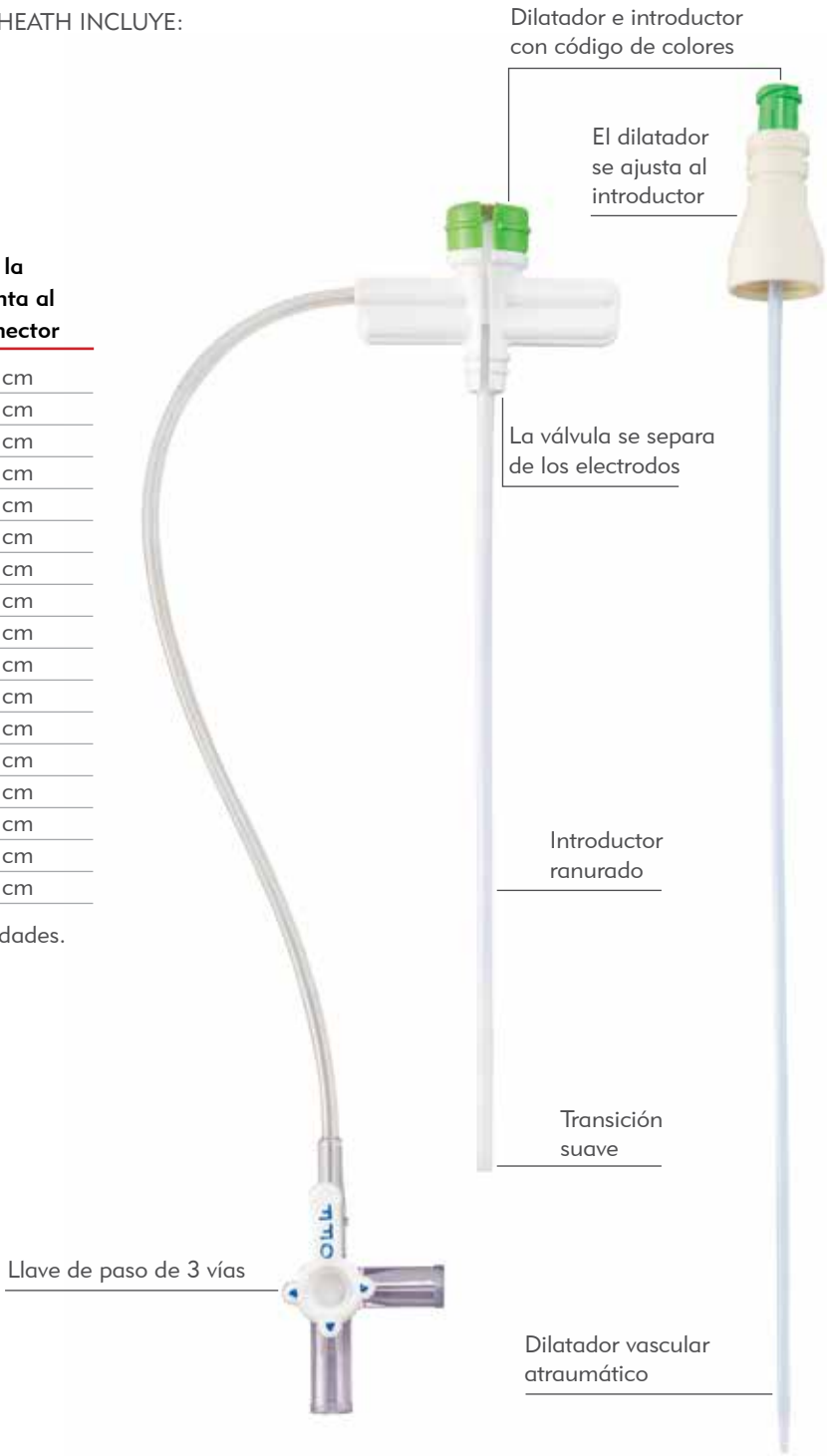

SISTEMA WORLEY™ AVANZADO DE ADMINISTRACIÓN LV

Para alcanzar las metas del tratamiento de resincronización cardíaca (TRC), necesita sistemas avanzados de colocación de electrodos LV para adaptarse a la tortuosidad de la anatomía de su paciente. El sistema Worley avanzado de administración LV proporciona las herramientas y las soluciones necesarias para reducir el tiempo de implantación, obtener un acceso más fácil al vaso objetivo y aumentar las posibilidades de lograr una implantación de TRC satisfactoria¹.

CATÉTERES PARA SENO CORONARIO (CSG) WORLEY™

La curva exclusiva y el cuerpo mallado del catéter para seno coronario (CSG) Worley facilitan la adaptación de la longitud y la curvatura del catéter a la estructura anatómica de su paciente. El catéter interno con cuerpo mallado puede introducirse todo lo necesario para crear curvas variables y reducir el número de introductores necesarios para realizar una implantación correcta.

EL KIT DEL CSG INCLUYE:

- Guía con recubrimiento de PTFE
- Catéter interno curvo
- Dilatador vascular recto
- Herramienta de inserción transvalvular
- Aguja
- Jeringa

Número de referencia	Descripción
WOR-CSG-B1-09	Estándar con cuerpo mallado, 40 cm
WOR-CSG-BL1-09	Largo con cuerpo mallado, 50 cm
WOR-CSG-B2-09	Jumbo con cuerpo mallado, 50 cm

Empaquetados en cajas de 1 unidad, 5 cajas por estuche.

INTRODUCTOR DE VENA LATERAL (LVI) WORLEY™

El sistema LVI telescópico Worley está diseñado para ofrecerle la flexibilidad que necesita para la colocación de electrodos LV con confianza y precisión en la ubicación objetivo.

EL KIT DEL LVI INCLUYE:

- Selector de vena Worley
- Herramienta de inserción transvalvular
- Cortadora


Número de referencia	Descripción
WORLVI-75-5-62-07-RE	Sistema LVI, renal
WORLVI-75-5-62-07-HS	Sistema LVI, hockey stick
WORLVI-75-5-62-07-HO	Sistema LVI, gancho
WORLVI-75-5-62-07-MP	Sistema LVI, multiusos

Empaquetados en cajas de 1 unidad, 5 cajas por estuche.

¹Datos en el archivo.

SELECTORES DE VENAS WORLEY™

El selector de vena Worley está diseñado para mejorar la colocación de los electrodos LV con sus características únicas: exclusivo conector en acordeón para reducir al mínimo el acodamiento y mejorar la capacidad de dirección, cuerpo mallado de diseño patentado para aumentar al máximo la flexibilidad y punta blanda cónica para reducir el traumatismo vascular. Además, el selector tiene gran visibilidad bajo fluoroscopia.

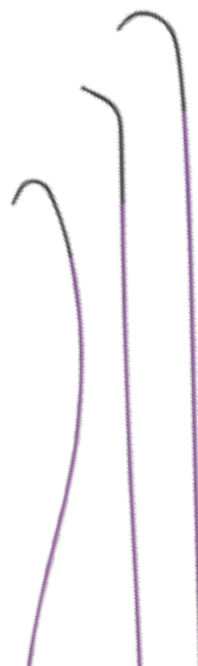

Número de referencia	Descripción
57538CS-WOR	Selector de vena Worley estándar
57538CSV-WOR	Selector de vena Worley de tipo vertebral
57538CSHK-WOR	Selector de vena Worley en forma de gancho

Empaquetados en cajas de 1 unidad.


EQUIPOS AVANZADOS DE ADMINISTRACIÓN DE MEDIO DE CONTRASTE WORLEY™

Los equipos avanzados de administración de medio de contraste (CA) Worley combinan todos los productos necesarios para lograr una visibilidad clara y constante de la anatomía de las venas coronarias. Los equipos de CA Worley proporcionan visualización en tiempo real durante la implantación de TRC para una mejor colocación de los electrodos LV.


LOS EQUIPOS DE CA CONTIENEN:

- Jeringas Medallion®
- Jeringa de control coronario Inject10™
- MAP™ (paquete de angioplastia de Merit, con válvula hemostática, herramienta de inserción para guía, dispositivo de torque)
- Llave de paso
- Tubo de alta presión
- Etiquetas y recipiente (solo en el equipo avanzado)

Número de referencia	Descripción	Cantidad
K12-WORLEY1	Equipo avanzado de administración de medio de contraste Worley 1	10 unidades por caja, 4 cajas por estuche
K12-WORLEY2	Equipo de administración de medio de contraste Worley 2	15 unidades por caja, 5 cajas por estuche

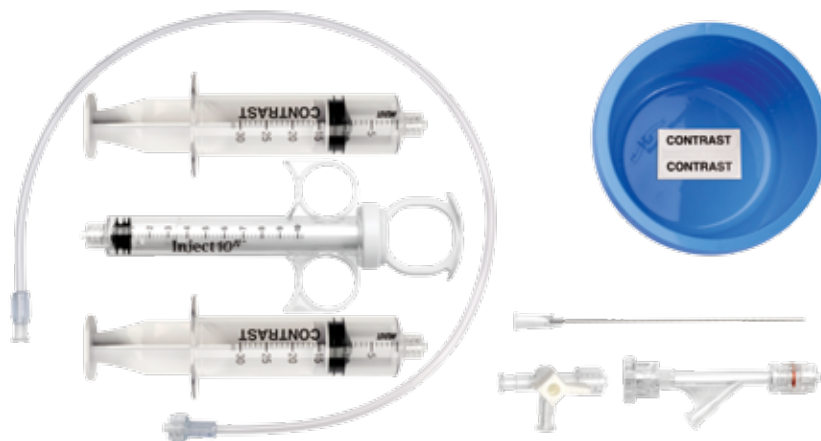

K12-WORLEY1

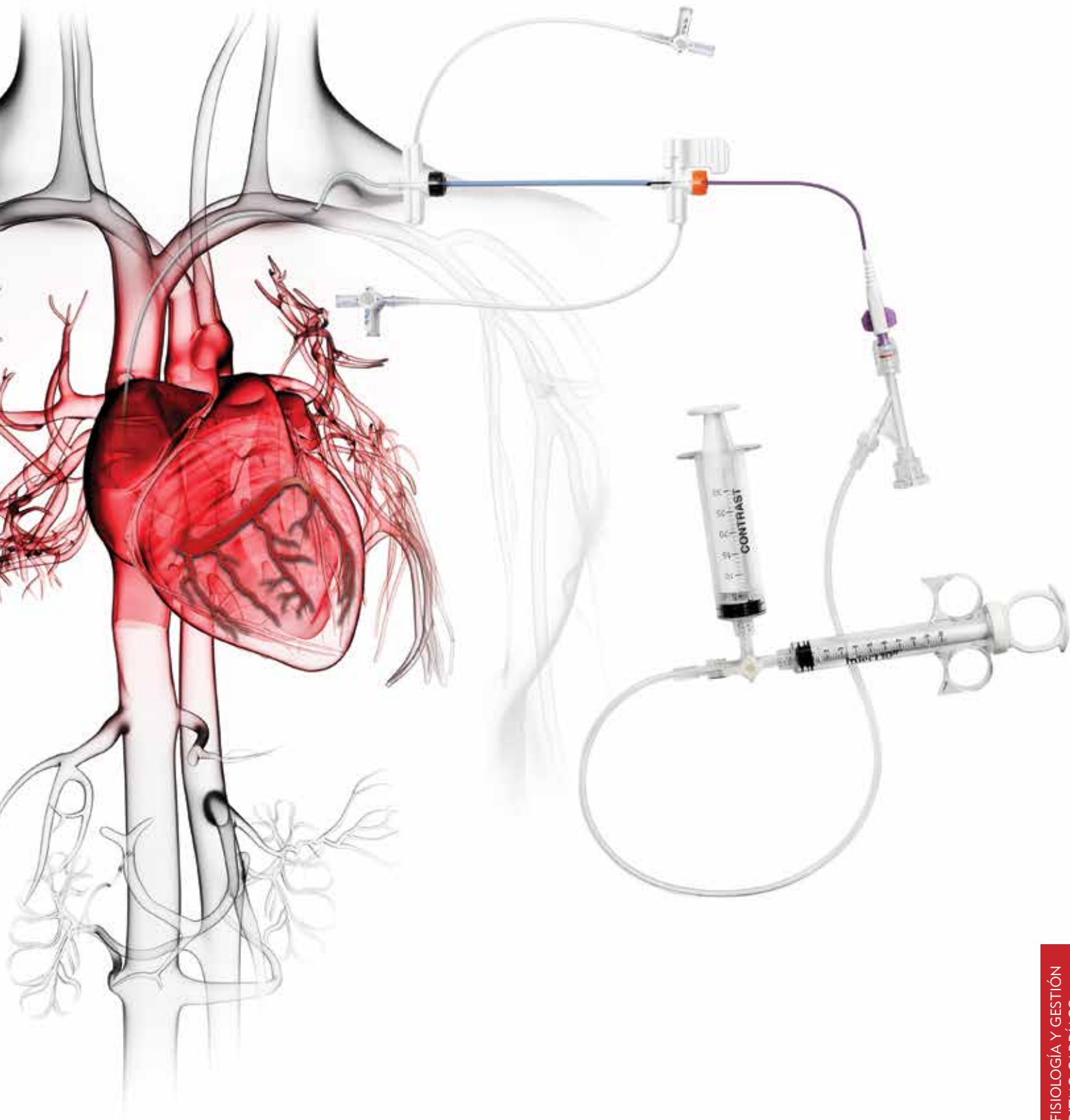

SOLUCIONES PARA EL PROCEDIMIENTO COMPLETO



EQUIPOS, PAQUETES Y BANDEJAS DE PROCEDIMIENTO

Bandeja para angiografía 1	97
Bandeja para angiografía 2	98
Bandeja para angiografía 3	99
Equipos de angiografía personalizados	100
Kits de pericardiocentesis	101
Manta para paciente Paños radiales	102
Drape Armour® - Escudos de protección posicional	103

SEGURIDAD Y GESTIÓN DE DESECHOS

Sistemas de descarte BackStop® y MiniStop®	104
Sistemas de descarte BackStop+™ y MiniStop+™	104
Recipientes cerrados para desechos DugOut®	104
Descartador de elementos cortopunzantes	
ShortStop®	104
Descartador de elementos cortopunzantes	
ShortStop Advantage®	105
Descartador de elementos cortopunzantes	
ShortStop Grandstand®	105

BOLÍGRAFOS Y ETIQUETAS


PAL™ (bolígrafo y etiquetas)	106-107
Bolígrafo PAL	107
Etiquetas PAL personalizadas	108

BANDEJA PARA ANGIOGRAFÍA 1

Incluye

Cantidad Descripción

2	Bolsas para quirófano 36" x 48" (91 x 122 cm)
1	Manta de preparación 44" x 77" (112 x 196 cm)
1	Bolsa para quirófano en forma de cúpula de 22" (56 cm) de profundidad
1	Aguja de 18 G x 1,5" (40 mm)
1	Aguja de 21 G x 1,5" (40 mm)
1	Aguja de 22 G x 1,5" (40 mm)
1	Aguja de 25 G x 1,5" (40 mm)
1	Bisturí de seguridad n.º 11 Futura®
1	Frasco para 2 oz de medicina, 60 mL
1	Recipiente de 16 oz, 500 mL
1	Recipiente de 32 oz, 1000 mL
1	Recipiente para guía de 2000 mL
1	Bandeja 9" x 5" x 2" (23 x 12 x 5 cm)
1	Pinzas curvas de 5" (13 cm)
50	Gasas 4" x 4" (10 x 10 cm) (12 capas)
6	Toallas de tela (azules)
4	Pinzas para toalla
3	Palillos con esponja de 8" (20 cm)
2	Batas XL NRF
1	Manta para la mesa de instrumental 50" x 90" (127 x 229 cm)
1	Paño femoral 86" x 135" (206 x 343 cm) con 2 ventanas
2	Etiquetas de identificación lineales (rojo/amarillo/azul/blanco)
1	Bolsa para desechos Merit Disposal Depot™ (MDD200HP)
1	Aguja para angiografía de 18 G x 2 3/4" (7 cm) Pared fina
3	Jeringas Medallion® de 20 mL L/L, blancas, solución salina
2	Jeringas Medallion de 10 mL L/L, azul claro, lidocaína
2	Jeringas Medallion de 10 mL L/L, amarillas, contraste
1	Descartador de elementos cortopunzantes ShortStop®
1	Configuración de manifold con manijas de cierre*

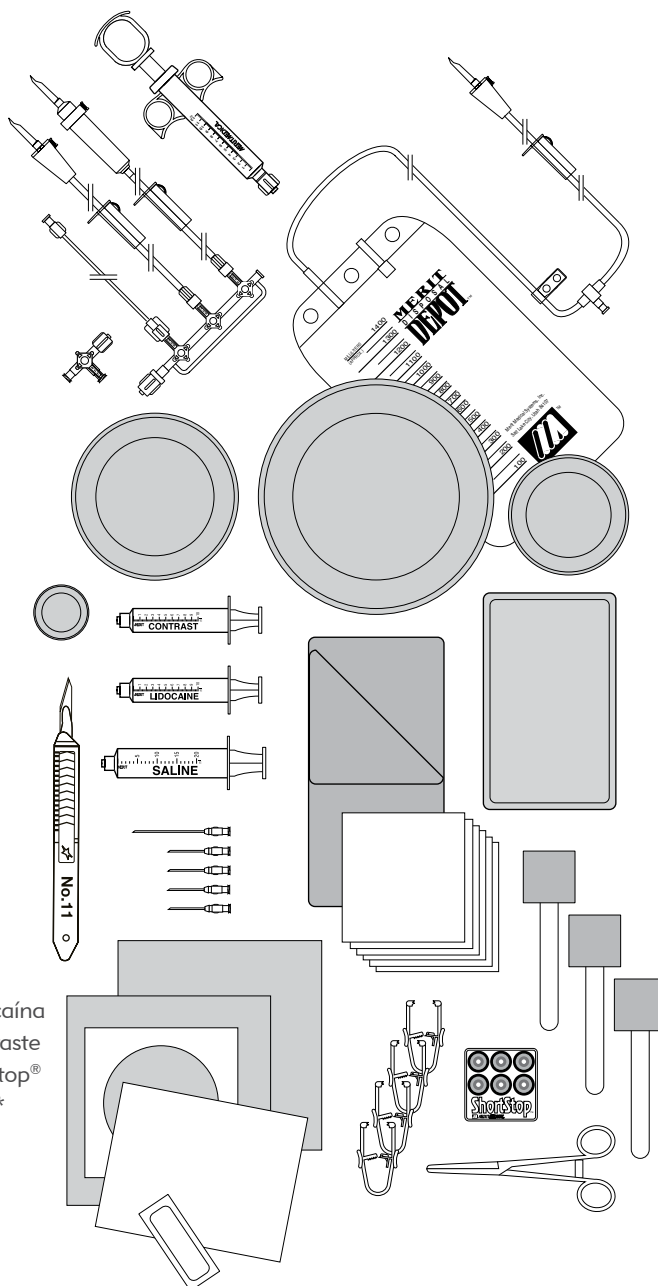

*LA CONFIGURACIÓN DEL MANIFOLD CONTIENE:

203HF-R - Manifold de 3 puertos

Primer puerto - PM6172 - Tubo de monitorización de presión

Segundo puerto - FAS5072 - Tubo con espiga de gran calibre

Tercer puerto - FAS1272 - Tubo con cámara de macrogoteo no ventilada, conector Luer macho

CCX010 - Jeringa de control coronario

M3SNC - Llave de paso de 3 vías

Empaquetadas en cajas de 4 unidades.

Número de referencia K09T-11906

BANDEJA PARA ANGIOGRAFÍA 2


Incluye

Cantidad	Descripción
2	Bolsas para quirófano 44" x 77" (112 x 196 cm)
1	Manta de preparación 54" x 80" (137 x 203 cm)
1	Bolsa para quirófano en forma de cúpula 22" (56 cm) de profundidad
1	Aguja de 18 G x 1,5" (40 mm)
1	Aguja de 21 G x 1,5" (40 mm)
1	Aguja de 22 G x 1,5" (40 mm)
1	Aguja de 25 G x 1,5" (40 mm)
1	Jeringa de control de 10 mL
1	Bisturí de seguridad n.º 11 Futura®
1	Frasco para 2 oz de medicina, 60 mL
1	Recipiente de 16 oz, 500 mL
1	Recipiente de 32 oz, 1000 mL
1	Recipiente para guía de 2000 mL
1	Bandeja 9" x 5" x 2" (23 x 12 x 5 cm)
1	Pinzas curvas de 5" (13 cm)
1	Etiqueta, lidocaína, blanca 0,5" x 1,75" (1,2 x 4,4 cm)
40	Gasas 4" x 4" (10 x 10 cm) (12 capas)
6	Toallas de tela (azules)
4	Pinzas para toalla
3	Palillos con esponja de 8" (20 cm)
2	Batas XL NRF
1	Manta para la mesa de instrumental 50" x 90" (127 x 229 cm)
1	Paño femoral 86" x 135" (206 x 343 cm) con 2 ventanas
2	Etiquetas de identificación lineales (rojo/amarillo/azul/blanco)
1	Aguja para angiografía de 18 G x 2,75" (7 cm), pared fina
3	Jeringas Medallion® de 20 mL L/L, blancas, solución salina
1	Jeringa Medallion de 10 mL L/L, azul claro, lidocaína
2	Jeringas Medallion de 10 mL L/L, amarillas, contraste
1	Configuración de bolsa para desechos Merit Disposal Depot™ *
1	Descartador de elementos cortopunzantes ShortStop®

*LA BOLSA PARA DESECHOS CONTIENE:
MDD520H - Bolsa para desechos de 1400 mL
HPF721E - Tubo de inyección de contraste
H3RRP - Llave de paso de 3 vías

Empaquetadas en cajas de 4 unidades.

Número de referencia K10T-05267

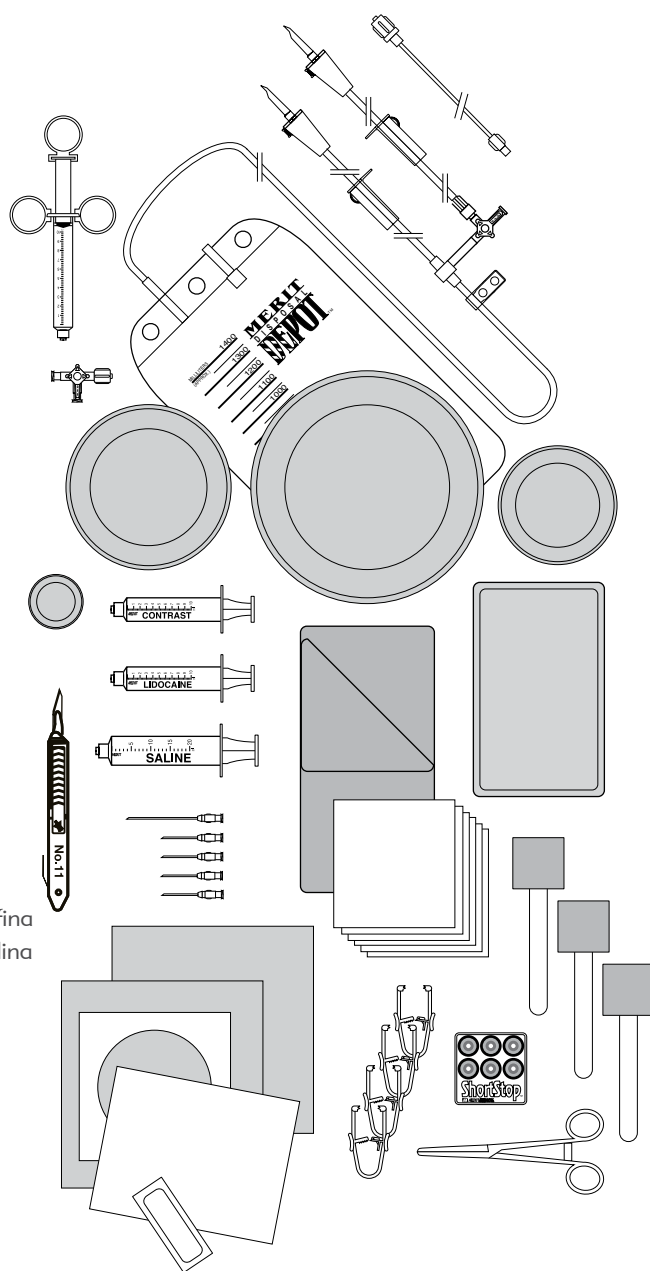


BANDEJA PARA ANGIOGRAFÍA 3

Incluye

Cantidad Descripción

2	Bolsas para quirófano 36" x 48" (91 x 122 cm)
1	Manta de preparación 44" x 77" (112 x 196 cm)
1	Bolsa para quirófano en forma de cúpula de 22" (56 cm) de profundidad
1	Aguja de 18 G x 1,5" (40 mm)
1	Aguja de 21 G x 1,5" (40 mm)
1	Aguja de 22 G x 1,5" (40 mm)
1	Aguja de 25 G x 1,5" (40 mm)
1	Bisturí de seguridad n.º 11 Futura®
1	Frasco para 2 oz de medicina, 60 mL
1	Recipiente de 16 oz, 500 mL
1	Recipiente de 32 oz, 1000 mL
1	Recipiente para guía de 2000 mL
1	Bandeja 9" x 5" x 2" (23 x 12 x 5 cm)
1	Pinzas curvas de 5" (13 cm)
50	Gasas 4" x 4" (10 x 10 cm) (12 capas)
6	Toallas de tela (azules)
4	Pinzas para toalla
3	Palillos con esponja de 8" (20 cm)
2	Batas XL NRF
1	Manta para la mesa de instrumental 50" x 90" (127 x 229 cm)
1	Paño femoral 86" x 135" (206 x 343 cm) con 2 ventanas
2	Etiquetas de identificación lineales (rojo/amarillo/azul/blanco)
1	Bolsa para desechos Merit Disposal Depot™ (MDD200HP)
1	Aguja para angiografía de 18 G x 2 3/4" (7 cm), pared fina
3	Jeringas Medallion® de 20 mL L/L, blancas, solución salina
2	Jeringas Medallion de 10 mL L/L, azul claro, lidocaína
2	Jeringas Medallion de 10 mL L/L, amarillas, contraste
1	Descartador de elementos cortopunzantes ShortStop®
1	Configuración de manifold con manijas de apertura*

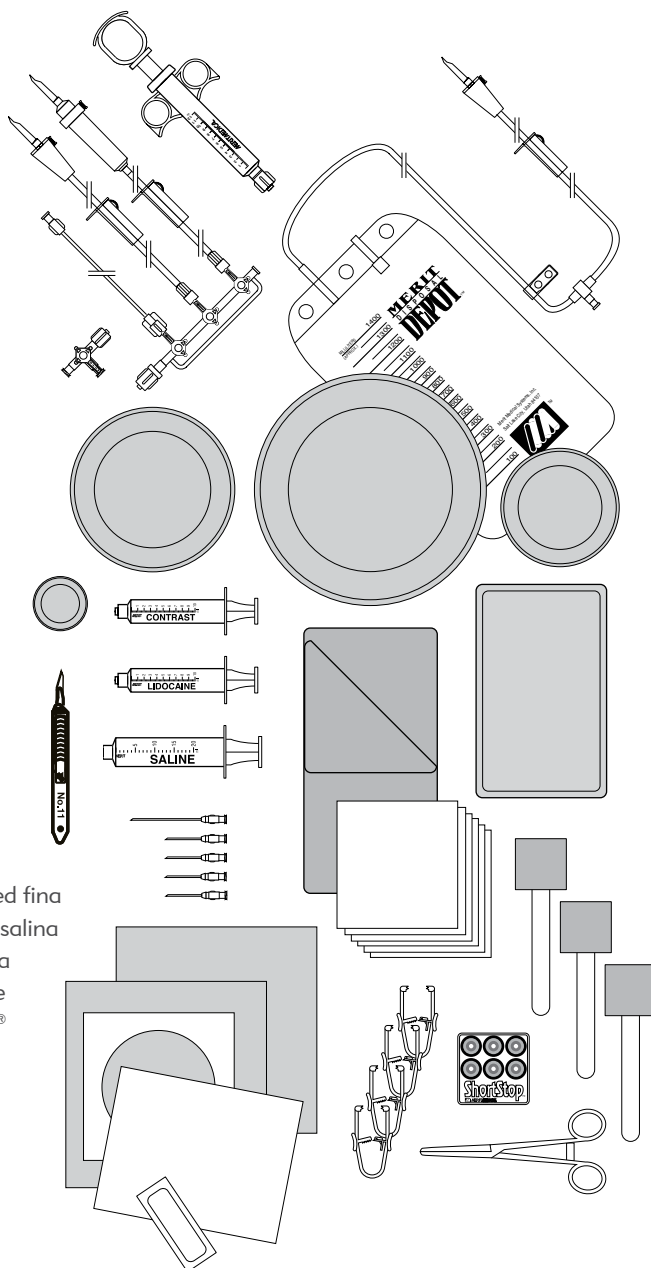

*LA CONFIGURACIÓN DEL MANIFOLD CONTIENE:

203HF-R - Manifold de 3 puertos

Primer puerto - PM6172 - Tubo de monitorización de presión

Segundo puerto - FAS5072 - Tubo de gran calibre, conector Luer macho fijo

Tercer puerto - FAS1272 - Tubo de pequeño calibre, cámara de macrogoteo

CCX010P/B - Jeringa de control coronario

M3SNP - Llave de paso de 3 vías


Empaquetadas en cajas de 4 unidades.

Número de referencia K09T-11907

EQUIPOS DE ANGIOGRAFÍA PERSONALIZADOS

Cuando sus necesidades clínicas son únicas, Merit Medical puede personalizar un kit de angiografía para satisfacer sus necesidades específicas.

Los representantes de ventas de Merit le pueden ayudar a combinar cualquiera de los componentes de Merit en un solo kit.

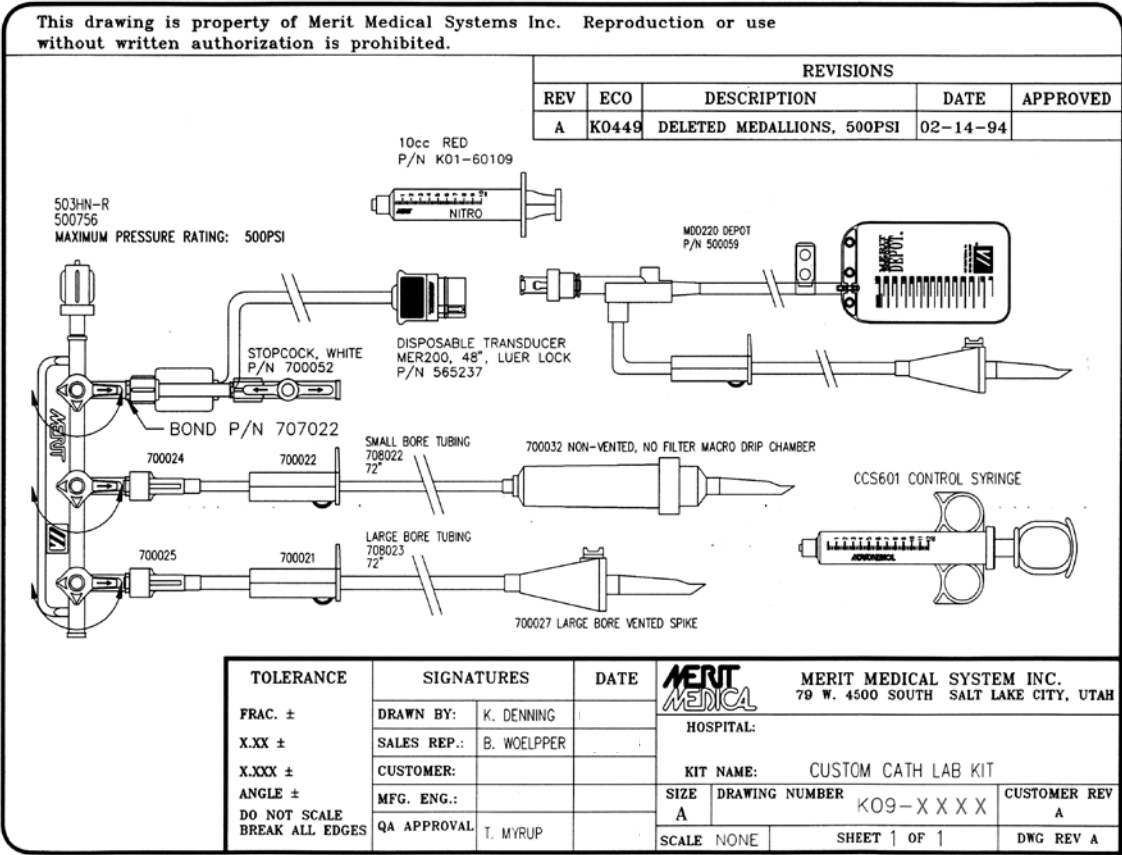

NOTA: Para todos los equipos personalizados es necesario elaborar y firmar un esquema (ejemplo anterior) y un contrato.

KIT DE PERICARDIOCENTESIS


KIT PARA INTERVENCIÓN DE PERICARDIOCENTESIS DE 8,3 F

Diseñado para asistir al médico a la hora de extraer líquido del saco pericárdico.

Incluye

Cantidad	Descripción
----------	-------------

1	Catéter recto o pigtail de 8,3 F, 40 cm con una banda indicativa
1	Dilatador de 8,5 F, 22 cm de longitud
1	Guía: 0,035" (0,89 mm) x 80 cm, 3 mm en J, estándar de PTFE con dos extremos
2	Llaves de paso de 3 vías de gran calibre
1	Aguja para medicamento 18 G X 1 1/2" (3,8 cm)
1	Aguja para medicamento 25 G X 1 1/2" (3,8 cm)
1	Aguja de acceso 18 G x 3" (9 cm)
1	Aguja de acceso Chiba 18 G x 5,9" (15 cm)
1	Jeringa con conexión Luer lock de 10 mL
1	Jeringa con conexión Luer lock de 20 mL
1	Jeringa con conexión Luer lock de 60 mL
1	Bolsa para desechos Merit Disposal Depot™ de 1000 mL con válvula de vaciado
10	Gasas 4" x 4" (10 cm x 10 cm)
1	Paño fenestrado 61 cm x 61 cm
1	Paño de barrera absorbente 46 cm x 66 cm
1	Cable con dos extremos en pinza de cocodrilo
1	Paño CSR
1	Bisturí de seguridad n.º 11 Futura®
1	Hilo de sutura de seda 3-0 con aguja curva
1	Conjunto de etiquetas para medicamentos
2	ChloraPrep® de 3 mL (tinte naranja)

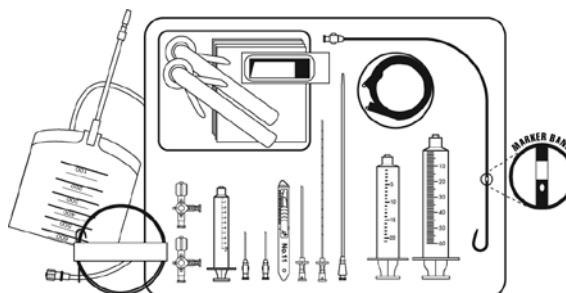

Número de referencia	Descripción
----------------------	-------------

PC801	Pigtail
PC802	Recto
PC803EU	Pigtail; el kit no incluye el ChloraPrep®
PC804EU	Recto; el kit no incluye el ChloraPrep®

Los kits de pericardiocentesis PC801 y PC802 no llevan el marcado CE.
ChloraPrep® es una marca comercial registrada de CareFusion 2200, Inc.

KIT PARA INTERVENCIÓN DE PERICARDIOCENTESIS DE 6 F

Diseñado para asistir al médico a la hora de extraer líquido del saco pericárdico.

Incluye

Cantidad	Descripción
----------	-------------

1	Catéter recto o pigtail de flujo elevado de 6 F, 60 cm
1	Dilatador de 6 F de 22 cm de longitud
1	Llave de paso de 3 vías
1	Guía de 0,035" (0,89 mm) x 80 cm, dos extremos, PTFE tipo heavy duty (en J y recto)
1	Aguja para medicamento 22 G x 2 3/8" (6 cm)
1	Aguja para medicamento 19 G x 1 1/2" (3,8 cm)
1	Aguja de acceso 18 G x 3" (9 cm)
1	Aguja de acceso Chiba 18 G x 5,9" (15 cm)
1	Jeringa con conexión Luer lock de 10 mL
1	Jeringa con conexión Luer lock de 60 mL
1	Bolsa para desechos Merit Disposal Depot™ de 1400 mL con tubo de conexión
10	Gasas 4" x 4" (10 cm x 10 cm)
1	Paño fenestrado 40 cm x 40 cm
1	Paño de barrera absorbente 46 cm x 66 cm
1	Cable con dos extremos en pinza de cocodrilo
1	Envoltura CSR
1	Bisturí de seguridad n.º 11 Futura®



Número de referencia	Descripción
----------------------	-------------

PC101	Catéter pigtail de 6 F y flujo elevado
PC201	Catéter recto de 6 F y flujo elevado

Empaquetados en cajas de 4 kits.


MANTA PARA PACIENTE | PAÑOS RADIALES

MANTA PARA PACIENTE

La manta para pacientes es un producto cómodo e independiente que Merit Medical ha puesto a disposición de aquellos entornos clínicos en los que se desea o necesita un paño fenestrado adicional al paquete de intervenciones. Empaquetadas en cajas de 10 unidades.

Número de referencia K12T-06756

86" (218 cm)

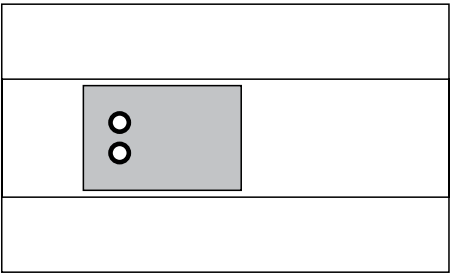


135" (343 cm)


PAÑOS RADIALES

Los paños de cuatro orificios son productos cómodos e independientes para intervenciones de acceso por vía radial que Merit Medical ha puesto a disposición de aquellos entornos clínicos en los que se desea o necesita un paño fenestrado adicional al paquete de intervenciones. Empaquetados en cajas de 10 unidades.


Número de referencia	Descripción
K12T-06719	Paño para angiografía femoral radial
K12T-06760	Paño estándar de 4 orificios
K12T-07173	Paño para angiografía femoral radial

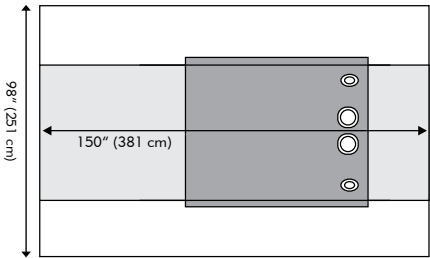

K12T-06719

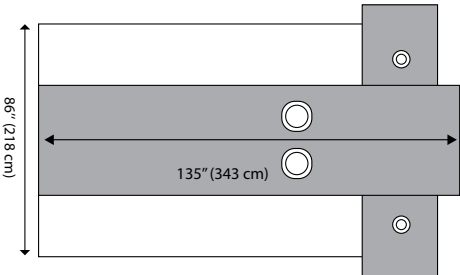

K12T-06760

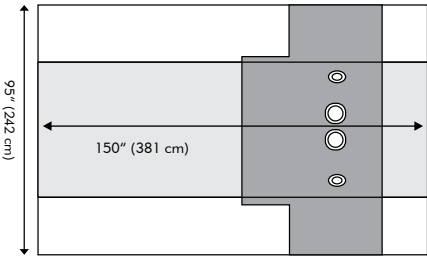


K12T-07173


DRAPE ARMOUR® - ESCUDO DE PROTECCIÓN POSICIONAL

Estos escudos de protección posicionales están diseñados para proteger en el lugar de la intervención donde la dispersión de la radiación es más frecuente. Ayudan a proteger a los cirujanos y otros miembros del personal médico, a la vez que ofrecen una atenuación sustancial, tal y como demuestran los estudios de radiación directa. Empaquetados en cajas de 10 unidades.


Número de referencia	Descripción
K12T-07302	Panel de protección 16 x 10
K12T-07303	Panel de protección 16 x 14
K12T-07304	Panel de protección 16 x 16
K12T-07362	Panel de protección 16 x 10, BAJA ATENUACIÓN
K12T-07363	Panel de protección 16 x 14, BAJA ATENUACIÓN
K12T-07364	Panel de protección 16 x 16, BAJA ATENUACIÓN
K12T-07361	Panel de protección en forma de L 16 x 13 x 9

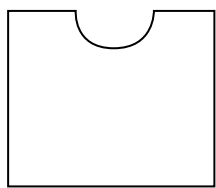


K12T-07302

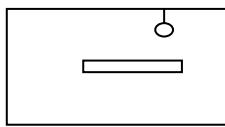


K12T-07303

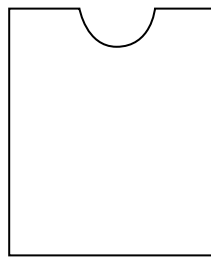


K12T-07304

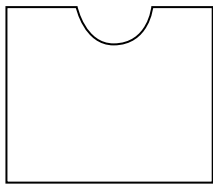


K12T-07362

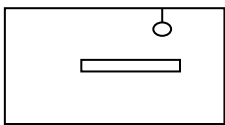

K12T-07363

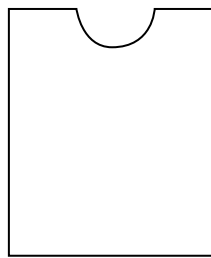

K12T-07364

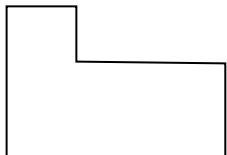

K12T-07361

Drape Armour® - Los escudos de protección posicional no llevan el marcado CE.
Drape Armour es una marca registrada de Microtek Medical, Inc.

SISTEMAS DE DESCARTE BACKSTOP® Y MINISTOP®

Para lograr una eliminación de fluidos desechados rápida y segura. Incluye material absorbente y espuma troquelada y libre de partículas, así como una tapa hermética.

Número de referencia	Descripción
MBS100	BackStop con capacidad para 500 mL de líquidos, empaquetado en cajas de 10 unidades
MMS100	MiniStop con capacidad para 100 mL de líquidos, empaquetado en cajas de 20 unidades
MMSF200	Filtro MiniStop, empaquetado en cajas de 20 unidades



MBS100

SISTEMAS DE DESCARTE BACKSTOP+™ Y MINISTOP+™

Para lograr una eliminación de fluidos desechados rápida y segura. Estos sistemas cuentan con una tapa hermética para evitar la pérdida de fluidos después de una intervención, e incluye un descartador de elementos cortopunzantes.

Número de referencia	Descripción
MBSP100	BackStop+ con capacidad para 500 mL de líquidos, empaquetado en cajas de 10 unidades
MMSP100	MiniStop+ con capacidad para 100 mL de líquidos, empaquetado en cajas de 20 unidades



MBSP100

RECIPIENTES CERRADOS PARA DESECHOS DUGOUT®

Con una capacidad para 1000 mL de líquidos y material absorbente. Cuenta con un compartimiento secundario con espuma troquelada y libre de partículas para el almacenamiento de productos auxiliares o solución salina, así como una tapa hermética. Empaquetados en cajas de 6 unidades, 4 cajas por estuche.

Número de referencia	Descripción
DUG100	DugOut con capacidad para 1000 mL de líquidos
DUG1SS	DugOut con capacidad para 1000 mL de líquidos y descartador de elementos cortopunzantes ShortStop®



DUG100

DESCARTADOR DE ELEMENTOS CORTOPUNZANTES SHORTSTOP®

Reduce la posibilidad de sufrir lesiones accidentales causadas por instrumentos cortantes. Su material rígido y resistente a la perforación reduce la posibilidad de pincharse con agujas y aumenta la seguridad durante la eliminación de desechos. La espuma resistente a la perforación es fácil de retirar y reduce al mínimo la generación de partículas.

Número de referencia SS10

Empaquetados en cajas de 25 unidades, 4 cajas por estuche.



SS10

DESCARTADOR DE ELEMENTOS CORTOPUNZANTES SHORTSTOP ADVANTAGE®

El descartador de elementos cortopunzantes ShortStop Advantage presenta un nuevo acceso lateral donde puede apoyarse una jeringa completamente cargada unida a una aguja.

Número de referencia SS20

Empaquetados en cajas de 25 unidades,
4 cajas por estuche.



DESCARTADOR DE ELEMENTOS CORTOPUNZANTES SHORTSTOP GRANDSTAND®

El ShortStop Grandstand sostiene instrumentos cortopunzantes en posición vertical para un práctico acceso y seguridad. Con su formato compacto, es una solución para el almacenamiento seguro de agujas, jeringas y bisturíes que ocupa poco espacio.

Número de referencia SS30

Empaquetados en cajas de 10 unidades,
4 cajas por estuche.



PAL™ - BOLÍGRAFO Y ETIQUETAS

Sistema de diseño estratégico para el etiquetado de medicamentos. Las etiquetas están fabricadas de polipropileno resistente a la humedad. Además, cada PAL incluye un marcador permanente, estéril y antiborrones. Empaquetados en cajas de 25 unidades, 4 cajas por estuche.

Número de referencia	Descripción
PAL100	Contiene un bolígrafo y un conjunto de 35 etiquetas
PAL200	Contiene un bolígrafo y un conjunto de 24 etiquetas
PAL225	Contiene un bolígrafo, un conjunto de 24 etiquetas y un conjunto de 5 etiquetas para recipientes para guías
PAL250	Contiene un bolígrafo, un conjunto de 24 etiquetas y un conjunto de 7 etiquetas para recipientes grandes
PAL300	Contiene un bolígrafo y un conjunto de 12 etiquetas
PAL325	Contiene un bolígrafo, un conjunto de 12 etiquetas y un conjunto de 5 etiquetas para recipientes para guías
PAL350	Contiene un bolígrafo, un conjunto de 12 etiquetas y un conjunto de 7 etiquetas para recipientes grandes
PAL400	Contiene un bolígrafo y un conjunto de 12 etiquetas en blanco
PAL425	Contiene un bolígrafo, un conjunto de 12 etiquetas en blanco y un conjunto de 5 etiquetas para recipientes para guías
PAL450	Contiene un bolígrafo, un conjunto de 12 etiquetas en blanco y un conjunto de 7 etiquetas para recipientes grandes



Lidocaine	Lidocaine	Lidocaine	Lidocaine	Heparin
Date: Init:	Date: Init:	Date: Init:	Date: Init:	Date: Init:
Contrast	Contrast	Contrast	Contrast	TPA
Date: Init:	Date: Init:	Date: Init:	Date: Init:	Date: Init:
Hep/Saline	Hep/Saline	Hep/Saline	Cardizem	Aminophylline
Date: Init:	Date: Init:	Date: Init:	Date: Init:	Date: Init:
Saline	Saline	Saline	Saline	Morphine Sulfate
Date: Init:	Date: Init:	Date: Init:	Date: Init:	Date: Init:
Versed	Nitro	Sterile Water	Verapamil	Nicardipine
Date: Init:	Date: Init:	Date: Init:	Date: Init:	Date: Init:
Specimen	Specimen	Levophed	Adenosine	Prep Solution
Date: Init:	Date: Init:	Date: Init:	Date: Init:	Date: Init:
Date: Init:	Date: Init:	Date: Init:	Date: Init:	Date: Init:

Lidocaine	Heparin	Nipride	
Date: Init:	Date: Init:	Date: Init:	Date: Init:
Lidocaine	Saline	Verapamil	
Date: Init:	Date: Init:	Date: Init:	Date: Init:
Hep/Saline	Nitro	Adenosine	
Date: Init:	Date: Init:	Date: Init:	Date: Init:
Hep/Saline	Contrast	Levophed	
Date: Init:	Date: Init:	Date: Init:	Date: Init:
Hep/Saline	Contrast	Cardizem	
Date: Init:	Date: Init:	Date: Init:	Date: Init:
Prep Solution	Contrast	Nicardipine	
Date: Init:	Date: Init:	Date: Init:	Date: Init:

SERIE PAL 200

Lidocaine	
Date: Init:	Date: Init:
Saline	
Date: Init:	Date: Init:
Heparin	
Date: Init:	Date: Init:
Hep/Saline	
Date: Init:	Date: Init:
Contrast	
Date: Init:	Date: Init:
Prep Solution	
Date: Init:	Date: Init:

SERIE PAL 300

Date: Init:	Date: Init:
Date: Init:	Date: Init:
Date: Init:	Date: Init:
Date: Init:	Date: Init:
Date: Init:	Date: Init:
Date: Init:	Date: Init:


SERIE PAL 400

CONTINUÁ

PAL™ - BOLÍGRAFO Y ETIQUETAS

PAL500


Contiene un bolígrafo y un conjunto de 5 etiquetas para recipientes para guías.

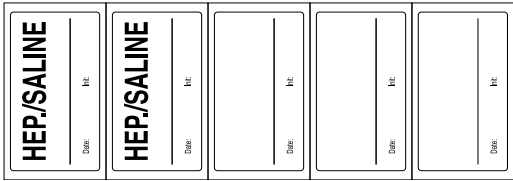

Número de referencia PAL500

PAL600



Contiene un bolígrafo y un conjunto de 7 etiquetas para recipientes grandes.

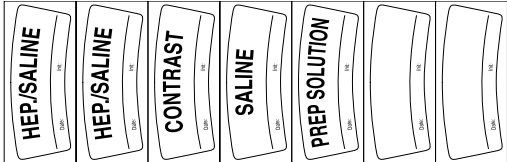

Número de referencia PAL600

PAL700

Contiene un bolígrafo, un conjunto de 35 etiquetas y un conjunto de 7 etiquetas para recipientes grandes.

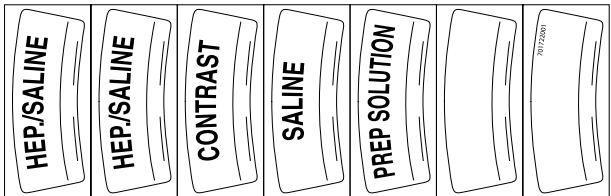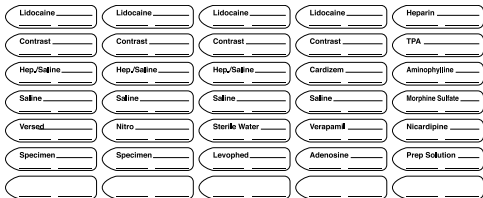

Número de referencia PAL700

Las ilustraciones de las etiquetas no están a escala.

BOLÍGRAFO PAL™

Marcador permanente, estéril y antiborriones. Empaquetados en cajas de 25 unidades, 4 cajas por estuche.

Número de referencia K13-00476




ETIQUETAS PAL™ PERSONALIZADAS

Nuestros clientes ya tienen la posibilidad de crear un conjunto de etiquetas personalizadas que satisfagan sus necesidades clínicas específicas.

PASO 1: ELIJA UN MODELO

Posibles modelos de conjuntos de etiquetas para jeringas, frascos y recipientes pequeños:

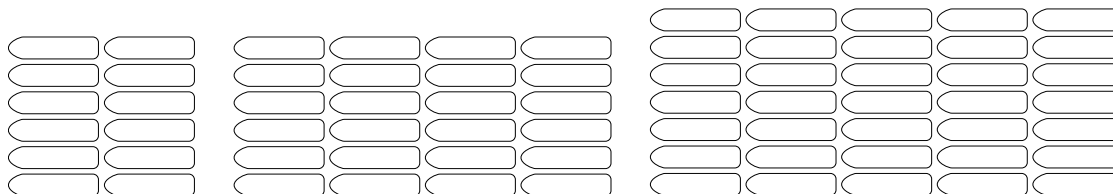


Conjunto de 12 etiquetas

Conjunto de 24 etiquetas

Conjunto de 35 etiquetas

Posibles modelos de conjuntos de etiquetas para recipientes grandes:

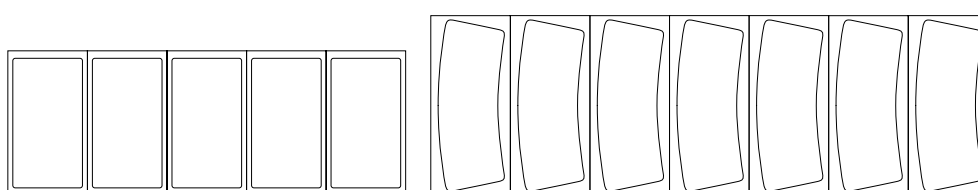

Conjunto de 5 etiquetas (diseño rectangular)

Conjunto de 7 etiquetas (diseño de etiqueta curva)

PASO 2: DETERMINE LOS NOMBRES DE LOS MEDICAMENTOS QUE LE GUSTARÍA IMPRIMIR EN CADA ETIQUETA

PASO 3: ESCOJA LOS COLORES ADECUADOS DE LAS POSIBLES OPCIONES QUE SE ENUMERAN A CONTINUACIÓN

Colores disponibles:

Rojo
Azul oscuro
Azul
Aguamarina
Verde claro
Verde
Amarillo
Morado
Rosa
Naranja claro
Naranja
Blanco
Transparente
Gris
Marrón



Su representante de Merit le indicará el número de referencia correspondiente.

La mayor parte de los conjuntos de etiquetas personalizadas se empaquetan en cajas de 25 unidades, 4 cajas por estuche.

Para adaptarse mejor a sus necesidades clínicas, cada conjunto de etiquetas personalizadas puede contener un marcador permanente estéril. El marcador permanente estéril también está disponible por separado.

NOTA: Los conjuntos de etiquetas personalizadas están disponibles previa solicitud expresa. Prevea un plazo de entrega de hasta seis semanas.

ÍNDICE POR NÚMERO DE REFERENCIA

3011	TERAPÉUTICA	80	203LTCHN-R	ANGIOGRAFÍA	52
82000	HEMOSTASIA	83	203LTCHWF-R	ANGIOGRAFÍA	52
82050	HEMOSTASIA	83	203LTCHWN-R	ANGIOGRAFÍA	52
0684-00-0504	HEMOSTASIA	83	203LTPHF-R	ANGIOGRAFÍA	51
1308-25-0085	ANGIOGRAFÍA	35	203LTPHN-R	ANGIOGRAFÍA	51
1308-35-0005	ANGIOGRAFÍA	35	203LTPHWF-R	ANGIOGRAFÍA	51
1308-35-0006	ANGIOGRAFÍA	35	204BF-FT	ANGIOGRAFÍA	49
1308-35-0007	ANGIOGRAFÍA	35	204BF-R	ANGIOGRAFÍA	48
1308-35-0065	ANGIOGRAFÍA	35	204BF-RT	ANGIOGRAFÍA	48
1308-35-0085	ANGIOGRAFÍA	35	204BN-R	ANGIOGRAFÍA	48
1308-35-0086	ANGIOGRAFÍA	35	204HF-R	ANGIOGRAFÍA	48
1308-38-0006	ANGIOGRAFÍA	35	204HF-RX	ANGIOGRAFÍA	49
1308-38-0007	ANGIOGRAFÍA	35	204HN-R	ANGIOGRAFÍA	48
1310-21-0043	ANGIOGRAFÍA	35	204LHWF-R	ANGIOGRAFÍA	48
1310-21-0053	ANGIOGRAFÍA	35	204LHWN-R	ANGIOGRAFÍA	48
1310-21-0054	ANGIOGRAFÍA	35	204LTCHWF-R	ANGIOGRAFÍA	52
1310-21-0064	ANGIOGRAFÍA	35	204LTCHWN-R	ANGIOGRAFÍA	52
1310-25-0054	ANGIOGRAFÍA	35	204LTPHWF-R	ANGIOGRAFÍA	51
1310-25-0064	ANGIOGRAFÍA	35	205BF-F	ANGIOGRAFÍA	49
1310-25-0065	ANGIOGRAFÍA	35	205BF-FT	ANGIOGRAFÍA	49
1310-25-0084	ANGIOGRAFÍA	35	22V4LTCHWF-R	ANGIOGRAFÍA	52
1310-25-0085	ANGIOGRAFÍA	35	2V2HF-R	ANGIOGRAFÍA	50
201LTCHN-R	ANGIOGRAFÍA	52	2V2HF-RT	ANGIOGRAFÍA	50
201LTPHN-R	ANGIOGRAFÍA	51	2V3HF-R	ANGIOGRAFÍA	50
202BF-R	ANGIOGRAFÍA	48	2V3HF-RT	ANGIOGRAFÍA	50
202BN-R	ANGIOGRAFÍA	48	2V4LHWF-R	ANGIOGRAFÍA	50
202HF-F	ANGIOGRAFÍA	49	2V4LHWF-RT	ANGIOGRAFÍA	50
202HF-L	ANGIOGRAFÍA	48	2V4LHWF-RXT	ANGIOGRAFÍA	50
202HF-R	ANGIOGRAFÍA	48	2V4LTCHWF-R	ANGIOGRAFÍA	50
202HF-RX	ANGIOGRAFÍA	49	2V4LTCHWF-RT	ANGIOGRAFÍA	50
202HN-R	ANGIOGRAFÍA	48	2V4LTCHWF-RT	ANGIOGRAFÍA	52
202HN-RX	ANGIOGRAFÍA	49	2V4LTPHWF-R	ANGIOGRAFÍA	50
202LHWF-R	ANGIOGRAFÍA	48	2V4LTPHWF-R	ANGIOGRAFÍA	51
202LHWN-R	ANGIOGRAFÍA	48	2V4LTPHWF-RT	ANGIOGRAFÍA	50
202LTCHWF-R	ANGIOGRAFÍA	52	2V4LTPHWF-RT	ANGIOGRAFÍA	51
202LTCHWN-R	ANGIOGRAFÍA	52	4100381ULT1	ANGIOGRAFÍA	33
202LTPHWF-R	ANGIOGRAFÍA	51	4100381ULT2	ANGIOGRAFÍA	33
203BF-FT	ANGIOGRAFÍA	49	4100381ULT4-T40	ANGIOGRAFÍA	34
203BF-L	ANGIOGRAFÍA	48	4100381ULT4-T45	ANGIOGRAFÍA	34
203BF-R	ANGIOGRAFÍA	48	4100382ULT3	ANGIOGRAFÍA	33
203BF-RT	ANGIOGRAFÍA	48	410038ULT1	ANGIOGRAFÍA	33
203BF-RX	ANGIOGRAFÍA	49	410038ULT2	ANGIOGRAFÍA	33
203BF-RXT	ANGIOGRAFÍA	49	410038ULT3	ANGIOGRAFÍA	33
203BN-F	ANGIOGRAFÍA	49	410038ULT4-T40	ANGIOGRAFÍA	34
203BN-L	ANGIOGRAFÍA	48	410038ULT4-T45	ANGIOGRAFÍA	34
203BN-R	ANGIOGRAFÍA	48	411038RADIM	ANGIOGRAFÍA	34
203BN-RT	ANGIOGRAFÍA	48	412538ULT1	ANGIOGRAFÍA	33
203HF-F	ANGIOGRAFÍA	49	412538ULT2	ANGIOGRAFÍA	33
203HF-L	ANGIOGRAFÍA	48	412538ULT3	ANGIOGRAFÍA	33
203HF-R	ANGIOGRAFÍA	48	412538ULT4-T40	ANGIOGRAFÍA	34
203HF-RX	ANGIOGRAFÍA	49	412538ULT4-T45	ANGIOGRAFÍA	34
203HN-R	ANGIOGRAFÍA	48	4408-2M65	ANGIOGRAFÍA	36
203HN-RX	ANGIOGRAFÍA	49	4408-2M65SH	ANGIOGRAFÍA	36
203LHWF-R	ANGIOGRAFÍA	48	4408-2M80	ANGIOGRAFÍA	36
203LHWN-R	ANGIOGRAFÍA	48	4408-2M80SH	ANGIOGRAFÍA	36
203LTCHF-R	ANGIOGRAFÍA	52	4MPPRO-W-145	ANGIOGRAFÍA	28

4MPPRO-W-S	ANGIOGRAFÍA	28
4RPL110	ANGIOGRAFÍA	31
4RPL110-NB	ANGIOGRAFÍA	31
4RPL125	ANGIOGRAFÍA	31
4RPL125-NB	ANGIOGRAFÍA	31
4RPS110	ANGIOGRAFÍA	31
4RPS110-NB	ANGIOGRAFÍA	31
4RPS125	ANGIOGRAFÍA	31
4RPS125-NB	ANGIOGRAFÍA	31
501BF-R	ANGIOGRAFÍA	48
501BN-R	ANGIOGRAFÍA	48
501LTCHF-R	ANGIOGRAFÍA	52
501LTCHN-R	ANGIOGRAFÍA	52
501LTPHN-R	ANGIOGRAFÍA	51
502BF-R	ANGIOGRAFÍA	48
502BF-RX	ANGIOGRAFÍA	49
502BN-R	ANGIOGRAFÍA	48
502BN-RX	ANGIOGRAFÍA	49
502HF-L	ANGIOGRAFÍA	48
502HF-R	ANGIOGRAFÍA	48
502HF-RT	ANGIOGRAFÍA	48
502HN-R	ANGIOGRAFÍA	48
502LHWF-R	ANGIOGRAFÍA	48
502LHWF-R	ANGIOGRAFÍA	49
502LHWN-R	ANGIOGRAFÍA	48
502LTCHWF-R	ANGIOGRAFÍA	52
502LTCHWN-R	ANGIOGRAFÍA	52
502LTPHWF-R	ANGIOGRAFÍA	51
502LTPHWN-R	ANGIOGRAFÍA	51
503BF-F	ANGIOGRAFÍA	49
503BF-R	ANGIOGRAFÍA	48
503BF-RT	ANGIOGRAFÍA	48
503BF-RX	ANGIOGRAFÍA	49
503BF-RXT	ANGIOGRAFÍA	49
503BN-R	ANGIOGRAFÍA	48
503HF-L	ANGIOGRAFÍA	48
503HF-R	ANGIOGRAFÍA	48
503HF-RX	ANGIOGRAFÍA	49
503HN-R	ANGIOGRAFÍA	48
503HN-RT	ANGIOGRAFÍA	48
503HN-RX	ANGIOGRAFÍA	49
503LHWF-R	ANGIOGRAFÍA	48
503LHWN-R	ANGIOGRAFÍA	48
503LTCHF-R	ANGIOGRAFÍA	52
503LTCHN-R	ANGIOGRAFÍA	52
503LTCHWF-R	ANGIOGRAFÍA	52
503LTCHWN-R	ANGIOGRAFÍA	52
503LTPHF-R	ANGIOGRAFÍA	51
503LTPHN-R	ANGIOGRAFÍA	51
503LTPHWF-R	ANGIOGRAFÍA	51
503LTPHWN-R	ANGIOGRAFÍA	51
504BF-R	ANGIOGRAFÍA	48
504BN-R	ANGIOGRAFÍA	48
504HF-R	ANGIOGRAFÍA	48
504HF-RX	ANGIOGRAFÍA	49
504HN-R	ANGIOGRAFÍA	48
504LHWF-R	ANGIOGRAFÍA	48
504LHWN-R	ANGIOGRAFÍA	48
504LTCHWF-R	ANGIOGRAFÍA	52
504LTCHWN-R	ANGIOGRAFÍA	52
504LTPHF-R	ANGIOGRAFÍA	51
504LTPHWN-R	ANGIOGRAFÍA	51
5100381ULT1	ANGIOGRAFÍA	33
5100381ULT2	ANGIOGRAFÍA	33
5100381ULT4-T40	ANGIOGRAFÍA	34
5100381ULT4-T45	ANGIOGRAFÍA	34

5100382ULT3	ANGIOGRAFÍA	33
510038ULT1	ANGIOGRAFÍA	33
510038ULT2	ANGIOGRAFÍA	33
510038ULT3	ANGIOGRAFÍA	33
510038ULT4-T40	ANGIOGRAFÍA	34
510038ULT4-T45	ANGIOGRAFÍA	34
5110381ULT1	ANGIOGRAFÍA	33
5110381ULT2	ANGIOGRAFÍA	33
5110381ULT4-T40	ANGIOGRAFÍA	34
5110381ULT4-T45	ANGIOGRAFÍA	34
511038RADIM	ANGIOGRAFÍA	34
512538ULT1	ANGIOGRAFÍA	33
512538ULT2	ANGIOGRAFÍA	33
512538ULT3	ANGIOGRAFÍA	33
512538ULT4-T40	ANGIOGRAFÍA	34
512538ULT4-T45	ANGIOGRAFÍA	34
57538CSHK-WOR	ELECTROFISIOLOGÍA Y GESTIÓN DEL RITMO CARDÍACO	93
57538CSV-WOR	ELECTROFISIOLOGÍA Y GESTIÓN DEL RITMO CARDÍACO	93
57538CS-WOR	ELECTROFISIOLOGÍA Y GESTIÓN DEL RITMO CARDÍACO	93
5IMP100381ULT1	ANGIOGRAFÍA	34
5IMP10038ULT1	ANGIOGRAFÍA	34
5MPPRO-145	ANGIOGRAFÍA	28
5MPPRO-S	ANGIOGRAFÍA	28
5MPPROW-145	ANGIOGRAFÍA	28
5MPPROW-145	ANGIOGRAFÍA	28
5MPPROW-S	ANGIOGRAFÍA	28
5MPS-145	ANGIOGRAFÍA	28
5MPS-S	ANGIOGRAFÍA	28
5MPSW-145	ANGIOGRAFÍA	28
5MPSW-S	ANGIOGRAFÍA	28
5MPSW-S-18G	ANGIOGRAFÍA	28
5MPSW-SNB	ANGIOGRAFÍA	28
5RPL110	ANGIOGRAFÍA	31
5RPL110-NB	ANGIOGRAFÍA	31
5RPL125	ANGIOGRAFÍA	31
5RPL125-NB	ANGIOGRAFÍA	31
5RPS110	ANGIOGRAFÍA	31
5RPS110- NB	ANGIOGRAFÍA	31
5RPS125	ANGIOGRAFÍA	31
5RPS125-NB	ANGIOGRAFÍA	31
6100381ULT1	ANGIOGRAFÍA	33
6100381ULT2	ANGIOGRAFÍA	33
6100381ULT4-T40	ANGIOGRAFÍA	34
6100381ULT4-T45	ANGIOGRAFÍA	34
6100382ULT3	ANGIOGRAFÍA	33
610038ULT1	ANGIOGRAFÍA	33
610038ULT2	ANGIOGRAFÍA	33
610038ULT3	ANGIOGRAFÍA	33
610038ULT4-T40	ANGIOGRAFÍA	34
610038ULT4-T45	ANGIOGRAFÍA	34
6110381ULT1	ANGIOGRAFÍA	33
6110381ULT2	ANGIOGRAFÍA	33
6110381ULT4-T40	ANGIOGRAFÍA	34
6110381ULT4-T45	ANGIOGRAFÍA	34
6110382ULT3	ANGIOGRAFÍA	33
612538ULT1	ANGIOGRAFÍA	33
612538ULT2	ANGIOGRAFÍA	33
612538ULT3	ANGIOGRAFÍA	33
612538ULT4-T40	ANGIOGRAFÍA	34
612538ULT4-T45	ANGIOGRAFÍA	34
6MPPROW-145	ANGIOGRAFÍA	28
6MPPROW-S	ANGIOGRAFÍA	28
6MPS-145	ANGIOGRAFÍA	28

6MPS-S	ANGIOGRAFÍA	28
6MPSW-145	ANGIOGRAFÍA	28
6MPSW-S	ANGIOGRAFÍA	28
6MPSW-S-18G	ANGIOGRAFÍA	28
6RPL110	ANGIOGRAFÍA	31
6RPL110-NB	ANGIOGRAFÍA	31
6RPL125	ANGIOGRAFÍA	31
6RPL125-NB	ANGIOGRAFÍA	31
6RPS110	ANGIOGRAFÍA	31
6RPS110- NB	ANGIOGRAFÍA	31
6RPS125	ANGIOGRAFÍA	31
6RPS125-NB	ANGIOGRAFÍA	31
7240-10	ANGIOGRAFÍA	30
7240-20	ANGIOGRAFÍA	30
7240-30	ANGIOGRAFÍA	30
7241-10	ANGIOGRAFÍA	30
7242-10	ANGIOGRAFÍA	30
7242-20	ANGIOGRAFÍA	30
7501-13	ANGIOGRAFÍA	21
7501-21	ANGIOGRAFÍA	21
7501-33	ANGIOGRAFÍA	21
7501-43	ANGIOGRAFÍA	21
7501-53	ANGIOGRAFÍA	21
7501-63	ANGIOGRAFÍA	21
7501-73	ANGIOGRAFÍA	21
7501-83	ANGIOGRAFÍA	21
7501-A3	ANGIOGRAFÍA	22
7501-B1	ANGIOGRAFÍA	22
7501-C3	ANGIOGRAFÍA	22
7501-D3	ANGIOGRAFÍA	22
7501-H1	ANGIOGRAFÍA	21
7502-13	ANGIOGRAFÍA	23
7502-23	ANGIOGRAFÍA	23
7502-33	ANGIOGRAFÍA	23
7502-43	ANGIOGRAFÍA	23
7503-13	ANGIOGRAFÍA	22
7503-21	ANGIOGRAFÍA	22
7503-33	ANGIOGRAFÍA	22
7503-43	ANGIOGRAFÍA	22
7503-53	ANGIOGRAFÍA	22
7503-63	ANGIOGRAFÍA	22
7503-73	ANGIOGRAFÍA	22
7503-83	ANGIOGRAFÍA	22
7503-93	ANGIOGRAFÍA	22
7503-A3	ANGIOGRAFÍA	23
7503-B1	ANGIOGRAFÍA	23
7503-C3	ANGIOGRAFÍA	23
7503-D3	ANGIOGRAFÍA	23
7506-11	ANGIOGRAFÍA	24
7507-13	ANGIOGRAFÍA	23
7507-23	ANGIOGRAFÍA	23
7507-33	ANGIOGRAFÍA	23
7507-43	ANGIOGRAFÍA	23
7508-13	ANGIOGRAFÍA	24
7508-23	ANGIOGRAFÍA	24
7508-33	ANGIOGRAFÍA	24
7509-11	ANGIOGRAFÍA	26
7509-23	ANGIOGRAFÍA	26
7509-33	ANGIOGRAFÍA	27
7509-43	ANGIOGRAFÍA	26
7509-53	ANGIOGRAFÍA	26
7509-63	ANGIOGRAFÍA	27
7510-13	ANGIOGRAFÍA	25
7510-23	ANGIOGRAFÍA	25
7511-13	ANGIOGRAFÍA	25
7512-13	ANGIOGRAFÍA	25

7512-23	ANGIOGRAFÍA	25
7513-13	ANGIOGRAFÍA	29
7513-23	ANGIOGRAFÍA	29
7513-33	ANGIOGRAFÍA	29
7513-43	ANGIOGRAFÍA	29
7513-53	ANGIOGRAFÍA	29
7513-63	ANGIOGRAFÍA	29
7513-A3	ANGIOGRAFÍA	29
7513-B3	ANGIOGRAFÍA	29
7513-C3	ANGIOGRAFÍA	29
7513-D3	ANGIOGRAFÍA	29
7513-E3	ANGIOGRAFÍA	29
7513-F3	ANGIOGRAFÍA	29
7520-13	ANGIOGRAFÍA	29
7520-23	ANGIOGRAFÍA	29
7521-13	ANGIOGRAFÍA	21
7521-21	ANGIOGRAFÍA	21
7521-33	ANGIOGRAFÍA	21
7521-43	ANGIOGRAFÍA	21
7521-53	ANGIOGRAFÍA	21
7521-63	ANGIOGRAFÍA	21
7521-73	ANGIOGRAFÍA	21
7521-83	ANGIOGRAFÍA	21
7521-F1	ANGIOGRAFÍA	21
7521-L3	ANGIOGRAFÍA	35
7521-M3	ANGIOGRAFÍA	35
7521-N3	ANGIOGRAFÍA	35
7521-P3	ANGIOGRAFÍA	35
7523-13	ANGIOGRAFÍA	22
7523-21	ANGIOGRAFÍA	22
7523-33	ANGIOGRAFÍA	22
7523-43	ANGIOGRAFÍA	22
7523-53	ANGIOGRAFÍA	22
7523-63	ANGIOGRAFÍA	22
7523-73	ANGIOGRAFÍA	22
7523-83	ANGIOGRAFÍA	22
7523-93	ANGIOGRAFÍA	22
7523-E3	ANGIOGRAFÍA	23
7523-F1	ANGIOGRAFÍA	23
7523-G3	ANGIOGRAFÍA	23
7523-H3	ANGIOGRAFÍA	23
7523-L3	ANGIOGRAFÍA	35
7523-M3	ANGIOGRAFÍA	35
7523-N3	ANGIOGRAFÍA	35
7523-P3	ANGIOGRAFÍA	35
7526-11	ANGIOGRAFÍA	24
7527-13	ANGIOGRAFÍA	23
7527-23	ANGIOGRAFÍA	23
7527-33	ANGIOGRAFÍA	23
7527-43	ANGIOGRAFÍA	23
7528-13	ANGIOGRAFÍA	24
7528-23	ANGIOGRAFÍA	24
7528-33	ANGIOGRAFÍA	24
7529-11	ANGIOGRAFÍA	26
7529-23	ANGIOGRAFÍA	26
7529-33	ANGIOGRAFÍA	27
7529-43	ANGIOGRAFÍA	26
7529-53	ANGIOGRAFÍA	26
7529-63	ANGIOGRAFÍA	27
7530-13	ANGIOGRAFÍA	29
7530-23	ANGIOGRAFÍA	29
7531-13	ANGIOGRAFÍA	25
7531-33	ANGIOGRAFÍA	25
7532-13	ANGIOGRAFÍA	25
7533-13	ANGIOGRAFÍA	29
7533-23	ANGIOGRAFÍA	29

7533-33	ANGIOGRAFÍA	29
7533-43	ANGIOGRAFÍA	29
7533-53	ANGIOGRAFÍA	29
7533-63	ANGIOGRAFÍA	29
7534-13	ANGIOGRAFÍA	25
7534-23	ANGIOGRAFÍA	25
7560-13	ANGIOGRAFÍA	27
7560-23	ANGIOGRAFÍA	27
7560-33	ANGIOGRAFÍA	27
7560-43	ANGIOGRAFÍA	27
7560-53	ANGIOGRAFÍA	27
7560-83	ANGIOGRAFÍA	27
7560-A3	ANGIOGRAFÍA	27
7560-C3	ANGIOGRAFÍA	27
7560-G3	ANGIOGRAFÍA	27
7569-11	ANGIOGRAFÍA	26
7569-23	ANGIOGRAFÍA	26
7569-33	ANGIOGRAFÍA	27
7569-43	ANGIOGRAFÍA	26
7569-53	ANGIOGRAFÍA	26
7569-63	ANGIOGRAFÍA	27
7572-11	ANGIOGRAFÍA	25
7574-13	ANGIOGRAFÍA	21
7574-21	ANGIOGRAFÍA	21
7574-33	ANGIOGRAFÍA	21
7574-43	ANGIOGRAFÍA	21
7600-11	ANGIOGRAFÍA	25
7601-13	ANGIOGRAFÍA	21
7601-21	ANGIOGRAFÍA	21
7601-33	ANGIOGRAFÍA	21
7601-43	ANGIOGRAFÍA	21
7602-11	ANGIOGRAFÍA	26
7602-23	ANGIOGRAFÍA	26
7602-33	ANGIOGRAFÍA	27
7660-13	ANGIOGRAFÍA	27
7660-23	ANGIOGRAFÍA	27
7660-33	ANGIOGRAFÍA	27
7660-43	ANGIOGRAFÍA	27
7660-53	ANGIOGRAFÍA	27
7660-63	ANGIOGRAFÍA	27
7660-A3	ANGIOGRAFÍA	27
7660-B3	ANGIOGRAFÍA	27
7700-10	ANGIOGRAFÍA	21
7700-20	ANGIOGRAFÍA	21
7700-30	ANGIOGRAFÍA	21
7700-40	ANGIOGRAFÍA	21
7700-A0	ANGIOGRAFÍA	35
7700-B0	ANGIOGRAFÍA	35
7700-C0	ANGIOGRAFÍA	35
7700-D0	ANGIOGRAFÍA	35
7701-10	ANGIOGRAFÍA	22
7701-20	ANGIOGRAFÍA	22
7701-30	ANGIOGRAFÍA	22
7701-40	ANGIOGRAFÍA	22
7701-50	ANGIOGRAFÍA	22
7701-A0	ANGIOGRAFÍA	35
7701-B0	ANGIOGRAFÍA	35
7701-C0	ANGIOGRAFÍA	35
7701-D0	ANGIOGRAFÍA	35
7702-10	ANGIOGRAFÍA	24
7702-20	ANGIOGRAFÍA	24
7702-30	ANGIOGRAFÍA	24
7702-40	ANGIOGRAFÍA	24
7703-10	ANGIOGRAFÍA	23
7703-20	ANGIOGRAFÍA	23
7703-30	ANGIOGRAFÍA	23

7703-40	ANGIOGRAFÍA	23
7703-80	ANGIOGRAFÍA	30
7704-10	ANGIOGRAFÍA	26
7704-20	ANGIOGRAFÍA	26
7704-30	ANGIOGRAFÍA	27
7704-70	ANGIOGRAFÍA	26
7705-10	ANGIOGRAFÍA	29
7705-20	ANGIOGRAFÍA	29
7706-10	ANGIOGRAFÍA	25
7707-10	ANGIOGRAFÍA	25
7708-10	ANGIOGRAFÍA	29
7708-20	ANGIOGRAFÍA	29
7708-30	ANGIOGRAFÍA	29
7708-40	ANGIOGRAFÍA	29
7708-50	ANGIOGRAFÍA	29
7708-60	ANGIOGRAFÍA	29
7709-10	ANGIOGRAFÍA	25
7709-20	ANGIOGRAFÍA	25
7751-10	ANGIOGRAFÍA	27
7751-20	ANGIOGRAFÍA	27
7756-10	ANGIOGRAFÍA	36
7756-20	ANGIOGRAFÍA	36
7757-10	ANGIOGRAFÍA	36
7757-20	ANGIOGRAFÍA	36
7776-11	ANGIOGRAFÍA	26
7776-21	ANGIOGRAFÍA	26
7776-33	ANGIOGRAFÍA	26
7776-43	ANGIOGRAFÍA	27
7776-B1	ANGIOGRAFÍA	26
7776-C3	ANGIOGRAFÍA	26
7776-D3	ANGIOGRAFÍA	27
7777-21	ANGIOGRAFÍA	26
7777-33	ANGIOGRAFÍA	26
7777-43	ANGIOGRAFÍA	27
7777-B1	ANGIOGRAFÍA	26
7777-C3	ANGIOGRAFÍA	26
7777-D3	ANGIOGRAFÍA	27
AD18N91W	ACCESO	5
AD18T51W	ACCESO	5
AD18T51WS	ACCESO	5
AD18T71W	ACCESO	5
AD18T71WC	ACCESO	5
AD18T71W-E	ACCESO	5
AD18T71WS	ACCESO	5
AD18T71WT	ACCESO	5
AD19U41W	ACCESO	5
AD19U41WC	ACCESO	5
AD19U51W	ACCESO	5
AD19U71W	ACCESO	5
AD19U71WC	ACCESO	5
AD19U71WS	ACCESO	5
AD20T41W	ACCESO	5
AD20T71W	ACCESO	5
AD21T21W	ACCESO	5
AD21T41W	ACCESO	5
AD21T41WC	ACCESO	5
AD21T41W-E	ACCESO	5
AD21T71W	ACCESO	5
AD21T71W-E	ACCESO	5
AD21T91R	ACCESO	5
AD21T91RE	ACCESO	5
AD21T91W	ACCESO	5
AD21T91W-E	ACCESO	5
ASAP100	TERAPÉUTICA	65
ASAPLP	TERAPÉUTICA	65
CAS100	ANGIOGRAFÍA	43

CAS200	ANGIOGRAFÍA	43
CCS100	ANGIOGRAFÍA	56
CCS101	ANGIOGRAFÍA	56
CCS200	ANGIOGRAFÍA	57
CCS201	ANGIOGRAFÍA	57
CCS320	ANGIOGRAFÍA	56
CCS321	ANGIOGRAFÍA	56
CCS460	ANGIOGRAFÍA	56
CCS461	ANGIOGRAFÍA	56
CCS600	ANGIOGRAFÍA	56
CCS601	ANGIOGRAFÍA	56
CCS800	ANGIOGRAFÍA	56
CCS801	ANGIOGRAFÍA	56
CCS880	ANGIOGRAFÍA	56
CCS881	ANGIOGRAFÍA	56
CCSB700	ANGIOGRAFÍA	57
CCSB701	ANGIOGRAFÍA	57
CCSB710	ANGIOGRAFÍA	57
CCSB711	ANGIOGRAFÍA	57
CCSB880	ANGIOGRAFÍA	57
CCSB881	ANGIOGRAFÍA	57
CCSB900	ANGIOGRAFÍA	57
CCSB901	ANGIOGRAFÍA	57
CCSB910	ANGIOGRAFÍA	57
CCSB911	ANGIOGRAFÍA	57
CCSW880	ANGIOGRAFÍA	57
CCSW881	ANGIOGRAFÍA	57
CCX010	ANGIOGRAFÍA	56
CCX011	ANGIOGRAFÍA	56
CCXB010	ANGIOGRAFÍA	57
CCXB011	ANGIOGRAFÍA	57
CGC5100AL1	TERAPÉUTICA	71
CGC5100AL1SH	TERAPÉUTICA	71
CGC5100AL2	TERAPÉUTICA	72
CGC5100AL2SH	TERAPÉUTICA	72
CGC5100AL3	TERAPÉUTICA	72
CGC5100AL75	TERAPÉUTICA	71
CGC5100AL75SH	TERAPÉUTICA	71
CGC5100AR1	TERAPÉUTICA	71
CGC5100AR1SH	TERAPÉUTICA	71
CGC5100AR2	TERAPÉUTICA	71
CGC5100AR2SH	TERAPÉUTICA	71
CGC5100AR3	TERAPÉUTICA	71
CGC5100EG	TERAPÉUTICA	73
CGC5100HS	TERAPÉUTICA	73
CGC5100HSSH	TERAPÉUTICA	73
CGC5100IM	TERAPÉUTICA	73
CGC5100IMSH	TERAPÉUTICA	73
CGC5100JL30	TERAPÉUTICA	67
CGC5100JL35	TERAPÉUTICA	67
CGC5100JL35SH	TERAPÉUTICA	67
CGC5100JL35ST	TERAPÉUTICA	67
(punta corta)		
CGC5100JL40	TERAPÉUTICA	67
CGC5100JL40SH	TERAPÉUTICA	67
CGC5100JL40ST	TERAPÉUTICA	67
(punta corta)		
CGC5100JL45	TERAPÉUTICA	67
CGC5100JL45SH	TERAPÉUTICA	67
CGC5100JL50	TERAPÉUTICA	67
CGC5100JL50SH	TERAPÉUTICA	67
CGC5100JR30	TERAPÉUTICA	66
CGC5100JR35	TERAPÉUTICA	66
CGC5100JR35SH	TERAPÉUTICA	66
CGC5100JR40	TERAPÉUTICA	66

CGC5100JR40SH	TERAPÉUTICA	66
CGC5100JR50	TERAPÉUTICA	66
CGC5100JR50SH	TERAPÉUTICA	66
CGC5100JR60	TERAPÉUTICA	66
CGC5100LCB	TERAPÉUTICA	72
CGC5100LCBSH	TERAPÉUTICA	72
CGC5100MP1	TERAPÉUTICA	72
CGC5100MP1SH	TERAPÉUTICA	72
CGC5100RCB	TERAPÉUTICA	73
CGC5100RCBSH	TERAPÉUTICA	73
CGC5100SBS30SH	TERAPÉUTICA	68
CGC5100SBS35	TERAPÉUTICA	68
CGC5100SBS35-M	TERAPÉUTICA	68
CGC5100SBS35-MSH	TERAPÉUTICA	68
CGC5100SBS35SH	TERAPÉUTICA	68
CGC5100SBS375	TERAPÉUTICA	68
CGC5100SBS375-M	TERAPÉUTICA	68
CGC5100SBS375SH	TERAPÉUTICA	68
CGC5100SBS40	TERAPÉUTICA	68
CGC5100SBS40SH	TERAPÉUTICA	68
CGC5100SBS45	TERAPÉUTICA	69
CGC5100SBS45-M	TERAPÉUTICA	69
CGC5100SBS45-MSH	TERAPÉUTICA	69
CGC5100SBS45SH	TERAPÉUTICA	69
CGC5100SBSLAD30	TERAPÉUTICA	70
CGC5100SBSLAD30SH	TERAPÉUTICA	70
CGC5100SBSLAD35	TERAPÉUTICA	70
CGC5100SBSLAD35SH	TERAPÉUTICA	70
CGC5100SBSLAD40	TERAPÉUTICA	70
CGC5100SBSLAD40SH	TERAPÉUTICA	70
CGC5100SBSLAD45	TERAPÉUTICA	70
CGC5100SBSLAD45SH	TERAPÉUTICA	70
CGC5100SBSRCA	TERAPÉUTICA	70
CGC5100SBSRCASH	TERAPÉUTICA	70
CGC5100ULT1	TERAPÉUTICA	74
CGC5100ULT2	TERAPÉUTICA	74
CGC5100ULT3	TERAPÉUTICA	74
CGC5100ULT4-T40	TERAPÉUTICA	74
CGC5100ULT4-T45	TERAPÉUTICA	74
CGC6100AL1	TERAPÉUTICA	71
CGC6100AL1SH	TERAPÉUTICA	71
CGC6100AL2	TERAPÉUTICA	72
CGC6100AL2SH	TERAPÉUTICA	72
CGC6100AL3	TERAPÉUTICA	72
CGC6100AL75	TERAPÉUTICA	71
CGC6100AL75SH	TERAPÉUTICA	71
CGC6100AR1	TERAPÉUTICA	71
CGC6100AR1SH	TERAPÉUTICA	71
CGC6100AR2	TERAPÉUTICA	71
CGC6100AR2SH	TERAPÉUTICA	71
CGC6100AR3	TERAPÉUTICA	71
CGC6100EG	TERAPÉUTICA	73
CGC6100HS	TERAPÉUTICA	73
CGC6100HSSH	TERAPÉUTICA	73
CGC6100IM	TERAPÉUTICA	73
CGC6100IMSH	TERAPÉUTICA	73
CGC6100JL30	TERAPÉUTICA	67
CGC6100JL35	TERAPÉUTICA	67
CGC6100JL35SH	TERAPÉUTICA	67
CGC6100JL35ST	TERAPÉUTICA	67
(punta corta)		
CGC6100JL40	TERAPÉUTICA	67
CGC6100JL40SH	TERAPÉUTICA	67
CGC6100JL40ST	TERAPÉUTICA	67
(punta corta)		

CGC6100JL45	TERAPÉUTICA	67
CGC6100JL45SH	TERAPÉUTICA	67
CGC6100JL50	TERAPÉUTICA	67
CGC6100JL50SH	TERAPÉUTICA	67
CGC6100JR30	TERAPÉUTICA	66
CGC6100JR35	TERAPÉUTICA	66
CGC6100JR35SH	TERAPÉUTICA	66
CGC6100JR40	TERAPÉUTICA	66
CGC6100JR40SH	TERAPÉUTICA	66
CGC6100JR50	TERAPÉUTICA	66
CGC6100JR50SH	TERAPÉUTICA	66
CGC6100JR60	TERAPÉUTICA	66
CGC6100LCB	TERAPÉUTICA	72
CGC6100LCBSH	TERAPÉUTICA	72
CGC6100MP1	TERAPÉUTICA	72
CGC6100MP1SH	TERAPÉUTICA	72
CGC6100RCB	TERAPÉUTICA	73
CGC6100RCBSH	TERAPÉUTICA	73
CGC6100BS30	TERAPÉUTICA	68
CGC6100BS30SH	TERAPÉUTICA	68
CGC6100BS35	TERAPÉUTICA	68
CGC6100BS35-M	TERAPÉUTICA	68
CGC6100BS35-MSH	TERAPÉUTICA	68
CGC6100BS35SH	TERAPÉUTICA	68
CGC6100BS375	TERAPÉUTICA	68
CGC6100BS375-M	TERAPÉUTICA	68
CGC6100BS375SH	TERAPÉUTICA	68
CGC6100BS40	TERAPÉUTICA	68
CGC6100BS40SH	TERAPÉUTICA	68
CGC6100BS45	TERAPÉUTICA	69
CGC6100BS45-M	TERAPÉUTICA	69
CGC6100BS45-MSH	TERAPÉUTICA	69
CGC6100BS45SH	TERAPÉUTICA	69
CGC6100BSLAD30	TERAPÉUTICA	70
CGC6100BSLAD30SH	TERAPÉUTICA	70
CGC6100BSLAD35	TERAPÉUTICA	70
CGC6100BSLAD35SH	TERAPÉUTICA	70
CGC6100BSLAD40	TERAPÉUTICA	70
CGC6100BSLAD40SH	TERAPÉUTICA	70
CGC6100BSLAD45	TERAPÉUTICA	70
CGC6100BSLAD45SH	TERAPÉUTICA	70
CGC6100BSRCA	TERAPÉUTICA	70
CGC6100BSRCASH	TERAPÉUTICA	70
CGC6100ULT1	TERAPÉUTICA	74
CGC6100ULT2	TERAPÉUTICA	74
CGC6100ULT3	TERAPÉUTICA	74
CGC6100ULT4-T40	TERAPÉUTICA	74
CGC6100ULT4-T45	TERAPÉUTICA	74
CGC7100AL1	TERAPÉUTICA	71
CGC7100AL1SH	TERAPÉUTICA	71
CGC7100AL2	TERAPÉUTICA	72
CGC7100AL2SH	TERAPÉUTICA	72
CGC7100AL3	TERAPÉUTICA	72
CGC7100AL75	TERAPÉUTICA	71
CGC7100AL75SH	TERAPÉUTICA	71
CGC7100AR1	TERAPÉUTICA	71
CGC7100AR1SH	TERAPÉUTICA	71
CGC7100AR2	TERAPÉUTICA	71
CGC7100AR2SH	TERAPÉUTICA	71
CGC7100AR3	TERAPÉUTICA	71
CGC7100EG	TERAPÉUTICA	73
CGC7100HS	TERAPÉUTICA	73
CGC7100HSSH	TERAPÉUTICA	73
CGC7100IM	TERAPÉUTICA	73
CGC7100IMSH	TERAPÉUTICA	73
CGC7100JL30	TERAPÉUTICA	67

CGC7100JL35	TERAPÉUTICA	67
CGC7100JL35SH	TERAPÉUTICA	67
CGC7100JL35ST	TERAPÉUTICA	67
(punta corta)		
CGC7100JL40	TERAPÉUTICA	67
CGC7100JL40SH	TERAPÉUTICA	67
CGC7100JL40ST	TERAPÉUTICA	67
(punta corta)		
CGC7100JL45	TERAPÉUTICA	67
CGC7100JL45SH	TERAPÉUTICA	67
CGC7100JL50	TERAPÉUTICA	67
CGC7100JL50SH	TERAPÉUTICA	67
CGC7100JR30	TERAPÉUTICA	66
CGC7100JR35	TERAPÉUTICA	66
CGC7100JR35SH	TERAPÉUTICA	66
CGC7100JR40	TERAPÉUTICA	66
CGC7100JR40SH	TERAPÉUTICA	66
CGC7100JR50	TERAPÉUTICA	66
CGC7100JR50SH	TERAPÉUTICA	66
CGC7100JR60	TERAPÉUTICA	66
CGC7100LCB	TERAPÉUTICA	72
CGC7100LCBSH	TERAPÉUTICA	72
CGC7100MP1	TERAPÉUTICA	72
CGC7100MP1SH	TERAPÉUTICA	72
CGC7100RCB	TERAPÉUTICA	73
CGC7100RCBSH	TERAPÉUTICA	73
CGC7100BS30	TERAPÉUTICA	68
CGC7100BS30SH	TERAPÉUTICA	68
CGC7100BS35	TERAPÉUTICA	68
CGC7100BS35-M	TERAPÉUTICA	68
CGC7100BS35-MSH	TERAPÉUTICA	68
CGC7100BS35SH	TERAPÉUTICA	68
CGC7100BS375	TERAPÉUTICA	68
CGC7100BS375-M	TERAPÉUTICA	68
CGC7100BS375SH	TERAPÉUTICA	68
CGC7100BS40	TERAPÉUTICA	68
CGC7100BS40SH	TERAPÉUTICA	68
CGC7100BS45	TERAPÉUTICA	69
CGC7100BS45-M	TERAPÉUTICA	69
CGC7100BS45-MSH	TERAPÉUTICA	69
CGC7100BS45SH	TERAPÉUTICA	69
CGC7100BSLAD30	TERAPÉUTICA	70
CGC7100BSLAD30SH	TERAPÉUTICA	70
CGC7100BSLAD35	TERAPÉUTICA	70
CGC7100BSLAD35SH	TERAPÉUTICA	70
CGC7100BSLAD40	TERAPÉUTICA	70
CGC7100BSLAD40SH	TERAPÉUTICA	70
CGC7100BSLAD45	TERAPÉUTICA	70
CGC7100BSLAD45SH	TERAPÉUTICA	70
CGC7100BSRCA	TERAPÉUTICA	70
CGC7100BSRCASH	TERAPÉUTICA	70
CGC7100ULT1	TERAPÉUTICA	74
CGC7100ULT2	TERAPÉUTICA	74
CGC7100ULT3	TERAPÉUTICA	74
CGC7100ULT4-T40	TERAPÉUTICA	74
CGC7100ULT4-T45	TERAPÉUTICA	74
CGC8100AL1	TERAPÉUTICA	71
CGC8100AL1SH	TERAPÉUTICA	71
CGC8100AL2	TERAPÉUTICA	72
CGC8100AL2SH	TERAPÉUTICA	72
CGC8100AL3	TERAPÉUTICA	72
CGC8100AL75	TERAPÉUTICA	71
CGC8100AL75SH	TERAPÉUTICA	71
CGC8100AR1	TERAPÉUTICA	71
CGC8100AR1SH	TERAPÉUTICA	71
CGC8100AR2	TERAPÉUTICA	71

CGC8100AR2SH	TERAPÉUTICA	71
CGC8100AR3	TERAPÉUTICA	71
CGC8100EG	TERAPÉUTICA	73
CGC8100HS	TERAPÉUTICA	73
CGC8100HSSH	TERAPÉUTICA	73
CGC8100IM	TERAPÉUTICA	73
CGC8100IMSH	TERAPÉUTICA	73
CGC8100JL30	TERAPÉUTICA	67
CGC8100JL35	TERAPÉUTICA	67
CGC8100JL35SH	TERAPÉUTICA	67
CGC8100JL35ST	TERAPÉUTICA	67
(punta corta)		
CGC8100JL40	TERAPÉUTICA	67
CGC8100JL40SH	TERAPÉUTICA	67
CGC8100JL40ST	TERAPÉUTICA	67
(punta corta)		
CGC8100JL45	TERAPÉUTICA	67
CGC8100JL45SH	TERAPÉUTICA	67
CGC8100JL50	TERAPÉUTICA	67
CGC8100JL50SH	TERAPÉUTICA	67
CGC8100JR30	TERAPÉUTICA	66
CGC8100JR35	TERAPÉUTICA	66
CGC8100JR35SH	TERAPÉUTICA	66
CGC8100JR40	TERAPÉUTICA	66
CGC8100JR40SH	TERAPÉUTICA	66
CGC8100JR50	TERAPÉUTICA	66
CGC8100JR50SH	TERAPÉUTICA	66
CGC8100JR60	TERAPÉUTICA	66
CGC8100LCB	TERAPÉUTICA	72
CGC8100LCBSH	TERAPÉUTICA	72
CGC8100MP1	TERAPÉUTICA	72
CGC8100MP1SH	TERAPÉUTICA	72
CGC8100RCB	TERAPÉUTICA	73
CGC8100RCBSH	TERAPÉUTICA	73
CGC8100SBS30	TERAPÉUTICA	68
CGC8100SBS30SH	TERAPÉUTICA	68
CGC8100SBS35	TERAPÉUTICA	68
CGC8100SBS35-M	TERAPÉUTICA	68
CGC8100SBS35-MSH	TERAPÉUTICA	68
CGC8100SBS35SH	TERAPÉUTICA	68
CGC8100SBS375	TERAPÉUTICA	68
CGC8100SBS375-M	TERAPÉUTICA	68
CGC8100SBS375SH	TERAPÉUTICA	68
CGC8100SBS40	TERAPÉUTICA	68
CGC8100SBS40SH	TERAPÉUTICA	68
CGC8100SBS45	TERAPÉUTICA	69
CGC8100SBS45-M	TERAPÉUTICA	69
CGC8100SBS45-MSH	TERAPÉUTICA	69
CGC8100SBS45SH	TERAPÉUTICA	69
CGC8100SBSLAD30	TERAPÉUTICA	70
CGC8100SBSLAD30SH	TERAPÉUTICA	70
CGC8100SBSLAD35	TERAPÉUTICA	70
CGC8100SBSLAD35SH	TERAPÉUTICA	70
CGC8100SBSLAD40	TERAPÉUTICA	70
CGC8100SBSLAD40SH	TERAPÉUTICA	70
CGC8100SBSLAD45	TERAPÉUTICA	70
CGC8100SBSLAD45SH	TERAPÉUTICA	70
CGC8100SBSRCA	TERAPÉUTICA	70
CGC8100SBSRCASH	TERAPÉUTICA	70
CLS-1006	ELECTROFISIOLOGÍA Y GESTIÓN DEL RITMO CARDÍACO	91
CLS-1007	ELECTROFISIOLOGÍA Y GESTIÓN DEL RITMO CARDÍACO	91
CLS-1008	ELECTROFISIOLOGÍA Y GESTIÓN DEL RITMO CARDÍACO	91

CLS-1009	ELECTROFISIOLOGÍA Y GESTIÓN DEL RITMO CARDÍACO	91
CLS-1009.5	ELECTROFISIOLOGÍA Y GESTIÓN DEL RITMO CARDÍACO	91
CLS-1010	ELECTROFISIOLOGÍA Y GESTIÓN DEL RITMO CARDÍACO	91
CLS-1010.5	ELECTROFISIOLOGÍA Y GESTIÓN DEL RITMO CARDÍACO	91
CLS-1011	ELECTROFISIOLOGÍA Y GESTIÓN DEL RITMO CARDÍACO	91
CLS-1012	ELECTROFISIOLOGÍA Y GESTIÓN DEL RITMO CARDÍACO	91
CLS-1012.5	ELECTROFISIOLOGÍA Y GESTIÓN DEL RITMO CARDÍACO	91
CLS-2506	ELECTROFISIOLOGÍA Y GESTIÓN DEL RITMO CARDÍACO	91
CLS-2507	ELECTROFISIOLOGÍA Y GESTIÓN DEL RITMO CARDÍACO	91
CLS-2508	ELECTROFISIOLOGÍA Y GESTIÓN DEL RITMO CARDÍACO	91
CLS-2509	ELECTROFISIOLOGÍA Y GESTIÓN DEL RITMO CARDÍACO	91
CLS-2510	ELECTROFISIOLOGÍA Y GESTIÓN DEL RITMO CARDÍACO	91
CLS-2510.5	ELECTROFISIOLOGÍA Y GESTIÓN DEL RITMO CARDÍACO	91
CLS-2511	ELECTROFISIOLOGÍA Y GESTIÓN DEL RITMO CARDÍACO	91
DUG100	SOLUCIONES PARA EL PROCEDIMIENTO COMPLETO	104
DUG155	SOLUCIONES PARA EL PROCEDIMIENTO COMPLETO	104
FAS1048	ANGIOGRAFÍA	42
FAS1060	ANGIOGRAFÍA	42
FAS1072	ANGIOGRAFÍA	42
FAS1108	ANGIOGRAFÍA	42
FAS1160	ANGIOGRAFÍA	42
FAS1172	ANGIOGRAFÍA	42
FAS1260	ANGIOGRAFÍA	42
FAS1272	ANGIOGRAFÍA	42
FAS2572	ANGIOGRAFÍA	43
FAS3072	ANGIOGRAFÍA	43
FAS4048	ANGIOGRAFÍA	42
FAS4060	ANGIOGRAFÍA	42
FAS4072	ANGIOGRAFÍA	42
FAS4108	ANGIOGRAFÍA	42
FAS5048	ANGIOGRAFÍA	42
FAS5060	ANGIOGRAFÍA	42
FAS5072	ANGIOGRAFÍA	42
FAS5108	ANGIOGRAFÍA	42
FAS5248	ANGIOGRAFÍA	42
FAS6072	ANGIOGRAFÍA	44
FCD100	HEMOSTASIA	84
FCD200	HEMOSTASIA	84
FCL-160-00	ELECTROFISIOLOGÍA Y GESTIÓN DEL RITMO CARDÍACO	87
FCL-160-01	ELECTROFISIOLOGÍA Y GESTIÓN DEL RITMO CARDÍACO	87
FCL-160-02	ELECTROFISIOLOGÍA Y GESTIÓN DEL RITMO CARDÍACO	87
FCL-160-03	ELECTROFISIOLOGÍA Y GESTIÓN DEL RITMO CARDÍACO	87
FCL-160-04	ELECTROFISIOLOGÍA Y GESTIÓN DEL RITMO CARDÍACO	87
FCL-160-05	ELECTROFISIOLOGÍA Y GESTIÓN DEL RITMO CARDÍACO	87
FCL-160-06	ELECTROFISIOLOGÍA Y GESTIÓN DEL RITMO CARDÍACO	87

FCL-160-07	ELECTROFISIOLOGÍA Y GESTIÓN DEL RITMO CARDÍACO	87
FCL-160-08	ELECTROFISIOLOGÍA Y GESTIÓN DEL RITMO CARDÍACO	87
FCL-160-09	ELECTROFISIOLOGÍA Y GESTIÓN DEL RITMO CARDÍACO	87
FCL-160-10	ELECTROFISIOLOGÍA Y GESTIÓN DEL RITMO CARDÍACO	87
FND-019-00	ELECTROFISIOLOGÍA Y GESTIÓN DEL RITMO CARDÍACO	88
FND-019-01	ELECTROFISIOLOGÍA Y GESTIÓN DEL RITMO CARDÍACO	88
FND-019-02	ELECTROFISIOLOGÍA Y GESTIÓN DEL RITMO CARDÍACO	88
FND-019-03	ELECTROFISIOLOGÍA Y GESTIÓN DEL RITMO CARDÍACO	88
FND-019-04	ELECTROFISIOLOGÍA Y GESTIÓN DEL RITMO CARDÍACO	88
FND-019-05	ELECTROFISIOLOGÍA Y GESTIÓN DEL RITMO CARDÍACO	88
FND-019-06	ELECTROFISIOLOGÍA Y GESTIÓN DEL RITMO CARDÍACO	88
FST-085-00	ELECTROFISIOLOGÍA Y GESTIÓN DEL RITMO CARDÍACO	89
FST-085-01	ELECTROFISIOLOGÍA Y GESTIÓN DEL RITMO CARDÍACO	89
FST-085-02	ELECTROFISIOLOGÍA Y GESTIÓN DEL RITMO CARDÍACO	89
H1FLC	ANGIOGRAFÍA	54
H1RC	ANGIOGRAFÍA	54
H1SNC	ANGIOGRAFÍA	54
H3FLC	ANGIOGRAFÍA	54
H3RLC	ANGIOGRAFÍA	54
H3RRC	ANGIOGRAFÍA	54
H3SNC	ANGIOGRAFÍA	54
H4FLC	ANGIOGRAFÍA	54
H4RRC	ANGIOGRAFÍA	54
H4SNC	ANGIOGRAFÍA	54
HP5100E	ANGIOGRAFÍA	45
HP5101E	ANGIOGRAFÍA	45
HP5200E	ANGIOGRAFÍA	45
HP5201E	ANGIOGRAFÍA	45
HP5300E	ANGIOGRAFÍA	45
HP5301E	ANGIOGRAFÍA	45
HP5480E	ANGIOGRAFÍA	45
HP5481E	ANGIOGRAFÍA	45
HP9100E	ANGIOGRAFÍA	45
HP9101E	ANGIOGRAFÍA	45
HP9200E	ANGIOGRAFÍA	45
HP9201E	ANGIOGRAFÍA	45
HP9300E	ANGIOGRAFÍA	45
HP9301E	ANGIOGRAFÍA	45
HP9480E	ANGIOGRAFÍA	45
HP9481E	ANGIOGRAFÍA	45
HP9720E	ANGIOGRAFÍA	45
HP9721E	ANGIOGRAFÍA	45
HPC100E	ANGIOGRAFÍA	45
HPC101E	ANGIOGRAFÍA	45
HPC200E	ANGIOGRAFÍA	45
HPC201E	ANGIOGRAFÍA	45
HPC300E	ANGIOGRAFÍA	45
HPC301E	ANGIOGRAFÍA	45
HPC390E	ANGIOGRAFÍA	45
HPC391E	ANGIOGRAFÍA	45
HPC480E	ANGIOGRAFÍA	45
HPC481E	ANGIOGRAFÍA	45
HPC590E	ANGIOGRAFÍA	45
HPC591E	ANGIOGRAFÍA	45

HPC720E	ANGIOGRAFÍA	45
HPC721E	ANGIOGRAFÍA	45
HPF100E	ANGIOGRAFÍA	45
HPF101E	ANGIOGRAFÍA	45
HPF200E	ANGIOGRAFÍA	45
HPF200K	ANGIOGRAFÍA	45
HPF201E	ANGIOGRAFÍA	45
HPF201K	ANGIOGRAFÍA	45
HPF300E	ANGIOGRAFÍA	45
HPF300K	ANGIOGRAFÍA	45
HPF301E	ANGIOGRAFÍA	45
HPF301K	ANGIOGRAFÍA	45
HPF480E	ANGIOGRAFÍA	45
HPF480K	ANGIOGRAFÍA	45
HPF481E	ANGIOGRAFÍA	45
HPF481K	ANGIOGRAFÍA	45
HPF600K	ANGIOGRAFÍA	45
HPF601K	ANGIOGRAFÍA	45
HPF720E	ANGIOGRAFÍA	45
HPF720K	ANGIOGRAFÍA	45
HPF721E	ANGIOGRAFÍA	45
HPF721K	ANGIOGRAFÍA	45
HPT100E	ANGIOGRAFÍA	45
HPT101E	ANGIOGRAFÍA	45
HPT200E	ANGIOGRAFÍA	45
HPT201E	ANGIOGRAFÍA	45
HPT300E	ANGIOGRAFÍA	45
HPT301E	ANGIOGRAFÍA	45
HPT480E	ANGIOGRAFÍA	45
HPT481E	ANGIOGRAFÍA	45
HPT590E	ANGIOGRAFÍA	45
HPT591E	ANGIOGRAFÍA	45
IN4330	TERAPÉUTICA	77
IN4352	TERAPÉUTICA	77
IN4530	TERAPÉUTICA	77
IN4802	TERAPÉUTICA	77
IN7130	TERAPÉUTICA	79
IN7152	TERAPÉUTICA	79
IN7352	TERAPÉUTICA	79
IN8100	TERAPÉUTICA	78
IN8152	TERAPÉUTICA	78
IN8302	TERAPÉUTICA	78
IN8352	TERAPÉUTICA	78
IN8353	TERAPÉUTICA	78
IN8802	TERAPÉUTICA	78
IQ35F150J3	ANGIOGRAFÍA	37
IQ35F210J1O5	ANGIOGRAFÍA	37
IQ35F210J3	ANGIOGRAFÍA	37
K05-00807A	TERAPÉUTICA	77
K05-00808	TERAPÉUTICA	77
K05-00812	TERAPÉUTICA	77
K05-01840	TERAPÉUTICA	77
K05-02286	TERAPÉUTICA	77
K05-02680	TERAPÉUTICA	78
K08-00006	ANGIOGRAFÍA	50
K08-00077B	ANGIOGRAFÍA	40
K08-00078A	ANGIOGRAFÍA	40
K08-00417B	ANGIOGRAFÍA	40
K08-00422D	ANGIOGRAFÍA	39
K08-00577	ANGIOGRAFÍA	41
K08-00685A	ANGIOGRAFÍA	50
K08-00719	ANGIOGRAFÍA	41
K08-01859	ANGIOGRAFÍA	43
K08-01878B	ANGIOGRAFÍA	41
K08-02181	ANGIOGRAFÍA	42

PAL225	SOLUCIONES PARA EL PROCEDIMIENTO COMPLETO	106
PAL250	SOLUCIONES PARA EL PROCEDIMIENTO COMPLETO	106
PAL300	SOLUCIONES PARA EL PROCEDIMIENTO COMPLETO	106
PAL325	SOLUCIONES PARA EL PROCEDIMIENTO COMPLETO	106
PAL350	SOLUCIONES PARA EL PROCEDIMIENTO COMPLETO	106
PAL400	SOLUCIONES PARA EL PROCEDIMIENTO COMPLETO	106
PAL425	SOLUCIONES PARA EL PROCEDIMIENTO COMPLETO	106
PAL450	SOLUCIONES PARA EL PROCEDIMIENTO COMPLETO	106
PAL500	SOLUCIONES PARA EL PROCEDIMIENTO COMPLETO	107
PAL600	SOLUCIONES PARA EL PROCEDIMIENTO COMPLETO	107
PAL700	SOLUCIONES PARA EL PROCEDIMIENTO COMPLETO	107
PC101	SOLUCIONES PARA EL PROCEDIMIENTO COMPLETO	101
PC201	SOLUCIONES PARA EL PROCEDIMIENTO COMPLETO	101
PC801	SOLUCIONES PARA EL PROCEDIMIENTO COMPLETO	101
PC802	SOLUCIONES PARA EL PROCEDIMIENTO COMPLETO	101
PC803EU	SOLUCIONES PARA EL PROCEDIMIENTO COMPLETO	101
PC804EU	SOLUCIONES PARA EL PROCEDIMIENTO COMPLETO	101
PHR4F11018NTPD	ACCESO	9
PHR4F11018SC	ACCESO	9
PHR4F11021PW	ACCESO	9
PHR4F11021SC	ACCESO	9
PHR4F11025PW	ACCESO	9
PHR4F16018NT	ACCESO	9
PHR4F16021SC	ACCESO	9
PHR4F16025PW	ACCESO	9
PHR4F23018NT	ACCESO	9
PHR4F23021PW	ACCESO	9
PHR4F23021SC	ACCESO	9
PHR4F7018SC	ACCESO	9
PHR5F11018NTPD	ACCESO	9
PHR5F11018SC	ACCESO	9
PHR5F11021PW	ACCESO	9
PHR5F11021SC	ACCESO	9
PHR5F11021SCSN	ACCESO	9
PHR5F11025PW	ACCESO	9
PHR5F16018NT	ACCESO	9
PHR5F16021SC	ACCESO	9
PHR5F16025PW	ACCESO	9
PHR5F23018NT	ACCESO	9
PHR5F23021PW	ACCESO	9
PHR5F23021SC	ACCESO	9
PHR5F7018SC	ACCESO	9
PHR6F11018NTPD	ACCESO	9
PHR6F11018SC	ACCESO	9
PHR6F11021PW	ACCESO	9
PHR6F11021SC	ACCESO	9
PHR6F11021SCSN	ACCESO	9
PHR6F11025PW	ACCESO	9
PHR6F11035SC	ACCESO	9
PHR6F16018NT	ACCESO	9
PHR6F16021SC	ACCESO	9

PHR6F16025PW	ACCESO	9
PHR6F23018NT	ACCESO	9
PHR6F23021PW	ACCESO	9
PHR6F23021SC	ACCESO	9
PHR6F7018SC	ACCESO	9
PHR7F11018SC	ACCESO	9
PHR7F11021SC	ACCESO	9
PHR7F11035SC	ACCESO	9
PHR7F16018NT	ACCESO	9
PHR7F16021SC	ACCESO	9
PHR7F23018NT	ACCESO	9
PHR7F23021SC	ACCESO	9
PIB1000	ANGIOGRAFÍA	47
PIB500	ANGIOGRAFÍA	47
PLS-1006	ELECTROFISIOLOGÍA Y GESTIÓN DEL RITMO CARDÍACO	90
PLS-1007	ELECTROFISIOLOGÍA Y GESTIÓN DEL RITMO CARDÍACO	90
PLS-1008	ELECTROFISIOLOGÍA Y GESTIÓN DEL RITMO CARDÍACO	90
PLS-1008.5	ELECTROFISIOLOGÍA Y GESTIÓN DEL RITMO CARDÍACO	90
PLS-1009	ELECTROFISIOLOGÍA Y GESTIÓN DEL RITMO CARDÍACO	90
PLS-1009.5	ELECTROFISIOLOGÍA Y GESTIÓN DEL RITMO CARDÍACO	90
PLS-1010	ELECTROFISIOLOGÍA Y GESTIÓN DEL RITMO CARDÍACO	90
PLS-1010.5	ELECTROFISIOLOGÍA Y GESTIÓN DEL RITMO CARDÍACO	90
PLS-1011	ELECTROFISIOLOGÍA Y GESTIÓN DEL RITMO CARDÍACO	90
PLS-1012	ELECTROFISIOLOGÍA Y GESTIÓN DEL RITMO CARDÍACO	90
PLS-1012.5	ELECTROFISIOLOGÍA Y GESTIÓN DEL RITMO CARDÍACO	90
PLS-2506	ELECTROFISIOLOGÍA Y GESTIÓN DEL RITMO CARDÍACO	90
PLS-2507	ELECTROFISIOLOGÍA Y GESTIÓN DEL RITMO CARDÍACO	90
PLS-2508	ELECTROFISIOLOGÍA Y GESTIÓN DEL RITMO CARDÍACO	90
PLS-2509	ELECTROFISIOLOGÍA Y GESTIÓN DEL RITMO CARDÍACO	90
PLS-2510	ELECTROFISIOLOGÍA Y GESTIÓN DEL RITMO CARDÍACO	90
PLS-2510.5	ELECTROFISIOLOGÍA Y GESTIÓN DEL RITMO CARDÍACO	90
PLS-2511	ELECTROFISIOLOGÍA Y GESTIÓN DEL RITMO CARDÍACO	90
PLSX-1006	ELECTROFISIOLOGÍA Y GESTIÓN DEL RITMO CARDÍACO	90
PLSX-1007	ELECTROFISIOLOGÍA Y GESTIÓN DEL RITMO CARDÍACO	90
PLSX-1008	ELECTROFISIOLOGÍA Y GESTIÓN DEL RITMO CARDÍACO	90
PLSX-1008.5	ELECTROFISIOLOGÍA Y GESTIÓN DEL RITMO CARDÍACO	90
PLSX-1009	ELECTROFISIOLOGÍA Y GESTIÓN DEL RITMO CARDÍACO	90
PLSX-1009.5	ELECTROFISIOLOGÍA Y GESTIÓN DEL RITMO CARDÍACO	90
PLSX-1010	ELECTROFISIOLOGÍA Y GESTIÓN DEL RITMO CARDÍACO	90
PLSX-1010.5	ELECTROFISIOLOGÍA Y GESTIÓN DEL RITMO CARDÍACO	90
PLSX-1011	ELECTROFISIOLOGÍA Y GESTIÓN DEL RITMO CARDÍACO	90

PLSX-1012	ELECTROFISIOLOGÍA Y GESTIÓN DEL RITMO CARDÍACO	90
PLSX-1012.5	ELECTROFISIOLOGÍA Y GESTIÓN DEL RITMO CARDÍACO	90
PLSX-2506	ELECTROFISIOLOGÍA Y GESTIÓN DEL RITMO CARDÍACO	90
PLSX-2507	ELECTROFISIOLOGÍA Y GESTIÓN DEL RITMO CARDÍACO	90
PLSX-2508	ELECTROFISIOLOGÍA Y GESTIÓN DEL RITMO CARDÍACO	90
PLSX-2509	ELECTROFISIOLOGÍA Y GESTIÓN DEL RITMO CARDÍACO	90
PLSX-2510	ELECTROFISIOLOGÍA Y GESTIÓN DEL RITMO CARDÍACO	90
PLSX-2510.5	ELECTROFISIOLOGÍA Y GESTIÓN DEL RITMO CARDÍACO	90
PLSX-2511	ELECTROFISIOLOGÍA Y GESTIÓN DEL RITMO CARDÍACO	90
PM6006	ANGIOGRAFÍA	46
PM6012	ANGIOGRAFÍA	46
PM6024	ANGIOGRAFÍA	46
PM6036	ANGIOGRAFÍA	46
PM6048	ANGIOGRAFÍA	46
PM6060	ANGIOGRAFÍA	46
PM6072	ANGIOGRAFÍA	46
PM6106	ANGIOGRAFÍA	46
PM6112	ANGIOGRAFÍA	46
PM6124	ANGIOGRAFÍA	46
PM6136	ANGIOGRAFÍA	46
PM6148	ANGIOGRAFÍA	46
PM6160	ANGIOGRAFÍA	46
PM6172	ANGIOGRAFÍA	46
PM6184	ANGIOGRAFÍA	46
PM6196	ANGIOGRAFÍA	46
PRO-4F-11	ACCESO	11
PRO-4F-11-018NT7	ACCESO	10
PRO-4F-11-035	ACCESO	11
PRO-5F-11	ACCESO	11
PRO-5F-11-018NT7	ACCESO	10
PRO-5F-11-035	ACCESO	11
PRO-5F-11-038	ACCESO	11
PRO-5F-11-038-18G	ACCESO	12
PRO-6F-11	ACCESO	11
PRO-6F-11-018NT7	ACCESO	10
PRO-6F-11-035	ACCESO	11
PRO-6F-11-038	ACCESO	11
PRO-6F-11-038-18G	ACCESO	12
PRO-7F-11	ACCESO	11
PRO-7F-11-018NT7	ACCESO	10
PRO-7F-11-035	ACCESO	11
PRO-7F-11-038	ACCESO	11
PRO-8F-11	ACCESO	11
PRO-8F-11-035	ACCESO	11
PRO-8F-11-038	ACCESO	11
PSI-4F-11	ACCESO	13
PSI-4F-11-018	ACCESO	10
PSI-4F-11-018NT4	ACCESO	10
PSI-4F-11-025	ACCESO	10
PSI-4F-11-035	ACCESO	13
PSI-4F-11-035ACT	ACCESO	15
PSI-4F-11ACT	ACCESO	15
PSI-4F-23	ACCESO	14
PSI-4F-23-018NT4	ACCESO	10
PSI-4F-23-018NT7	ACCESO	10
PSI-4F-23-035	ACCESO	14
PSI-4F-7-018	ACCESO	10


PSI-4F-7-018NT4	ACCESO	10
PSI-4F-7-025	ACCESO	10
PSI-5F-11	ACCESO	13
PSI-5F-11-018	ACCESO	10
PSI-5F-11-018NT4	ACCESO	10
PSI-5F-11-025	ACCESO	10
PSI-5F-11-035	ACCESO	13
PSI-5F-11-035-18G	ACCESO	12
PSI-5F-11-038	ACCESO	13
PSI-5F-11-038-18G	ACCESO	12
PSI-5F-11-038ACT	ACCESO	15
PSI-5F-11ACT	ACCESO	15
PSI-5F-23	ACCESO	14
PSI-5F-23-018NT4	ACCESO	10
PSI-5F-23-018NT7	ACCESO	10
PSI-5F-23-035	ACCESO	14
PSI-5F-23-038	ACCESO	14
PSI-5F-7-018	ACCESO	10
PSI-5F-7-018NT4	ACCESO	10
PSI-5F-7-025	ACCESO	10
PSI-6F-11	ACCESO	13
PSI-6F-11-018	ACCESO	10
PSI-6F-11-018NT4	ACCESO	10
PSI-6F-11-025	ACCESO	10
PSI-6F-11-035	ACCESO	13
PSI-6F-11-035-18G	ACCESO	12
PSI-6F-11-038	ACCESO	13
PSI-6F-11-038-18G	ACCESO	12
PSI-6F-11-038ACT	ACCESO	15
PSI-6F-11ACT	ACCESO	15
PSI-6F-23	ACCESO	14
PSI-6F-23-018NT4	ACCESO	10
PSI-6F-23-018NT7	ACCESO	10
PSI-6F-23-035	ACCESO	14
PSI-6F-23-038	ACCESO	14
PSI-6F-7-018	ACCESO	10
PSI-6F-7-018NT4	ACCESO	10
PSI-6F-7-025	ACCESO	10
PSI-7F-11	ACCESO	13
PSI-7F-11-018	ACCESO	10
PSI-7F-11-035	ACCESO	13
PSI-7F-11-035-18G	ACCESO	12
PSI-7F-11-038	ACCESO	13
PSI-7F-11-038-18G	ACCESO	12
PSI-7F-11-038ACT	ACCESO	15
PSI-7F-11ACT	ACCESO	15
PSI-7F-23	ACCESO	14
PSI-7F-23-018NT4	ACCESO	10
PSI-7F-23-035	ACCESO	14
PSI-7F-23-038	ACCESO	14
PSI-7F-7-018	ACCESO	10
PSI-8F-11	ACCESO	13
PSI-8F-11-035	ACCESO	13
PSI-8F-11-035-18G	ACCESO	12
PSI-8F-11-038	ACCESO	13
PSI-8F-11-038-18G	ACCESO	12
PSI-8F-11-038ACT	ACCESO	15

PSI-8F-11ACT	ACCESO	15
PSI-8F-23	ACCESO	14
PSI-8F-23-035	ACCESO	14
PSI-8F-23-038	ACCESO	14
RADCDO	HEMOSTASIA	84
RADCDS	HEMOSTASIA	84
RADMPP-1	ANGIOGRAFÍA	32
RADMPP-10	ANGIOGRAFÍA	32
RADMPP-11	ANGIOGRAFÍA	32
RADMPP-12	ANGIOGRAFÍA	32
RADMPP-2	ANGIOGRAFÍA	32
RADMPP-3	ANGIOGRAFÍA	32
RADMPP-4	ANGIOGRAFÍA	32
RADMPP-5	ANGIOGRAFÍA	32
RADMPP-6	ANGIOGRAFÍA	32
RADMPP-7	ANGIOGRAFÍA	32
RADMPP-8	ANGIOGRAFÍA	32
RADMPP-9	ANGIOGRAFÍA	32
RADSRT	HEMOSTASIA	84
RADSTD	HEMOSTASIA	84
RB100	ACCESO	3
RBX	ACCESO	3
RR811	ACCESO	4
RT913	ACCESO	4
RXPOR	ANGIOGRAFÍA	58
S1FLC	ANGIOGRAFÍA	54
S1SLC	ANGIOGRAFÍA	54
S1SNC	ANGIOGRAFÍA	54
S3FC	ANGIOGRAFÍA	54
S3FLC	ANGIOGRAFÍA	54
S3SLC	ANGIOGRAFÍA	54
S3SNC	ANGIOGRAFÍA	54
S4FLC	ANGIOGRAFÍA	54
S4SLC	ANGIOGRAFÍA	54
S4SNC	ANGIOGRAFÍA	54
SGR26	HEMOSTASIA	83
SL18T71W	ACCESO	7
SL18T71WS	ACCESO	7
SL21T71W	ACCESO	7
SL21T71WS	ACCESO	7
SMS210	ACCESO	8
SMS211	ACCESO	8
SMS215	ACCESO	8
SS10	SOLUCIONES PARA EL PROCEDIMIENTO COMPLETO	104
SS20	SOLUCIONES PARA EL PROCEDIMIENTO COMPLETO	105
SS30	SOLUCIONES PARA EL PROCEDIMIENTO COMPLETO	105
ST320	ANGIOGRAFÍA	56
ST321	ANGIOGRAFÍA	56
ST600	ANGIOGRAFÍA	56
ST601	ANGIOGRAFÍA	56
ST800	ANGIOGRAFÍA	56
ST801	ANGIOGRAFÍA	56
SW21A45PW	ACCESO	16

SW21A80PW	ACCESO	16
SW25A45PW	ACCESO	16
SW25A80PW	ACCESO	16
SW35DE50SST	ACCESO	16
SW35DE80SST	ACCESO	16
SW38DE50SST	ACCESO	16
SW38DE80SST	ACCESO	16
TD100	ANGIOGRAFÍA	38
TD200	TERAPÉUTICA	75
TD200	ANGIOGRAFÍA	38
TD500	ANGIOGRAFÍA	38
TD500	TERAPÉUTICA	75
U3RRC	ANGIOGRAFÍA	54
VAC110	ANGIOGRAFÍA	58
VAC120	ANGIOGRAFÍA	58
VAC130	ANGIOGRAFÍA	58
VAC160	ANGIOGRAFÍA	58
WOR-CSG-B1-09	ELECTROFISIOLOGÍA Y GESTIÓN DEL RITMO CARDÍACO	92
WOR-CSG-B2-09	ELECTROFISIOLOGÍA Y GESTIÓN DEL RITMO CARDÍACO	92
WOR-CSG-BL1-09	ELECTROFISIOLOGÍA Y GESTIÓN DEL RITMO CARDÍACO	92
WORLVI-75-5-62-07-HO	ELECTROFISIOLOGÍA Y GESTIÓN DEL RITMO CARDÍACO	92
WORLVI-75-5-62-07-HS	ELECTROFISIOLOGÍA Y GESTIÓN DEL RITMO CARDÍACO	92
WORLVI-75-5-62-07-MP	ELECTROFISIOLOGÍA Y GESTIÓN DEL RITMO CARDÍACO	92
WORLVI-75-5-62-07-RE	ELECTROFISIOLOGÍA Y GESTIÓN DEL RITMO CARDÍACO	92


ÍNDICE DE NOMBRES DE PRODUCTO

Adaptadores rotatorios sin aire	55	Prelude Guías	16
ASAP® Catéter de aspiración	65	Prelude Introduectores con aguja Merit Advance®	12
ASAPLP™ Catéter de aspiración	65	Prelude Introduectores de 11 cm	13
BackStop+™ y MiniStop+™ Sistemas de descarte	104	Prelude Introduectores de 23 cm	14
BackStop® y MiniStop® Sistemas de descarte	104	Prelude Obturadores	16
Bandeja para angiografía 1	97	Prelude SNAP™ Introduectores pelables	90
Bandeja para angiografía 2	98	Prelude®- miniacceso Introduectores de acceso radial	10
Bandeja para angiografía 3	99	PreludeEASE™ Introduectores hidrofílicos	9
BasixCOMPAK™ Dispositivos de inflado	77	PreludePRO™ Introduectores	11
BasixTOUCH™ Dispositivos de inflado	78	Rad Board Accesorios	3-4
Blue Diamond™ Dispositivos de inflado	79	Rad Board Xtra™	3
CCS™ Jeringas de control coronario	56-57	Rad Board® Apoyabrazos de acceso radial	3
Classic Sheath™ Introduectores hemostáticos pelables	91	Rad Rest®	4
Clipper Soporte	62	Rad Trac®	4
ConcierGE® Catéteres guía de calidad superior	66-74	RADstat® Sistema de compresión de arteria radial	84
Devos™ Manifolds	50	Right Heart Kits de respuesta rápida	53
Directorio de catéteres	17	RXP® Jeringas de lavado	58
Drape Armour® - Escudos de protección posicional	103	SafeGuard Radial™ Dispositivo de compresión	83
DugOut® Recipientes cerrados para desechos	104	SafeGuard® Dispositivo para compresión asistida	83
Equipos de angiografía personalizados	100	SeaDragon™ Dispositivo de torque	38
Finale® Dispositivo de compresión radial	84	Sets de administración de fluidos	42-44
Futura® Bisturíes de seguridad	8	ShortStop Advantage® Descartador de elementos cortopunzantes	105
HeartSpan Aguja transeptales	88	ShortStop Grandstand® Descartador de elementos ortopunzantes	105
HeartSpan Introduectores dirigibles	8,5 89	ShortStop® Descartador de elementos cortopunzantes	104
HeartSpan® Introduectores transeptales de curva fija	87	Sistemas de administración de contraste	40-41
Ilustraciones de formas de catéteres	19-20	Sistemas de administración de contraste a presión	50
InQwire® Guías diagnósticas	37	Torq™ H2O Dispositivos de torque	38
Kits de pericardiocentesis	101	TRAM® Manifolds con transductor integrado	51
Manta para paciente Paños radiales	102	TRAM-P™ Manifolds con transductor integrado	52
MAP™ Paquetes de angioplastia de Merit	76	Tubos de alta presión	45
Marquis® Llave	54	Tubos de monitorización de presión	46
Merit Advance® Aguja angiográfica	5	VacLok® Jeringa de vacío	58
Merit Advance® Aguja angiográfica de seguridad	7	Válvulas y accesorios hemostáticos	75
Merit Laureate® Guías hidrofílicas	37	Worley (CSG) Catéteres para seno coronario	92
Merit® Manifolds	48-49	Worley (LVI) Introduectores de vena lateral	92
Meritrans Cable reutilizable	62	Worley Equipos avanzados de administración de medio de contraste	93
Meritrans Organizador	62	Worley Selectores de venas	93
Meritrans® Transductores de presión	59-62	Worley™ Sistema avanzado de administración LV	92-94
Miser® Sistema de administración de contraste	39		
Ostial PRO® Sistema de posicionamiento de stents	80		
PAL Bolígrafo	107		
PAL Etiquetas personalizadas	108		
PAL™ (bolígrafo y etiquetas)	106-107		
Performa® Catéteres para diagnóstico cardiológico	21-36		
PIB Bolsas infusoras de presión	47		
Prelude ACT™ Introduectores	15		

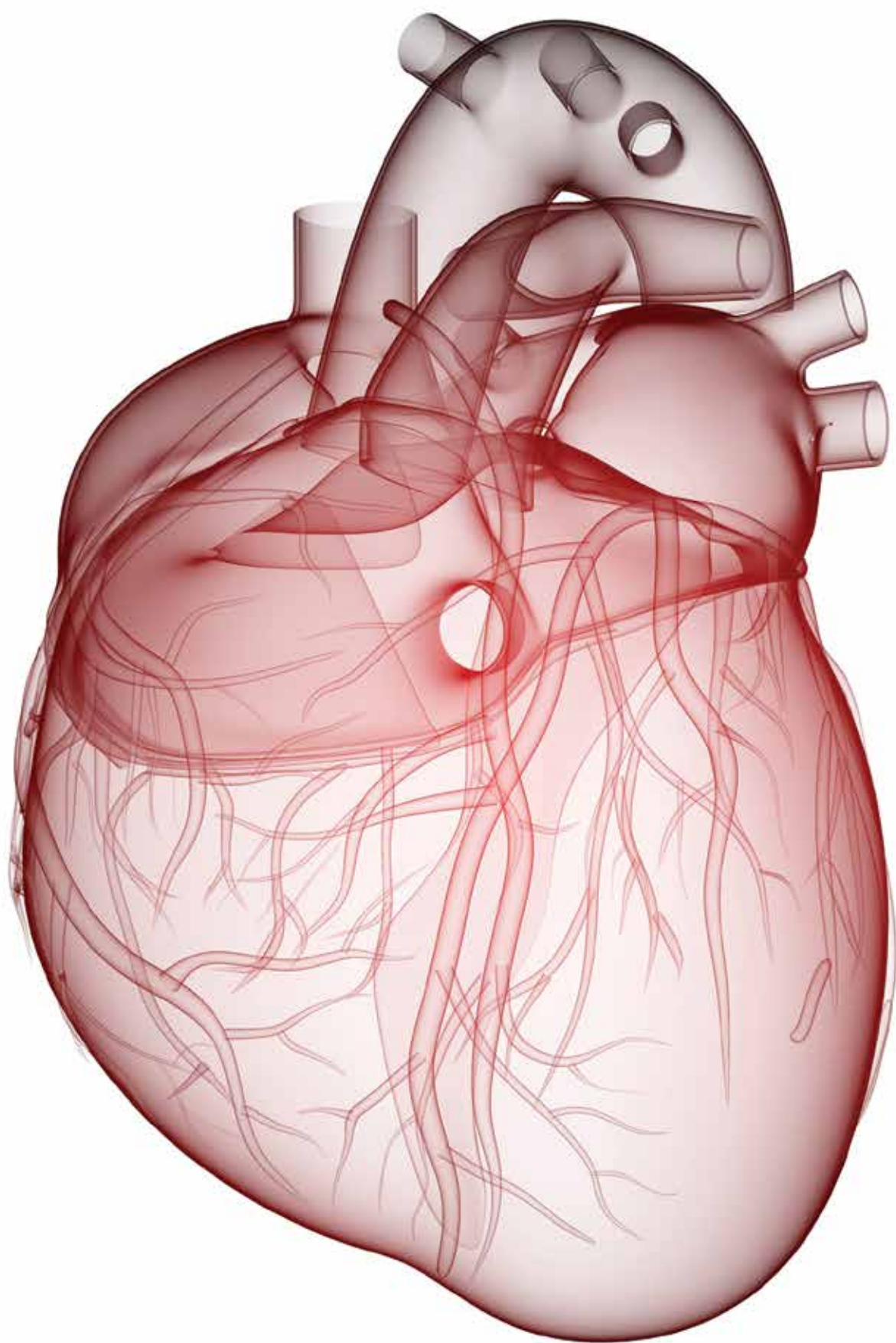

UNDERSTAND. INNOVATE. DELIVER.™

Merit Medical Systems es líder mundial en desarrollo, fabricación y distribución de dispositivos médicos de calidad, utilizados en procedimientos de intervención y diagnóstico. Gracias a la mano de obra global y a sus vanguardistas instalaciones de fabricación, equipadas con la más avanzada tecnología, Merit Medical produce sistemáticamente productos de calidad, respaldados por un servicio al cliente y una experiencia profesional excelentes.

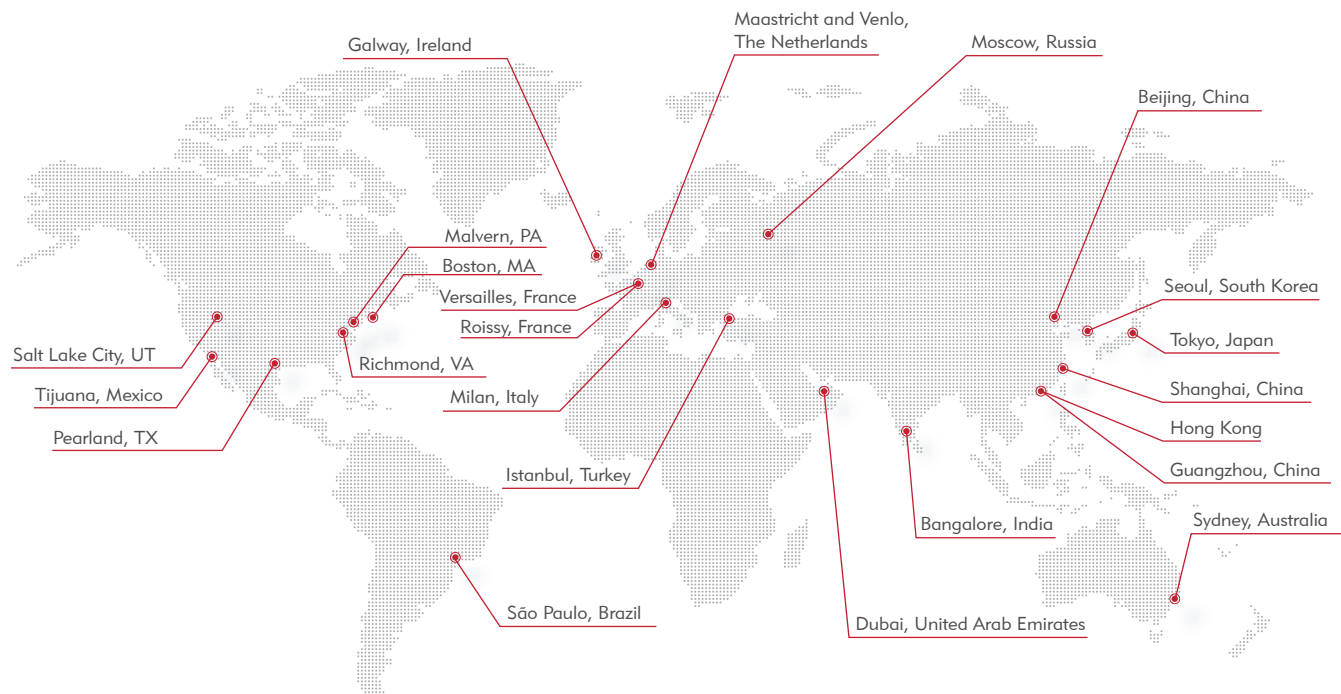

Sede europea de la empresa, Maastricht (Países Bajos)



Distribuido por:

CardioParts®

Tecnología con sentido humano

ventas@cardioparts.com • www.cardioparts.com

Tels. (55) 9183-3933 (81) 8357-0779 (81) 8357-1903





Understand. Innovate. Deliver.™

Merit Medical Systems, Inc.
1600 West Merit Parkway
South Jordan, Utah 84095
1.801.208.4300
1.800.35.MERIT

Merit Medical Europe, Middle East, & Africa (EMEA)
Amerikalaan 42, 6199 AE Maastricht-Airport
The Netherlands
+31 43 358 82 22

Merit Medical Ireland Ltd.
Parkmore Business Park West
Galway, Ireland
+353 (0) 91 703 733

Austria 0800 295 374	Germany 0800 182 0871	Norway 800 11629	Switzerland (Deutsch) +41 225180252 (Français) +41 225948000 (Italiano) +41 225180035
Belgium 0800 72 906 (Dutch) 0800 73 172 (Français)	Ireland (Republic) 1800 553 163	Portugal 308 801 034	UK 0800 973 115
Denmark 80 88 00 24	Italy 800 897 005	Russia +7 495 221 89 02	
Finland 0800 770 586	Luxembourg 8002 25 22	Spain +34 91 1238406	
France 0800 91 60 30	Netherlands 0800 022 81 84	Sweden 020 792 445	